



**Hillrom™**

Instrucciones de uso

# Helion

Sistema de gestión de vídeo



Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto y guárdelas para futuras consultas.

ESPAÑOL  
es

Esta página está intencionadamente en blanco.

**Fabricante** VIDEOMED S.r.l.  
 Via C. Battisti, 31/C  
 35010 Limena (PD)  
 Italy

Teléfono: +39 049 9819113  
 Fax: +39 0434 030689

surgical@hillrom.com  
 hillrom.com

Videomed S.r.l. es una empresa del grupo Hill-Rom Holdings. El fabricante se denomina en lo sucesivo Videomed S.r.l.

**Patrocinador australiano autorizado** Hill-Rom Pty. Ltd.  
 1 Baxter Drive  
 Old Toongabbie NSW 2146  
 Australia

**Servicio técnico de atención al cliente** Los datos de contacto de los centros de Servicio técnico al cliente actuales en los distintos países se encuentran en Internet en [www.hillrom.com](http://www.hillrom.com).

**Información sobre el documento** Instrucciones de uso  
 Este documento está identificado por un código que indica su versión y su estado de actualización. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que se utiliza la versión más reciente.

Número de documento: 80028029  
 ID del idioma: 005  
 Versión: D  
 Número del material: 773640  
 Fecha de publicación: 2022-10-25

Este documento se aplica a las siguientes unidades de venta:

Denominación del producto	REF
Helion Main Unit R	VR401111-1
Helion Main Unit	VR401111-1ND
Helion Main Unit RD	VR401111-1D
Helion Main Unit RSD	VR401111-1DT
Helion Main Unit RS	VR401111-1T
Helion Main Unit S	VR401111-1TND
Helion Main Unit AR	VR401111-2
Helion Main Unit ARD	VR401111-2D
Helion Main Unit ARSD	VR401111-2DT
Helion Main Unit ARS	VR401111-2T
Helion Main Unit SSD R	VR401111-3
Helion 4K	VR401112
Helion 4K Plus	VR401113
Helion Conference	CM401326

Artículos de venta opcionales para el sistema de gestión de vídeo Helion. No todos los productos están disponibles en todos los países.

<b>Denominación del producto</b>	<b>REF</b>
Helion Rack (115V)	AC500920K
Helion Rack (230V)	AC500920K-2
Helion Rack (115V) - Permanent Install.	AC500920K-3
Auxiliary Rack (115V) - Plug&Play Install.	AC500920KB
Auxiliary Rack (230V) - Permanent Install.	AC500920KB-2
Auxiliary Rack (115V) - Permanent Install.	AC500920KB-3
Delrin Rack Spacer Kit	AC500919
On Air Lamp	AC300601
Back cover for monitor 24IN /31IN	AC500634
SDI/Composite Video Input	CS201534
FCS Plate S 1xDVI	CS201560
FCS Plate S 4xNEUTRIK	CS201561
FCS Plate 2xDVI	CS201562
FCS Plate 4xNEUTRIK	CS201563
FCS Plate 1xDVI 4xNEUTRIK	CS201564
FCS Plate 8xNEUTRIK	CS201565
FCS Plate 2xDVI 4xNEUTRIK	CS201568
STD Single Plate 2xDVI 2xNEUTRIK	CS201580
STD Plate 1xVGA 1xDVI 2xNEUTRIK	CS201581
STD Double Plate 4xNeutrik	CS201582
DVI Line Transmission	CS201585
STD Double Plate 4xDVI 2xNeutrik	CS201586
VGA Video Input	CS201587
3.5mm Audio Jack Input	CS201588
STD Single Plate Pass Throught	CS201589
USB Universal Input	CS201591
STD Single Plate 4xNEUTRIK	CS201592
STD Single Plate 2x NEUTRIK	CS201593
STD Single Plate 2xDVI	CS201594
HDMI Video Input	CS201595
PLATE 2XNEUTRIK PENSILI LEGRAND	CS201596
PLATE 2XDVI PENSILI LEGRAND	CS201597
RJ45 NETWORK INPUT	CS201598
STD Plate 1XRemote ON/OFF	CS201599
Tedisel Medical Plate 2XDVI	CS201600
Tedisel Medical Plate 2XNEUTRIK	CS201601



---

<b>Denominación del producto</b>	<b>REF</b>
504 STD Plate 1XDVI 1X NEUTRIK	CS201602
Helion HR Surgical Lights Control SW	DC500103

El manual es proporcionado por Videomed S.r.l. en formato electrónico PDF en soporte digital. Una copia en papel del manual está disponible a petición del personal técnico y médico cualificado.

Videomed S.r.l. declina toda responsabilidad por el uso inadecuado del sistema y/o por los daños causados como consecuencia de operaciones no contempladas en la documentación técnica.

Esta página está intencionadamente en blanco.

## PRÓLOGO

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada, distribuida, traducida a otros idiomas o transmitida por ningún medio electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación, para otros fines que no sean exclusivamente el uso personal del comprador, sin el permiso expreso por escrito del fabricante.

El fabricante no se responsabiliza en modo alguno de las consecuencias derivadas de cualquier operación incorrecta realizada por el usuario.

## NOTA DEL EDITOR

Esta documentación está dirigida expresamente a los usuarios con formación clínica del sistema.

El editor no se responsabiliza en modo alguno de la información y los datos contenidos en este manual: toda la información aquí contenida ha sido proporcionada, comprobada y aprobada por el fabricante para su verificación.

El editor no se responsabiliza de las consecuencias derivadas de las operaciones incorrectas realizadas por el usuario.

## CONSIDERACIONES GENERALES

Deben cumplirse todas las instrucciones y recomendaciones de funcionamiento descritas en este manual.

El personal clínico debe recibir formación sobre todos los procedimientos de funcionamiento y las normas de seguridad antes de utilizar el sistema.

## PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN

Los peligros residuales que pueden producirse durante el uso del producto se identifican en el documento con una palabra de señalización. Se enumeran las medidas de seguridad necesarias y las posibles consecuencias de no adoptarlas. La palabra de señalización correspondiente informa sobre la gravedad del peligro:

<b>Palabra de advertencia</b>	<b>Significado</b>
<b>PELIGRO</b>	La palabra de señalización indica una situación peligrosa que provocará inmediatamente la muerte o lesiones graves si no se toman medidas de precaución.
<b>ADVERTENCIA</b>	La palabra de señalización indica una situación peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se toman medidas de precaución.
<b>CUIDADO</b>	La palabra de señalización indica una situación peligrosa que puede provocar lesiones moderadas o leves si no se toman medidas de precaución.
<b>AVISO</b>	La palabra de señalización indica una situación peligrosa que puede provocar daños materiales o al medio ambiente si no se toman medidas de precaución.

© 2022 Videomed S.r.l.

Esta página está intencionadamente en blanco.



## Contenido

<b>1</b>	<b>Información preliminar general</b>	<b>11</b>
1.1	Responsabilidad del operador	11
1.2	Actualizaciones	11
1.3	Idioma	11
1.4	Cualificaciones del personal	12
1.5	Símbolos	12
1.6	Normas de referencia	14
1.7	Certificación del producto	15
1.8	Garantía	16
<b>2</b>	<b>Información de seguridad</b>	<b>17</b>
2.1	Advertencias generales de seguridad	17
2.2	Compatibilidad electromagnética	18
2.3	Vida útil del sistema	20
2.4	Limpieza	21
2.4.1	Preparación del sistema	21
2.4.2	Limpieza del sistema	21
2.5	Mantenimiento preventivo	21
<b>3</b>	<b>Descripción del sistema</b>	<b>22</b>
3.1	Uso previsto	22
3.2	Uso normal	22
3.3	Contraindicaciones	22
3.4	Uso incorrecto razonablemente previsible	23
3.5	Uso asociado a otros dispositivos médicos	23
3.6	Obligaciones y prohibiciones	23
3.6.1	Prohibiciones del personal	24
3.7	Datos técnicos	24
3.8	Disposición de medidas y pesos	30
3.9	Componentes del sistema	35
3.9.1	Unidad principal	35
3.9.2	Unidad de conferencia	36
3.9.3	Unidad 4K	36
3.9.4	Unidad 4K Plus	36
3.9.5	Software de control	37
<b>4</b>	<b>Operación</b>	<b>38</b>
4.1	Primera puesta en marcha del sistema	38
4.2	Comprobaciones preliminares	38
4.3	Puesta en marcha del sistema	38
4.4	Conexión de las fuentes	39
4.5	Apagado del sistema	39
4.6	Puesta en marcha/apagado del sistema con el botón remoto	40
<b>5</b>	<b>Interfaz de usuario</b>	<b>41</b>
5.1	Descripción general de la interfaz de usuario	41
5.2	Pantalla táctil de control	42
5.3	Función "Video Routing" (Enrutamiento de vídeo)	42
5.3.1	Vista previa en directo	44
5.3.2	Acceso rápido - Grabación	46
5.3.3	Acceso rápido - Retransmisión	47
5.3.4	Control de la cámara Ptz	48
5.3.4.1	Ajustar el zoom de la cámara de habitación	48
5.3.4.2	Ajustar el movimiento de la cámara de la sala	48
5.3.4.3	Guardar la configuración de la cámara (Preajuste)	49

5.3.4.4	Borrar el ajuste de la cámara (preajuste) . . . . .	50
5.3.4.5	Activar el ajuste de la cámara (preajuste) . . . . .	51
5.4	Función "Recording" (Grabación) . . . . .	51
5.4.1	Postratamiento de datos de imagen . . . . .	53
5.4.2	Seleccionar las señales que se van a grabar . . . . .	53
5.4.3	Grabación . . . . .	54
5.4.4	Reproducción de instantáneas y vídeos . . . . .	55
5.4.5	Recortar el vídeo . . . . .	56
5.4.6	Exportar imágenes y vídeos. . . . .	58
5.4.7	Borrar imágenes y vídeos. . . . .	60
5.5	Función "Video Conference" (Videoconferencia). . . . .	61
5.5.1	Seleccionar las señales que se enviarán por videoconferencia . . . . .	62
5.5.2	Eliminar las señales a enviar por videoconferencia. . . . .	63
5.5.3	Seleccionar el destinatario de la llamada . . . . .	63
5.5.4	Inicio de la llamada . . . . .	64
5.5.5	Llamar a un receptor H.323/SIP . . . . .	65
5.6	Funciones adicionales . . . . .	66
5.6.1	Gestión de los datos del paciente . . . . .	66
5.6.1.1	Seleccionar un paciente presente en la lista . . . . .	67
5.6.1.2	Introducir un paciente nuevo. . . . .	68
5.6.1.3	Introducir un paciente de urgencia . . . . .	69
5.6.1.4	Búsqueda de un paciente presente en una lista . . . . .	70
5.6.1.4.1	Filtro de paciente en emergencia . . . . .	70
5.6.1.5	Modificación de los datos maestros del paciente . . . . .	71
5.6.1.6	Acceso a la lista de trabajo. . . . .	72
5.6.2	Lista de comprobación quirúrgica . . . . .	72
5.6.3	Preajuste . . . . .	73
5.6.3.1	Configuración de preajustes . . . . .	74
5.6.3.2	Activación de la preajuste . . . . .	75
5.6.4	Vista múltiple . . . . .	76
5.6.4.1	Ajuste de la vista múltiple . . . . .	76
5.6.5	Control de audio . . . . .	78
5.6.5.1	Ajuste del volumen. . . . .	79
5.6.5.2	Desactivación de los micrófonos y del audio . . . . .	80
5.6.6	Gestión de las lámparas quirúrgicas . . . . .	81
5.6.7	Gestión del panel de control ambiental . . . . .	82
5.7	Función "Lock with PIN" (Bloqueo con PIN) . . . . .	83
5.8	Función "Login" (Inicio de sesión) . . . . .	84
<b>6</b>	<b>Instrucciones de eliminación . . . . .</b>	<b>85</b>
<b>7</b>	<b>Anexo I - Manual breve . . . . .</b>	<b>86</b>



# 1 Información preliminar general

## 1.1 Responsabilidad del operador

Las instrucciones de uso del sistema de gestión de vídeo Helion están destinadas a operadores formados y autorizados para su manejo. La dirección del centro médico es responsable de la formación del personal sobre el uso del producto sanitario.

Las instrucciones de uso contienen los temas que se refieren a un uso correcto del sistema, con el fin de mantener sus características funcionales y cualitativas inalteradas en el tiempo. También se proporciona toda la información y las advertencias para un uso correcto con total seguridad.

Las instrucciones de uso, al igual que el certificado de conformidad CE, son parte integrante del sistema y deben acompañarlo siempre en cualquier desplazamiento o reventa. Es responsabilidad del usuario conservar esta documentación intacta, para poder consultarla durante toda la vida útil del sistema. Las instrucciones de uso deben almacenarse de forma que se garantice que el usuario pueda acceder a la información necesaria para utilizar el producto sanitario en cualquier momento.

### AVISO

**El usuario y/o el paciente deben informar de cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo y debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del país en el que se encuentran el usuario o el paciente.**

## 1.2 Actualizaciones

Videomed S.r.l. se reserva el derecho de actualizar las instrucciones de uso en cualquier momento con modificaciones y/o traducciones sin previo aviso.

Póngase en contacto con la oficina de atención al cliente de Videomed S.r.l. para estar al día sobre la última versión de las instrucciones.

## 1.3 Idioma

Las instrucciones de uso originales se han redactado en inglés americano.

Cualquier traducción a otros idiomas debe hacerse a partir de las instrucciones originales.

El fabricante es responsable de la información contenida en las instrucciones originales; las traducciones en diferentes idiomas no se pueden verificar completamente; por lo tanto, si se detecta una inconsistencia, se requiere seguir el texto en el idioma original o contactar con la oficina de atención al cliente de Videomed S.r.l.

## 1.4 Cualificaciones del personal






Consulte la siguiente tabla para establecer las habilidades y cualificaciones del personal:

Cualificación	Descripción
Operador	Persona física o jurídica (por ejemplo, un médico o un hospital) que posee y utiliza el sistema de gestión de vídeo de Helion. Deben proporcionar un sistema seguro e instruir adecuadamente al usuario en el uso previsto y permitido del sistema.
Usuario	Persona convenientemente formada o que, gracias a su cualificación profesional, está autorizada para operar y utilizar el sistema de gestión de vídeo Helion en las actividades requeridas. Es responsable del manejo correcto y seguro del sistema y se asegura de que se utilice exclusivamente para el fin previsto.
Personal cualificado	Personas autorizadas que, por lo general, son empleados del gestor o que han adquirido sus conocimientos mediante una formación profesional en el sector médico, que son capaces de evaluar su trabajo y reconocer los posibles riesgos basándose en su experiencia profesional y en el conocimiento de las normas de seguridad. Cuando se requiera, el personal cualificado deberá certificar su cualificación mediante un documento válido.










## 1.5 Símbolos

La etiqueta del dispositivo debe estar intacta y colocada en los lugares especificados del producto. La etiqueta del dispositivo que esté dañada, sea ilegible o falte debe ser sustituida. La etiqueta del dispositivo no debe modificarse ni retirarse.

Las unidades del sistema de gestión de vídeo Helion están equipadas con placas de identificación. Cada placa contiene los datos de identificación de la unidad.

Símbolo	Descripción
	Símbolo utilizado para indicar la necesidad de consultar las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.
	Símbolo de cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.
	Equipotencial: símbolo de "compensación de potencial".
	Tierra de protección (tierra)
	Punto de conexión del circuito neutro en los equipos INSTALADOS PERMANENTEMENTE



Símbolo	Descripción
	Símbolo utilizado para indicar la fecha de fabricación.
	Símbolo utilizado para identificar el nombre del fabricante.
	Contenedor de barras: este producto no debe eliminarse como residuo mixto municipal, es preciso recogerlo por separado.
	Símbolo utilizado para indicar el número de material Videomed S.r.l.
	Símbolo utilizado para indicar el número de serie.
	Símbolo utilizado para indicar un dispositivo médico.
 (01)00615521031626 (21)123456789012 (11)210212	Indica el código UDI de Identificación Única de Dispositivos, se compone de UDI-DI (01) y UDI-PI ([11] fecha de fabricación [21] número de serie).
	MÉDICO - EQUIPO MÉDICO GENERAL EN CUANTO A LOS PELIGROS DE CHOQUE ELÉCTRICO, INCENDIO Y MECÁNICO, SOLO DE ACUERDO CON ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012), CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-1 (2014)
 7d hillrom.co.uk	Consultar las instrucciones de uso. Hay una copia de las instrucciones de uso disponible en este sitio web. Es posible pedir una copia impresa de las instrucciones de uso a Hillrom, la cual se entregaría en el plazo de 7 días naturales.
<b>R<sub>x</sub> ONLY</b>	Válido solo para EE. UU. Cuidado: La ley federal (Estados Unidos de América) restringe la venta de este dispositivo a un profesional sanitario autorizado o por orden de este.
<b>#</b>	Símbolo utilizado para indicar el número de modelo.

## 1.6 Normas de referencia

Videomed S.r.l. declara que el sistema de gestión de vídeo Helion cumple con las normas específicas del sector médico.

### Legislación y normas aplicables a los países de los Estados Unidos de América (EE. UU.):

Normas	Descripción
21 CFR Parte 820	Regulación del sistema de calidad
21 CFR Parte 821	Requisitos de seguimiento de los dispositivos médicos
21 CFR Parte 803, 806, 807	Informes de dispositivos médicos, Informes de correcciones y retiradas de dispositivos médicos, Registro de establecimientos y listado de productos para fabricantes e importadores iniciales de productos
21 CFR Parte 801	Etiquetado
19 CFR Parte 134	Marca del país de origen.
AAMI/ANSI/ISO 14971	Productos sanitarios - Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios
AAMI/ANSI/CEI 62304	Software para dispositivos médicos - Procesos del ciclo de vida del software
ANSI AAMI CEI 62366-1	Productos sanitarios - Parte 1: Aplicación de la ingeniería de usabilidad a los productos sanitarios
AAMI/ANSI HE75	Ingeniería de los factores humanos - Diseño de dispositivos médicos
AAMI/ANSI ES60601-1	Equipos electromédicos - parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y las prestaciones esenciales (CEI 60601- 1:2005, Mod). (General II (ES/EMC))
AAMI/ANSI/CEI 60601-1-2	Equipos electromédicos -- Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad básica y las prestaciones esenciales -- Norma colateral: Perturbaciones electromagnéticas -- Requisitos y ensayos. (General II (ES/EMC))
AAMI/ANSI/ISO 15223-1	Productos sanitarios - Símbolos que deben utilizarse en las etiquetas de los productos sanitarios, en el etiquetado y en la información que debe proporcionarse - Parte 1: Requerimientos generales
ISO 7010: Segunda edición, incluidas las enmiendas 1 a 7	Señales de seguridad
Propuesta 65 de California	Ley de Agua Potable Segura y Aplicación de Tóxicos de 1986

**Legislación y normas aplicables a los países de la Unión Europea (UE):**

<b>Normas</b>	<b>Descripción</b>
Reglamento (UE) 2017/745	El reglamento sobre productos sanitarios que modifica la Directiva 93/42/CEE entrará en vigor el 26 de mayo de 2021
EN 1041	Información proporcionada por el fabricante de productos sanitarios
EN ISO 13485	Sistemas de gestión de la calidad de los productos sanitarios
EN ISO 14971	Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios
EN ISO 15223-1	Símbolos a utilizar en las placas del modelo de los productos sanitarios, en el etiquetado y en la información que debe proporcionarse - Parte 1: Requerimientos generales
EN 60601-1	Requisitos generales de seguridad fundamental y rendimiento esencial
EN 60601-1-2	Requisitos generales relativos a la seguridad fundamental y a las prestaciones esenciales - Norma colateral: Compatibilidad electromagnética
EN 60601-1-6	Normas generales de seguridad - Regla colateral: Utilidad
EN 62304	Software para dispositivos médicos - Procesos del ciclo de vida del software
EN 62366-1	Aplicación de la ingeniería de las características del usuario a los dispositivos médicos
RAEE 2012/19/UE	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Directiva 2011/65/UE, modificada por la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión	Restricción de la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

**1.7 Certificación del producto**



El sistema de gestión de vídeo Helion es un dispositivo médico de clase I según el Reglamento 2017/745/UE relativo a los dispositivos médicos, y cumple con la versión del reglamento actualmente en vigor en el momento de la venta del producto. Videomed S.r.l. declara la conformidad de Helion con los requisitos generales de seguridad y rendimiento según el Reglamento 2017/745/UE relativo a los dispositivos médicos, Anexo I. Se llevará a cabo un procedimiento de evaluación de la conformidad exigido para los productos de la clase I con arreglo al artículo 52, apartado 7, teniendo en cuenta un sistema de gestión de la calidad con arreglo al anexo IX, capítulo 1. El fabricante confirma la conformidad con el marcado CE.

## **1.8 Garantía**

Las cláusulas completas de la garantía están previstas en el contrato de venta.

Videomed S.r.l. asegura la seguridad y la fiabilidad funcional del sistema siempre que:

- el sistema se utilice, gestione y repare exclusivamente como se describe en estas instrucciones de uso;
- las instalaciones, modificaciones y reparaciones las realicen exclusivamente los servicios de asistencia de Videomed S.r.l.;
- solo se utilicen piezas de recambio y accesorios autorizados por el fabricante;
- no se realicen cambios estructurales en los dispositivos.

El estado del sistema después de la prueba del sistema se debe registrar en un protocolo de instalación. La puesta en marcha se utiliza como prueba del inicio del período de garantía.

El contrato comercial puede contener más detalles.

Las condiciones exigidas por el contrato comercial (si son diferentes) tienen prioridad sobre lo que se indica en esta sección.

## 2 Información de seguridad

### 2.1 Advertencias generales de seguridad

El sistema de gestión de vídeo Helion lo debe utilizar personal debidamente formado.

#### PELIGRO

**DESCARGA ELÉCTRICA POR TOMA DE CORRIENTE DAÑADA.**  
Compruebe el cable de alimentación de red antes de conectarlo y no lo utilice si ha resultado aplastado o si el aislamiento está dañado.

#### PELIGRO

**CHOQUE ELÉCTRICO POR PRESENCIA DE PARTES VIVAS EXPUESTAS.**

También se recomienda comprobar periódicamente la integridad de las partes del aparato, para detectar la presencia de partes expuestas tras un impacto o una caída y no utilizar el aparato en presencia de daños en la estructura o en sus componentes.

#### PELIGRO

**DESCARGA ELÉCTRICA POR UN PROCEDIMIENTO INCORRECTO DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA**

El sistema Helion debe ser alimentado y recibir protección a tierra del mismo panel eléctrico que alimenta la sala de operaciones. También todos los equipos conectados al sistema Helion deben ser alimentados y recibir protección a tierra del mismo panel eléctrico que alimenta la sala de operaciones.

#### ADVERTENCIA

Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el plomo y el ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), de los que el estado de California tiene constancia que causan cáncer, y el plomo y el ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), de los que el estado de California tiene constancia que causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### CUIDADO

Toda la información de seguridad se debe respetar para un uso seguro del sistema de gestión de vídeo Helion.

#### CUIDADO

Para evitar complicaciones debidas a las cargas de equilibrio electrostático entre las partes del dispositivo y el paciente, el usuario no debe tocar simultáneamente las partes metálicas del sistema y el paciente.

**⚠ CUIDADO**

**MEDICIÓN DE LAS CORRIENTES DE DISPERSIÓN**

Es necesario medir las corrientes de fuga con los circuitos aguas abajo del sistema Helion abiertos. De lo contrario, las corrientes de fuga de estos circuitos se sumarán a las del sistema Helion.

**⚠ CUIDADO**

Está absolutamente prohibido retirar las placas de identificación y/o sustituirlas por otras. Si las placas se dañan o se quitan, el cliente debe notificarlo al fabricante.

## 2.2 Compatibilidad electromagnética

El sistema de gestión de vídeo Helion suministrado contiene componentes electrónicos sujetos a la normativa de compatibilidad electromagnética, afectados por emisiones conducidas y radiadas.

Los valores de emisión cumplen con los requisitos normativos gracias al uso de componentes que cumplen con la directiva de compatibilidad electromagnética, a las conexiones adecuadas y a la instalación de filtros cuando es necesario.

Por lo tanto, el sistema de gestión de vídeo Helion cumple con la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC).

**⚠ CUIDADO**

**Cualquier actividad de mantenimiento de los equipos eléctricos realizada de forma no conforme o la sustitución incorrecta de componentes puede comprometer la eficacia de las soluciones adoptadas.**

El producto Helion es un dispositivo electromédico de clase A según la norma CEI 60601-1-2 (CISPR 11), es decir, es adecuado para su uso en un entorno electromagnético específico. El cliente y/o el usuario del producto debe asegurarse de que se utiliza en un entorno electromagnético como se describe a continuación.

Prueba de emisión	Compatibilidad	Guía del entorno electromagnético
Emisión de RF radiada y conducida CISPR 11	Grupo 1	Helion utiliza energía de RF (radiofrecuencia) sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de RF son muy bajas y no deberían causar interferencias en los dispositivos electrónicos adyacentes.
	Clase A	Helion es apto para su uso en todos los edificios, excepto los domésticos y los conectados directamente a la red pública de fuente de alimentación de baja tensión que abastece a los edificios utilizados para fines domésticos.
Emisiones de armónicos CEI 61000-3-2	No aplicable	
Emisiones de fluctuaciones de voltaje/flicker según CEI 61000-3-3	No aplicable	

**Consejos y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética**

El producto es adecuado para su uso en un entorno electromagnético específico. El cliente y/o el usuario del producto deben asegurarse de que se utiliza en un entorno electromagnético como se describe a continuación:

Prueba de INMUNIDAD	Nivel de prueba CEI	Nivel de compatibilidad	Entorno electromagnético - guía
Descarga electrostática (ESD) CEI 61000-4-2	$\pm 8$ kV en contacto $\pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 15$ kV en el aire	CEI 60601-1-2 Nivel de prueba	El suelo debe ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están cubiertos de material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos el 30 %. Es posible que haya una pérdida temporal de la señal (unos segundos).
Campos electromagnéticos radiados CEI 61000-4-3	3 V/m de 80 MHz a 2,7 GHz	CEI 60601-1-2 Nivel de prueba	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte del EUT, incluidos los cables. La distancia mínima es de 30 cm.
Transitorios eléctricos rápidos (ráfaga) CEI 61000-4-4	$\pm 2$ kV para las líneas de alimentación $\pm 1$ kV para líneas de entrada/salida > 3 m	CEI 60601-1-2 Nivel de prueba	La calidad de la red eléctrica debe ser la típica de un entorno comercial y/o hospitalario.
Pulsos CEI 61000-4-5	$\pm 0,5, \pm 1$ kV en modo diferencial $\pm 0,5, \pm 1, \pm 2$ kV en modo común	CEI 60601-1-2 Nivel de prueba	La calidad de la red eléctrica debe ser la típica de un entorno comercial u hospitalario.
Trastornos conducidos, inducidos por campos de RF CEI 61000-4-6	3 V 150 kHz a 80 MHz 6 V Frecuencias ISM	CEI 60601-1-2 Nivel de prueba	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte del EUT, incluidos los cables. La distancia mínima es de 30 cm.
Campo magnético de frecuencia de red (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	30 A/m	CEI 60601-1-2 Nivel de prueba	Los campos magnéticos de la frecuencia de alimentación deben tener los niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico.
Bajadas de voltaje, breves interrupciones y variaciones de voltaje en las líneas de entrada de energía. CEI 61000-4-11	10 ms – 0 % a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° 20 ms – 0 % a 0° 500 ms – 70 % a 0° 5 s – 0 %	CEI 60601-1-2 Nivel de prueba	La calidad del voltaje de red debe ser la típica de los entornos comerciales u hospitalarios. Si el usuario del aparato requiere que este siga funcionando aunque se interrumpa el suministro de energía eléctrica, se recomienda alimentar el aparato con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o con baterías.

**Orientación y declaración del fabricante - Alcance y nivel de frecuencia: Equipo de comunicación inalámbrica por RF**

Frecuencia de prueba (MHz)	Modulación	Nivel de INMUNIDAD mínimo (V / m)	Nivel de INMUNIDAD aplicado (V / m)
385	** Modulación de pulsos: 18 Hz	27	27
450	<input type="checkbox"/> * FM + 5 Hz de desviación: 1 kHz sinusoidal <input checked="" type="checkbox"/> ** Modulación de pulsos: 18 Hz	28	28
710 745 780	** Modulación de pulsos: 217 Hz	9	9
810 870 930	** Modulación de pulsos: 18 Hz	28	28
1720 1845 1970	** Modulación de pulsos: 217 Hz	28	28
2450	** Modulación de pulsos: 217 Hz	28	28
5240 5500 5785	** Modulación de pulsos: 217 Hz	9	9

**2.3 Vida útil del sistema**

Siempre que se respeten estrictamente todas las normas de seguridad y mantenimiento aplicables, el sistema de integración de vídeo se ha diseñado para garantizar una duración de 8 años. El ciclo de vida incluye la garantía de la funcionalidad del producto de acuerdo con las instrucciones específicas de uso, el suministro del servicio de asistencia y la disponibilidad de piezas de recambio; Videomed S.r.l. aplica un sistema de gestión de la calidad certificado según la norma EN ISO 13485 a todos sus procesos empresariales, lo que es una garantía de:

- la más alta calidad;
- fiabilidad del producto y de los accesorios;
- facilidad de uso;
- diseño funcional;
- optimización para el fin previsto.





## 2.4 Limpieza



### **CUIDADO**

**No se deben utilizar productos de limpieza.**

Este párrafo indica cómo realizar la limpieza en el sistema Helion. La limpieza se realizará de forma regular (al menos una vez a la semana) para garantizar que los componentes se mantengan en buen estado de funcionamiento e intactos.

Utilice el equipo de protección personal para cualquier actividad de mantenimiento y limpieza. Lista de dispositivos de protección: zapatos cerrados, pantalones largos resistentes de tela, túnica, guantes. Compruebe el equipo de protección personal para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Informe al operador de cualquier defecto.

### 2.4.1 Preparación del sistema

Saque el enchufe del cable de alimentación de la caja de enchufe. Para las instalaciones permanentes, desconecte el interruptor principal situado en el panel frontal del soporte.

### 2.4.2 Limpieza del sistema

1. Utilice el equipo de seguridad personal necesario.
2. Con los medios adecuados, elimine la suciedad gruesa del soporte o de las unidades para la instalación sin soporte.
3. Con un paño limpio y seco, limpie todos los residuos de la estantería o de las unidades. Limpie primero la parte superior y luego los laterales del soporte o de las unidades.
4. Inspeccione visualmente las superficies del sistema. Las superficies deben estar libres de residuos. Preste especial atención al posicionamiento de las rejillas del ventilador para una recirculación óptima del aire. Vuelva a limpiar las superficies con residuos aún visibles.

## 2.5 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento debe realizarse anualmente para garantizar que los componentes permanezcan intactos y en buen estado de funcionamiento.

Los productos deben ser revisados únicamente por técnicos de mantenimiento cualificados. Los datos de contacto de los técnicos de servicio están disponibles en el servicio técnico de atención al cliente.

Videomed S.r.l. recomienda la celebración de un contrato de mantenimiento para poder realizar el mantenimiento de forma fiable y a tiempo.

### **3 Descripción del sistema**

#### **3.1 Uso previsto**

El sistema de gestión de vídeo Helion es un sistema de videocomunicación médica que se utiliza exclusivamente para la visualización y gestión de fuentes de audio-vídeo, y para el control de una lámpara de quirófano dentro de las especificaciones establecidas por el fabricante.

#### **3.2 Uso normal**

- El sistema se utiliza exclusivamente para la visualización y gestión de fuentes de audio-vídeo ya existentes;
- Controlar las señales a través de un monitor de pantalla táctil;
- Distribuir señales analógicas y digitales a diferentes salidas de vídeo;
- Exportar datos a otros dispositivos (que no forman parte del MD);
- Documentar la intervención mediante el archivo temporal;
- Intercambio de información por videoconferencia con el quirófano compartiendo imágenes y vídeos con el mundo exterior de la sala en alta resolución;
- Mantenimiento regular del MD de acuerdo con los intervalos de mantenimiento definidos por técnicos de servicio cualificados;
- Operación inicial por parte del operador;
- La reparación y eliminación del MD debe ser realizada por técnicos de servicio cualificados, según sea necesario;
- Controlar el encendido, apagado e intensidad de las luces quirúrgicas compatibles.

#### **3.3 Contraindicaciones**

- El sistema no se utilizará para realizar hallazgos y diagnósticos;
- El sistema no se utilizará para comprobar las funciones vitales del cuerpo;
- El sistema no se utilizará para realizar informes;
- El producto no se ha diseñado para almacenar datos clínicos con fines médico-legales;
- El sistema no se utilizará como sistema de precisión o medición de la función de apoyo vital;
- El sistema no se utilizará para corregir la administración de medicamentos;
- El sistema no se utilizará como sistema de monitorización del estado del paciente;
- El sistema no se utilizará como sistema de alarma;
- El sistema no se utilizará para un tratamiento específico. En caso de que una información incorrecta pueda conducir a un tratamiento inadecuado para el paciente;
- El sistema (los monitores conectados al sistema) no se utilizará como fuente principal de información.



### 3.4 Uso incorrecto razonablemente previsible

A continuación se enumeran los usos indebidos razonablemente previsibles que deben considerarse estrictamente prohibidos:

- utilizar el sistema en zonas con riesgo de explosión;
- utilizar el sistema cerca de campos electromagnéticos intensos;
- utilizar el sistema de manera diferente a lo que se requiere en el párrafo "Uso previsto".

Cualquier otra utilización del sistema respecto al uso previsto deberá autorizarla previamente por escrito el fabricante.

Cualquier uso que no cumpla con las condiciones especificadas anteriormente se considerará "uso incorrecto"; por lo tanto, el fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños causados a las cosas o a las personas y considera nulo cualquier tipo de garantía para el sistema.

El uso incorrecto del sistema excluye cualquier responsabilidad del fabricante.

### 3.5 Uso asociado a otros dispositivos médicos

El sistema de gestión de vídeo Helion puede combinarse con dispositivos de otros fabricantes.

En el entorno del paciente, instale únicamente dispositivos aprobados de acuerdo con la norma CEI 60601-1.

Fuera del entorno del paciente, también se permiten dispositivos aprobados de acuerdo con las normas CEI 62368-1.

Si se instala un dispositivo en una fase posterior, la instalación debe realizarse como se especifica en la norma CEI 60601-1 y de acuerdo con las especificaciones proporcionadas por el fabricante.

Videomed no se hace responsable de la combinación del sistema de gestión de vídeo con productos de terceros.

### 3.6 Obligaciones y prohibiciones

El sistema Videomed S.r.l. Helion solo debe ser utilizado por personal médico y paramédico con la cualificación profesional necesaria, que haya leído estas instrucciones de uso y que haya recibido la formación adecuada para el uso del sistema. La formación se certifica mediante la participación en el curso de formación denominado "Formación del personal sanitario en el uso de Helion". Esta formación se debe documentar.

### 3.6.1 Prohibiciones del personal

En particular, el personal no debe:

- utilizar el sistema de forma inadecuada, es decir, para usos distintos a los indicados en el apartado "Uso previsto";
- sustituir o modificar los componentes del sistema sin la autorización del fabricante;
- utilizar el sistema como punto de apoyo aunque no esté en funcionamiento (con el consiguiente riesgo de caída y/o de daño del propio sistema);
- utilizar el sistema fuera de las condiciones ambientales permitidas (véase el párrafo "Datos técnicos").



**Videomed S.r.l. no se responsabiliza de los daños causados a las cosas o a las personas si se comprueba que el sistema se ha utilizado en una de las salas no permitidas.**

## 3.7 Datos técnicos

### MAIN UNIT - Especificaciones técnicas

Entradas de vídeo	18 (14 DVI, 2 3G-SDI, 2 CVBS)
Salidas de monitor	10 DVI sobre CAT 7 o fibra óptica
Resoluciones soportadas	Vídeo estándar PAL (720 x 576) HDTV (1280 x 720) Full HDTV (1920 x 1080p) Resolución del PC (1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1200) Opción UHD/4K con unidad 4K
Dimensiones	133 x 430 x 450 mm
Fuente de alimentación	100-240 V 50-60 Hz CA
Consumo de energía	160 W
Protección	Protección contra cortocircuitos Protección de sobrecarga Protección contra sobretensiones
Voltaje de aislamiento	Entrada/salida 4000 V CA Entrada/FG 1500 V CA
Recinto	IP20
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: +10/+40 °C Rango de humedad relativa de funcionamiento: 30 % a 75 % Rango de presión atmosférica de funcionamiento: Desde 54,0 kPa hasta 106,0 kPa Temperatura de almacenamiento: -40/+70 °C Intervalo de humedad relativa de almacenamiento: 10 % a 100 % incluida la condensación Rango de presión atmosférica de almacenamiento: Desde 50,0 kPa hasta 106,0 kPa



**MAIN UNIT - Especificaciones técnicas**

Altitud máxima de manejo	5000 mt
Pantalla táctil de control	21", 24" o 27" , 1920 x 1080, 16:9
Capacidad de almacenamiento	2 TB por defecto (ampliable hasta 4 TB)
Entradas de audio	3 Micrófonos 2 Auxiliar estéreo 1 videoconferencia
Salidas de audio	1 Estéreo amplificado 1 Estéreo no amplificado 1 videoconferencia 2 x salidas de terminal de altavoces (L/R)
Protocolos de comunicación	DICOM
Otras conexiones	2 x USB 2.0 3 x USB 3.0 12 puertos serie RS232 (2 puertos serie RS232 reservados para el fabricante)
Peso de la unidad	13,5 kg

**CONFERENCE UNIT - Especificaciones técnicas**

Vídeo estándar	H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 Perfil Alto, H.264 SVC. Codificación hasta 1920 x 1080p 60fps
Entradas de vídeo	2 entradas: – 2 x entradas de vídeo HD (1080p60/720p60)
Dimensiones	44 x 430 x 450 mm
Fuente de alimentación	100-240 V 50-60 Hz CA
Salidas de vídeo	2 salidas: – 2 x salidas de vídeo HD (1080p60/720p60)
Consumo de energía	34 W
Protección	Protección contra cortocircuitos Protección de sobrecarga Protección de sobrecorriente Protección contra sobretensiones
Voltaje de aislamiento	Entrada/salida 4000 V CA Entrada/FG 1500 V CA
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: +10/+40 °C Rango de humedad relativa de funcionamiento: 30 % a 75 % Rango de presión atmosférica de funcionamiento: Desde 54,0 kPa hasta 106,0 kPa Temperatura de almacenamiento: -40/+70 °C Intervalo de humedad relativa de almacenamiento: 10 % a 100 % incluida la condensación Rango de presión atmosférica de almacenamiento: Desde 50,0 kPa hasta 106,0 kPa
Altitud máxima de manejo	5000 mt
Recinto	IP20
Audio HD	MicPod 100 Hz fino a 16 kHz Botón de silencio
Peso de la unidad	8 kg

**4K UNIT - Especificaciones técnicas**

Entradas de vídeo	5 puertos HDMI
Salidas de vídeo	5 puertos HDMI
Resoluciones soportadas	Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz
Transmisión al monitor	Cableado de fibra óptica
Puertos adicionales	5 x DVI sobre CAT 6/7 de salida escalada a FullHD 1080 5 x DVI sobre CAT 6/7 de entrada de paso (FullHD 1080)
Dimensiones	44 x 430 x 450 mm
Fuente de alimentación	100-240 V 50-60 Hz CA
Consumo de energía	30 W
Protección	Protección contra cortocircuitos Protección de sobrecarga Protección de sobrecorriente Protección contra sobretensiones
Voltaje de aislamiento	Entrada/salida 4000 V CA Entrada/FG 1500 V CA
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: +10/+40 °C Rango de humedad relativa de funcionamiento: 30 % a 75 % Rango de presión atmosférica de funcionamiento: Desde 54,0 kPa hasta 106,0 kPa Temperatura de almacenamiento: -40/+70 °C Intervalo de humedad relativa de almacenamiento: 10 % a 100 % incluida la condensación Rango de presión atmosférica de almacenamiento: Desde 50,0 kPa hasta 106,0 kPa
Altitud máxima de manejo	5000 mt
Recinto	IP20
Peso de la unidad	5,5 kg

#### 4K PLUS UNIT - Especificaciones técnicas

Entradas de vídeo	2 puertos HDMI 2 puertos de pantalla
Salidas de vídeo	2 puertos HDMI 2 puertos de pantalla
Resoluciones soportadas	Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz
Transmisión al monitor	Cableado de fibra óptica
Puertos adicionales	4 x DVI sobre CAT 6/7 de salida escalada a FullHD 1080 4 x DVI sobre CAT 6/7 de entrada de paso (FullHD 1080)
Dimensiones	44 x 430 x 450 mm
Fuente de alimentación	100-240 V 50-60 Hz CA
Consumo de energía	30 W
Protección	Protección contra cortocircuitos Protección de sobrecarga Protección de sobrecorriente Protección contra sobretensiones
Voltaje de aislamiento	Entrada/salida 4000 V CA Entrada/FG 1500 V CA
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: +10/+40 °C Rango de humedad relativa de funcionamiento: 30 % a 75 % Rango de presión atmosférica de funcionamiento: Desde 54,0 kPa hasta 106,0 kPa Temperatura de almacenamiento: -40/+70 °C Intervalo de humedad relativa de almacenamiento: 10 % a 100 % incluida la condensación Rango de presión atmosférica de almacenamiento: Desde 50,0 kPa hasta 106,0 kPa
Altitud máxima de manejo	5000 mt
Recinto	IP20
Peso de la unidad	5,5 kg





**RACK UNIT (opcional) - Especificaciones técnicas**

Dimensiones	800 x 600 x 757 mm
Color	RAL 7016 fruncido
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: +10/+40 °C Rango de humedad relativa de funcionamiento: 30 % a 75 % Rango de presión atmosférica de funcionamiento: Desde 70,0 kPa hasta 106,0 kPa Temperatura de almacenamiento: -40/+70 °C Intervalo de humedad relativa de almacenamiento: 10 % a 100 % incluida la condensación Rango de presión atmosférica de almacenamiento: Desde 50,0 kPa hasta 106,0 kPa
Componente interno del soporte	Dos ventiladores, la ventilación forzada produjo 2410 metros cúbicos por minuto (MMC) mínimo cada uno.
Componente interno del soporte	Transformador de aislamiento, potencia 1000 VA
Altitud máxima de manejo	3000 mt
Recinto	IP20
Peso de la unidad	64 kg

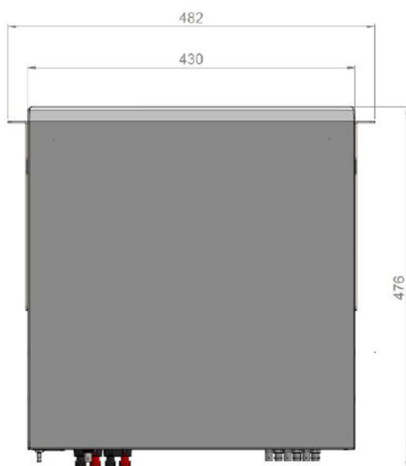
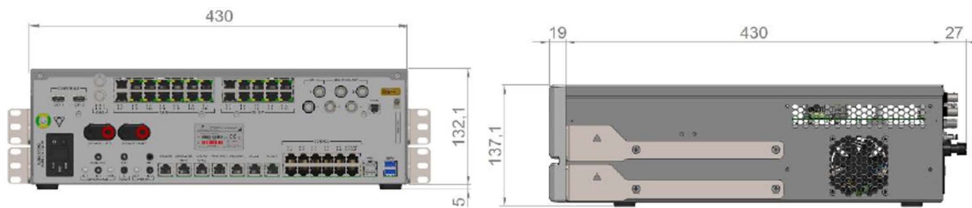
### 3.8 Disposición de medidas y pesos

#### MAIN UNIT

Dimensiones	133 x 430 x 450 mm
Peso de la unidad	13,5 kg



#### Dimensiones del soporte (opcional)



Soportes (opcional)

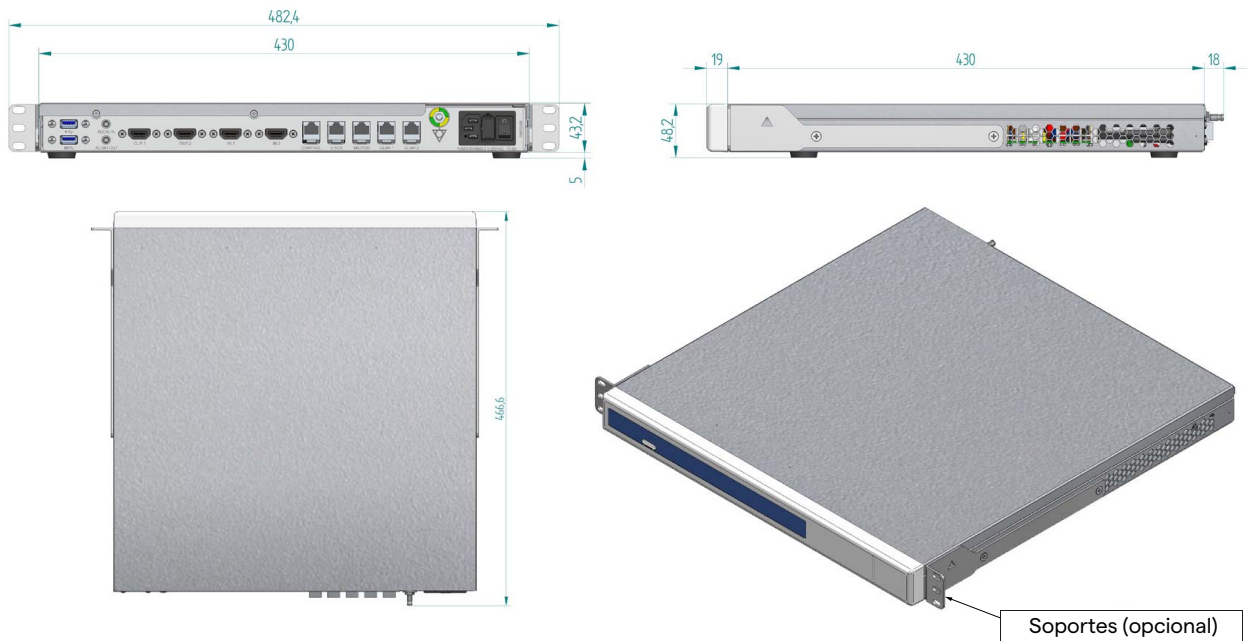


### CONFERENCE UNIT

Dimensiones	44 x 430 x 450 mm
Peso de la unidad	8 kg



Dimensiones del soporte (opcional)

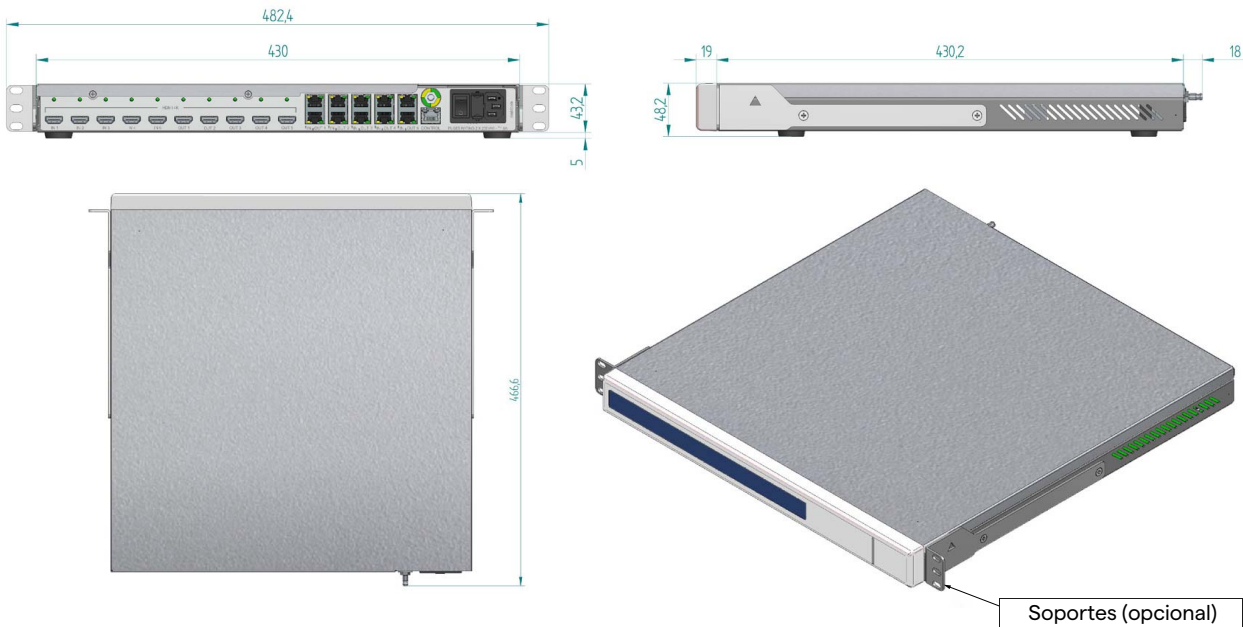


### 4K UNIT

Dimensiones	44 x 430 x 450 mm
Peso de la unidad	5,5 kg



Dimensiones del soporte (opcional)



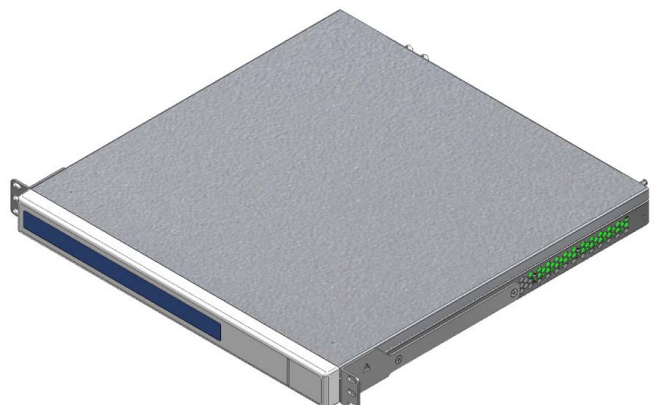
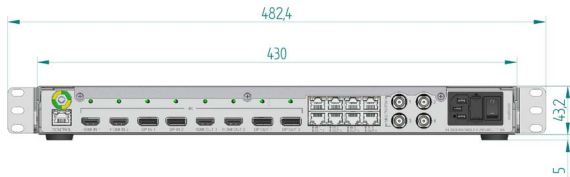


### 4K PLUS UNIT

Dimensiones	44 x 430 x 450 mm
Peso de la unidad	5,5 kg



Dimensiones del soporte (opcional)

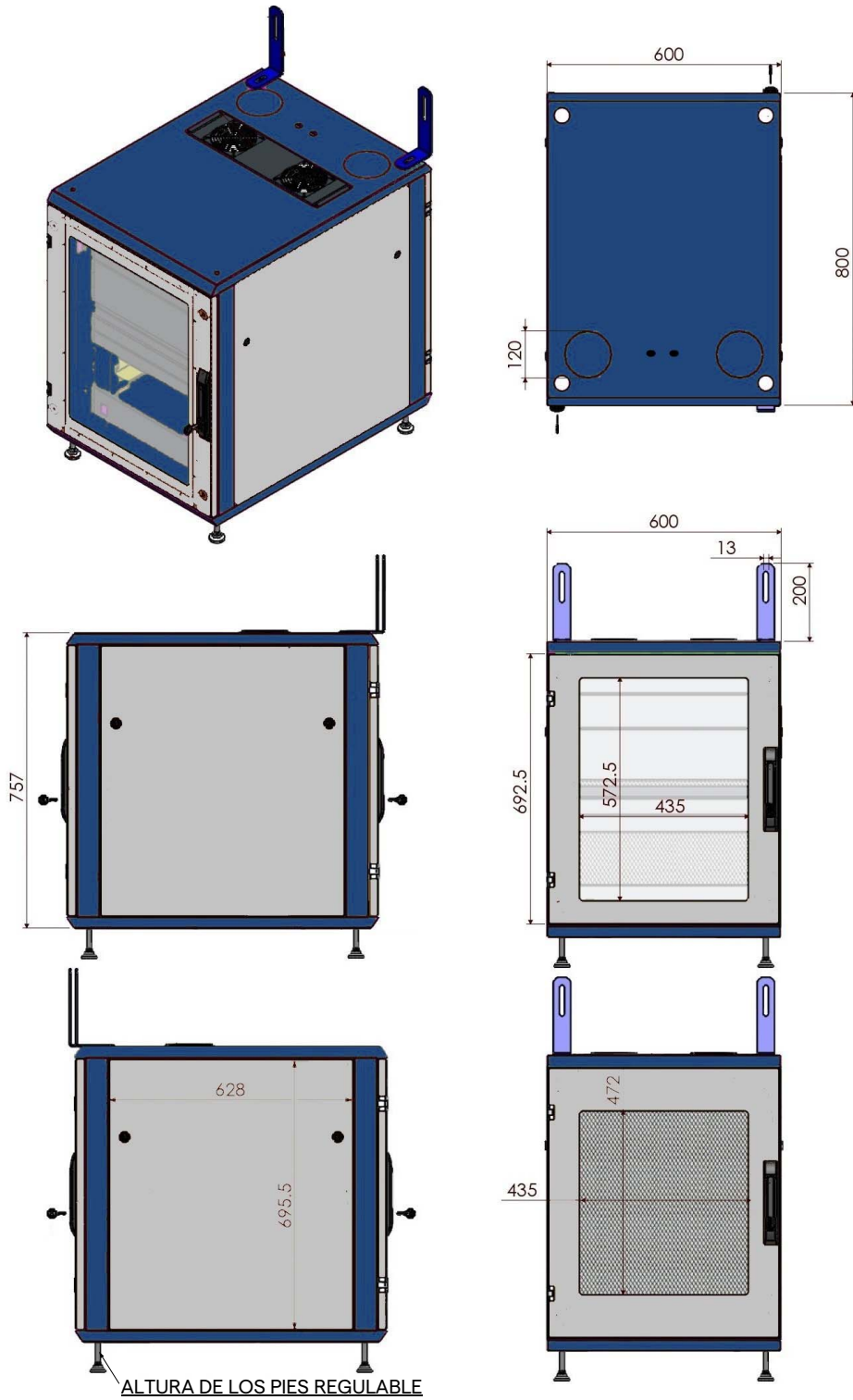


Soportes (opcional)

### RACK UNIT

Dimensiones 800 x 600 x 757 mm

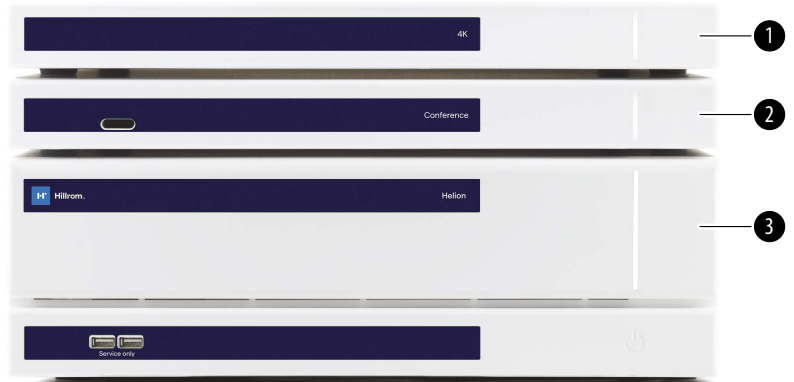
Peso de la unidad 64 kg



### 3.9 Componentes del sistema

El sistema de gestión de vídeo Helion tiene una estructura modular compuesta por 3 unidades operativas que pueden utilizarse simultáneamente.

La única unidad que puede funcionar de forma independiente es la unidad principal.



- [1] Unidad 4K (4K UNIT) o Unidad 4K PLUS (4K PLUS UNIT)
- [2] Unidad de conferencia (CONFERENCE UNIT)
- [3] Unidad principal (MAIN UNIT)

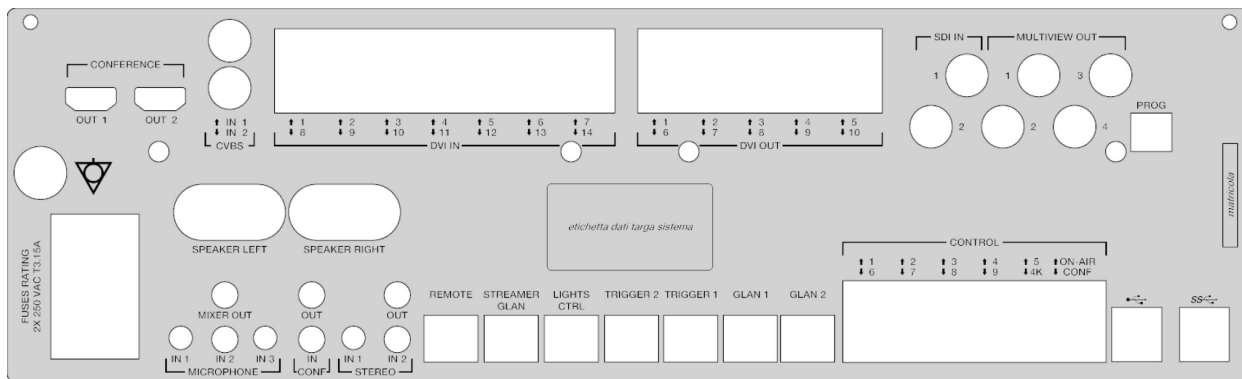
#### 3.9.1 Unidad principal

Las siguientes funciones están disponibles a través de la unidad principal.

Función	Descripción
ROUTING (Enrutamiento)	Permite distribuir las diferentes fuentes presentes en la sala a los monitores receptores.
PROCEDURE DOCUMENTATION (Documentación del procedimiento)	Permite documentar la operación almacenando y exportando temporalmente las imágenes y vídeos grabados.
VIDEO STREAMING (Retransmisión de vídeo)	Permite compartir información fuera del quirófano con un sistema de retransmisión HD.



Los siguientes puertos de conexión se encuentran en la parte posterior de la unidad. Están divididos en las siguientes secciones:

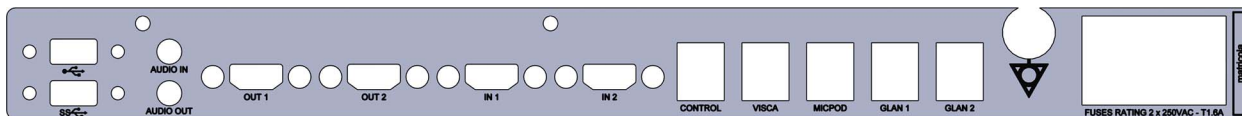


Los cables de conexión los suministra Videomed S.r.l.

### 3.9.2 Unidad de conferencia

La unidad de conferencia está equipada con tecnología de videoconferencia Full HD que permite el intercambio de información en videoconferencia con el quirófano compartiendo imágenes y vídeos de alta resolución fuera de la sala.

Los siguientes puertos de conexión se encuentran en la parte posterior de la unidad.

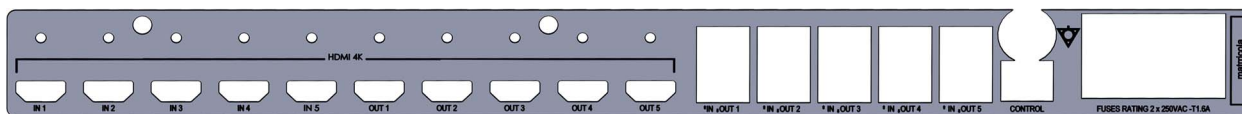


Los cables de conexión los suministra Videomed S.r.l.

### 3.9.3 Unidad 4K

La unidad 4K permite la gestión completa de señales con resolución 4K/Ultra HD.

Los siguientes puertos de conexión se encuentran en la parte posterior de la unidad. Están divididos en las siguientes secciones:



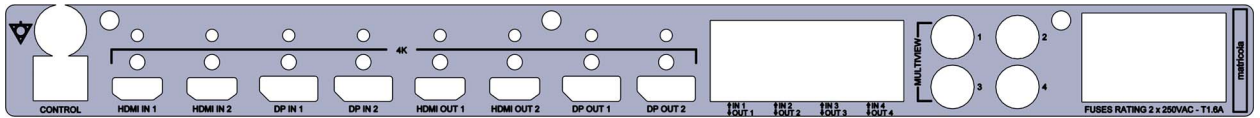
Los cables de conexión los suministra Videomed S.r.l.

### 3.9.4 Unidad 4K Plus

La unidad 4K Plus permite la gestión completa de señales con resolución 4K/Ultra HD (con resolución estándar Ultra HD).

Los siguientes puertos de conexión se encuentran en la parte posterior de la unidad. Están divididos en las siguientes secciones:

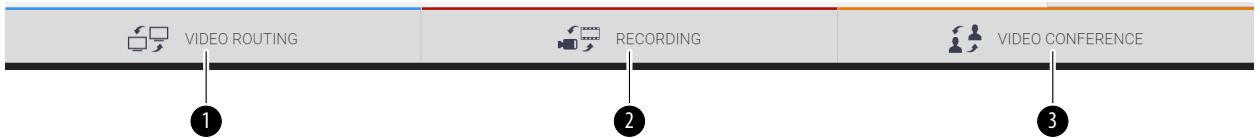







Los cables de conexión los suministra Videomed S.r.l.

### 3.9.5 Software de control

La interfaz de usuario de Helion Video Management System permite controlar y gestionar cada unidad funcional. Existe una barra de selección inferior (siempre visible) que permite identificar de forma unívoca las secciones del software según la función realizada.



Las secciones de la barra de selección se describen a continuación:

N.º	Función	Descripción	Imagen
[1]	Enrutamiento de vídeo (VIDEO ROUTING)	El botón AZUL identifica la sección de la función VIDEO ROUTING (ENRUTAMIENTO DE VÍDEO). Esta función permite distribuir las señales de vídeo conectadas a todos los monitores instalados en el quirófano.	
[2]	Grabación (RECORDING)	El botón ROJO identifica la sección de la función VIDEO RECORDING (GRABACIÓN DE VÍDEO). Esta función permite grabar imágenes y vídeos.	
[3]	Videoconferencia (VIDEO CONFERENCE)	El botón NARANJA identifica la sección de la función VIDEO CONFERENCE (VIDEOCONFERENCIA). Esta función permite la comunicación bidireccional de audio/vídeo.	

El sistema de gestión de vídeo Helion también garantiza el control y la gestión de los principales dispositivos instalados en el quirófano:

- cámara de habitación PTZ;
- lámparas quirúrgicas con videocámara quirúrgica.

Las funciones completas presentes en el software de control se describen detalladamente en el capítulo "Interfaz de usuario" de estas instrucciones de uso.

## 4 Operación

### 4.1 Primera puesta en marcha del sistema

El sistema de gestión de vídeo Helion lo entrega al operador el personal técnico instalador autorizado de Videomed S.r.l. La puesta en marcha del sistema requiere que el operador reciba una formación adecuada sobre los controles funcionales y visuales, sobre los ajustes y la calibración, sobre la limpieza y el mantenimiento del sistema y, por último, sobre las instrucciones de uso aplicables.

La entrega del sistema de gestión de vídeo Helion se valida mediante un documento firmado por el operador.

Una vez puesta en marcha la instalación, las instrucciones contenidas en este manual son vinculantes para el usuario.

### 4.2 Comprobaciones preliminares

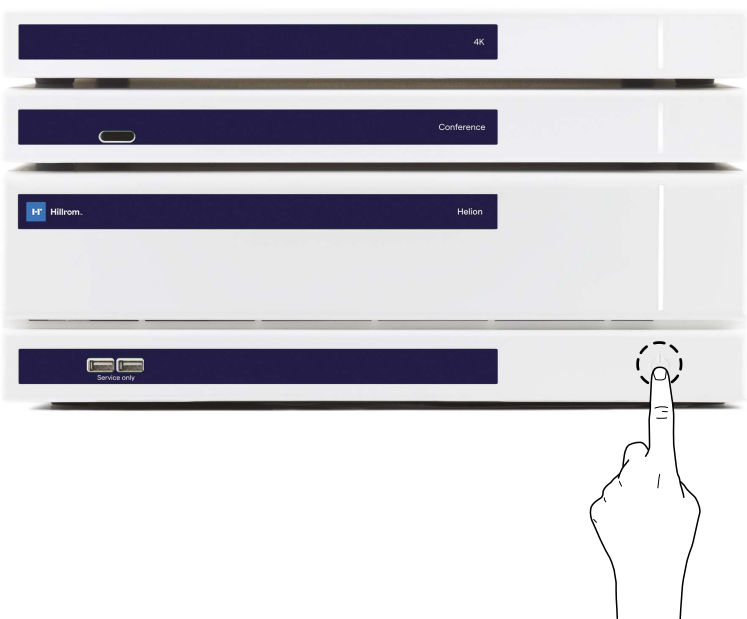
Antes de cada uso, compruebe los componentes de la pantalla de control en cuanto a:

- la estabilidad del conjunto del monitor;
- las piezas sueltas en el cuerpo del monitor;
- daños visibles, en particular la abrasión de las superficies de plástico o daños en la pintura.

La limpieza se realiza durante el mantenimiento.

### 4.3 Puesta en marcha del sistema

Para poner en marcha el sistema, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
1. Coloque el dedo en el botón táctil hasta que los LED frontales se enciendan. Los LED comenzarán a parpadear.	 El diagrama muestra una consola de control Helion con cuatro secciones horizontales. La primera sección superior tiene un LED etiquetado como '4K'. La segunda sección tiene un LED etiquetado como 'Conference'. La tercera sección tiene un LED etiquetado como 'Helion'. La cuarta sección inferior tiene un LED etiquetado como 'Service only'. Un dedo humano está tocando un botón táctil circular ubicado a la derecha de la sección 'Service only'.

#### 4.4 Conexión de las fuentes

Cuando se conecta una fuente de vídeo nueva al sistema, se muestra su vista previa dinámica (marco) en la lista de fuentes, mostrando el nombre de la toma/línea utilizada.

La vista previa se actualiza periódicamente mientras la señal permanezca activa.

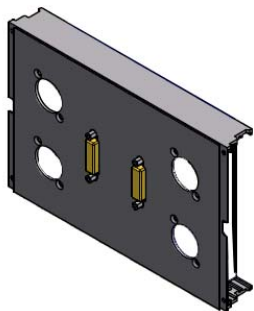
Para conectar fuentes de vídeo nuevas al sistema, basta con conectar la fuente deseada a una de las conexiones de vídeo compatibles presentes en las placas de conexión instaladas en los paneles colgantes.

Dependiendo de la configuración instalada, las siguientes conexiones pueden estar presentes:

- DVI
- 3G/HD/SD-SDI
- CVBS (Compuesto)


El dibujo técnico muestra un ejemplo de las placas de conexión instaladas en los paneles colgantes.

En el caso de la configuración de vídeo sobre IP de Helion, se suministrarán e instalarán conectores de puerto universal Neutrik para conectar las fuentes de vídeo a Helion.



#### 4.5 Apagado del sistema

Para apagar el sistema, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga el dedo en el botón táctil durante unos 5 segundos, hasta que la frecuencia de parpadeo de los LED aumente visiblemente.</li> <li>2. Una vez que la frecuencia haya cambiado, retire el dedo del botón.</li> </ol>	

En caso de apagado del sistema, es posible forzar la desactivación del sistema manteniendo el dedo en el botón hasta que se apague por completo y luego reiniciar el dispositivo siguiendo el procedimiento de puesta en marcha descrito en el párrafo "Puesta en marcha del sistema".

Se recomienda utilizar el apagado forzado solo en caso de emergencia, ya que este procedimiento puede causar la pérdida de datos.

#### **4.6 Puesta en marcha/apagado del sistema con el botón remoto**

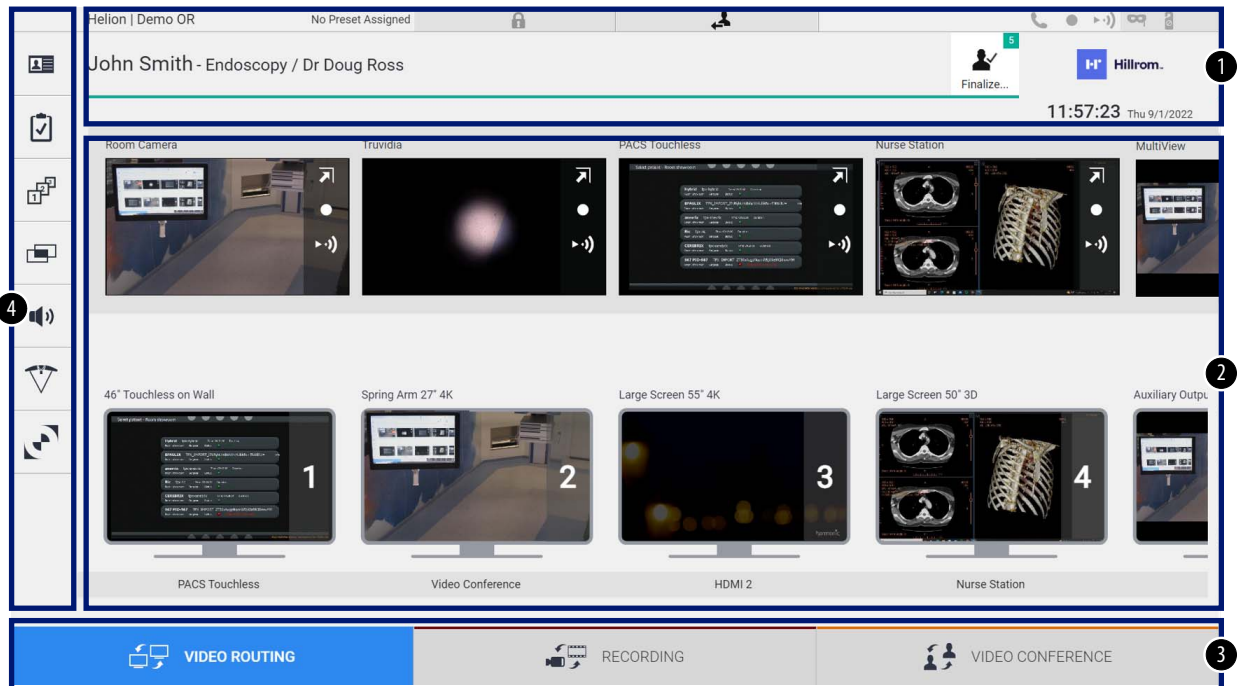
El sistema de gestión de vídeo Helion permite reiniciar las unidades a través de un botón remoto de encendido/apagado instalado dentro del quirófano (normalmente en un panel colgante o en una unidad de pared).

Gracias a esta solución, el operador puede gestionar todo el sistema de gestión de vídeo sin tener que acceder al soporte técnico. El apagado de las unidades dentro del soporte estará, por tanto, reservado al personal técnico y autorizado/formado de Videomed S.r.l. para sesiones de servicio o mantenimiento.

## 5 Interfaz de usuario

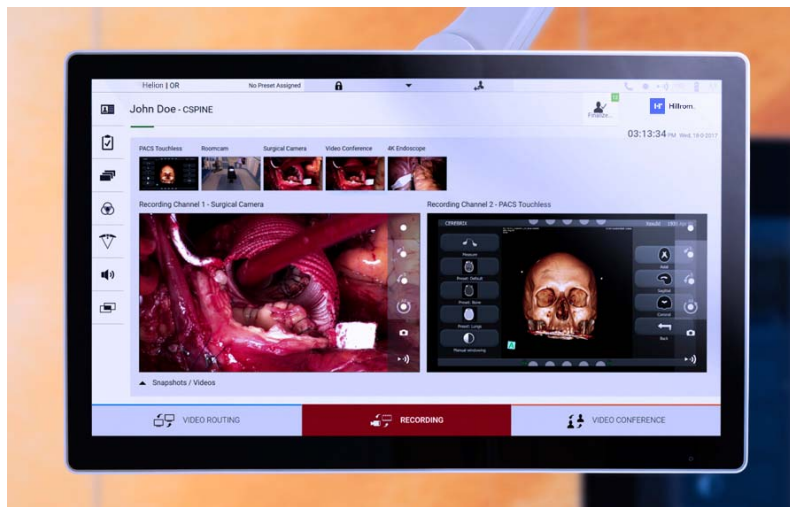
### 5.1 Descripción general de la interfaz de usuario

La interfaz de usuario se divide de la siguiente manera:



N.º	Elemento	Descripción
[1]	BARRA DE ESTADO	Contiene información importante como el nombre del paciente y el número de medios grabados relacionados con él. También hay información como la fecha, la hora y un panel que muestra el estado de la grabación, la videoconferencia, la retransmisión y los modos avanzados "Privacy Mode" (Modo de privacidad), "Do Not Disturb" (No molestar) y "Lecture Mode" (Modo lectura).
[2]	SECCIÓN PRINCIPAL	Área para las funciones de selección de la fuente e identificación de los monitores. La estructura del área varía según las funciones de control activadas.
[3]	BARRA DE SELECCIÓN	Barra situada en la parte inferior de la pantalla, con la que se pueden seleccionar las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video Routing (Enrutamiento de vídeo) (identificada con azul),</li> <li>- Recording (Grabación) (identificada con rojo),</li> <li>- Video Conference (Videoconferencia) (identificada con naranja)</li> </ul>
[4]	MENÚ LATERAL	Barra situada en la parte izquierda de la pantalla que permite acceder a las pantallas de configuración y gestión del flujo de trabajo.

## 5.2 Pantalla táctil de control



La pantalla de control es una pantalla táctil de alta resolución. Los botones de la interfaz de usuario se activan con un breve toque del dedo o deslizándolos.

La pantalla de control tiene su propio menú de configuración desde el que se puede acceder a los ajustes del monitor:

- brillo: intensidad de toda la pantalla;
- contraste: la diferencia de brillo entre las distintas zonas claras y oscuras de la pantalla.

Los ajustes del menú de control se encuentran a un lado o en la parte inferior del monitor, según el modelo adquirido.

Consulte el manual de usuario del monitor táctil para obtener más información.

La información relativa al número de serie que identifica el modelo se encuentra en la parte posterior de la pantalla.

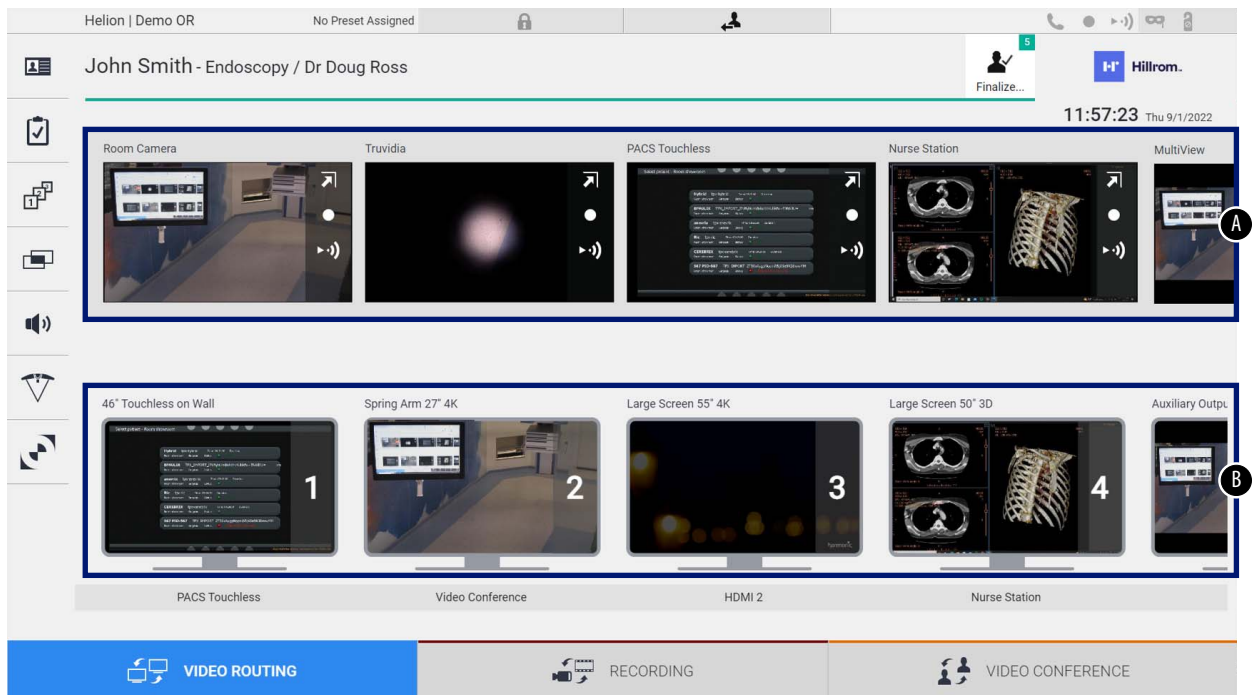
## 5.3 Función “Video Routing” (Enrutamiento de vídeo)

La función de enrutamiento de vídeo permite gestionar las imágenes procedentes de las distintas fuentes presentes en el quirófano, como:

- endoscopio,
- cámara de vídeo quirúrgica,
- cámara de habitación.

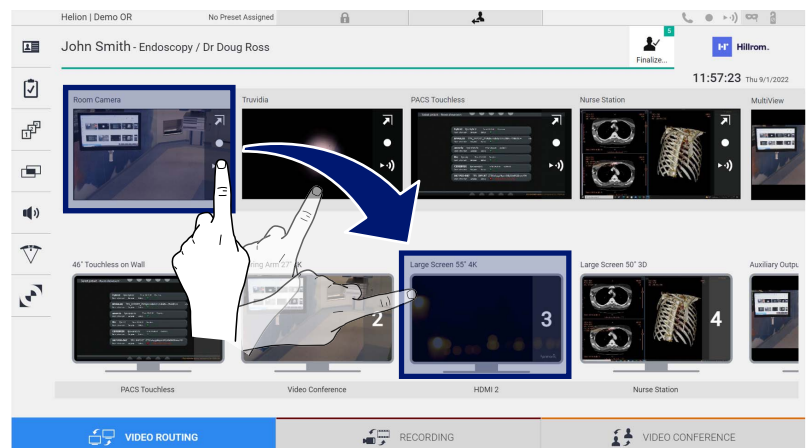
Estas señales de vídeo se pueden dirigir a cualquier monitor del quirófano.

La pantalla principal de enrutamiento de vídeo se divide de la siguiente manera:



- [A] lista de fuentes conectadas
- [B] lista de monitores habilitados

Para enviar una señal de vídeo a un monitor, arrastre la imagen correspondiente de la lista de fuentes disponibles [A] y suéltela en uno de los monitores habilitados [B], mediante el sistema Drag&Drop.

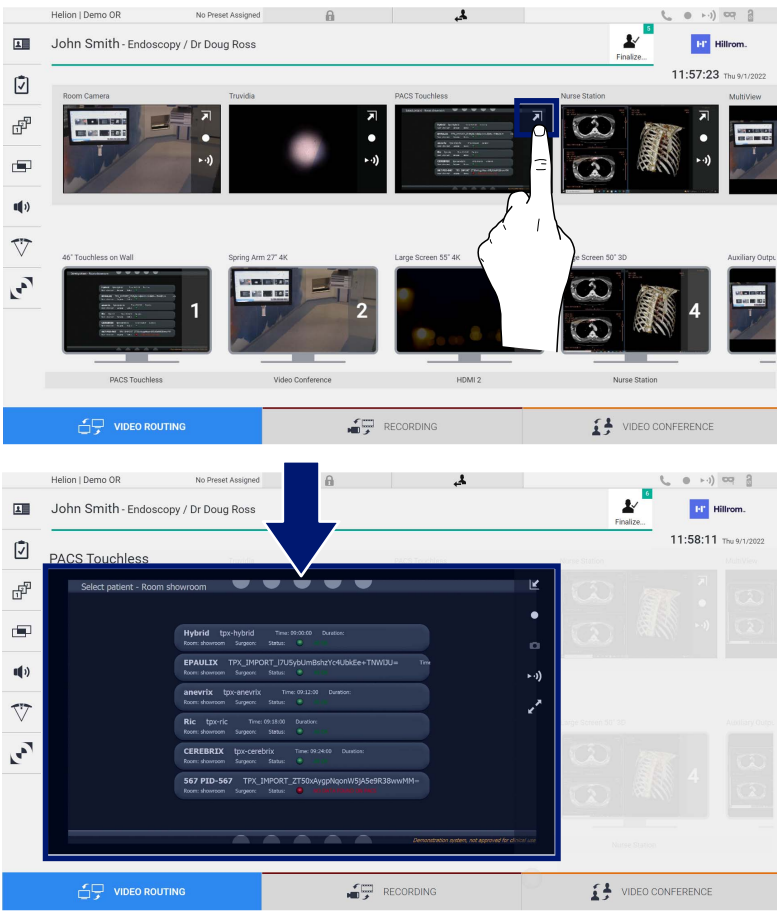

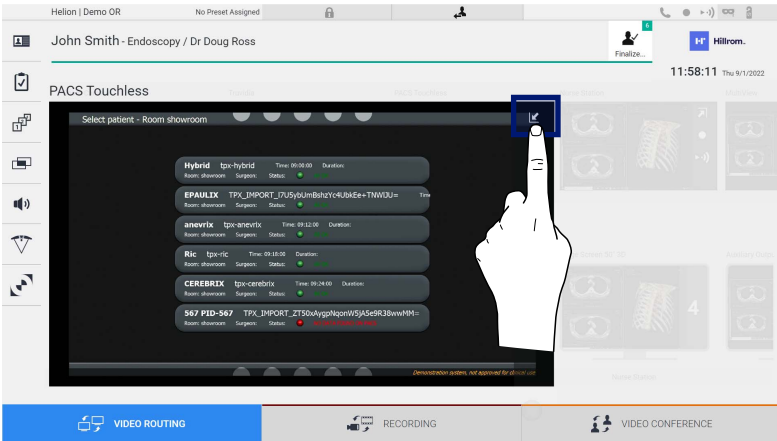


La vista previa de la señal de vídeo enviada se mostrará en el icono del monitor correspondiente y se actualizará periódicamente. Para eliminar la señal de un monitor, selecciónelo en la lista de monitores y pulse **X**.

### 5.3.1 Vista previa en directo





Con la función de vista previa en directo es posible ampliar o reducir la vista previa de la señal de vídeo de cada fuente conectada.

Para mostrar la vista previa en directo de una de las señales disponibles en la lista de fuentes, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Pulse el icono  de la vista previa correspondiente. Se muestra la imagen ampliada seleccionada.</p>	 <p>The screenshot shows a multi-view interface with several video sources. A hand icon points to the 'PACS Touchless' source, which has an expand icon. A blue arrow points down to the next screenshot.</p>
<p>2. Pulse  para volver a la vista estándar de la sección de enrutamiento de vídeo.</p>	 <p>The screenshot shows the 'PACS Touchless' source expanded. A hand icon points to the close icon in the top right corner of the expanded view.</p>



Los siguientes iconos están presentes en la ventana de vista previa en directo:

Icono	Función
	Permite iniciar/detener la grabación de la señal visualizada. Si el icono es de color gris, indica que la función no está activa. Para activar la función, es necesario seleccionar un paciente de la lista (consulte el apartado "Seleccionar un paciente presente en la lista").
	Permite crear instantáneas de la imagen.
	Permite iniciar/detener la transmisión de la señal de vídeo.
	Permite activar la función de visualización a pantalla completa, sin latencia, de la fuente seleccionada (función disponible solo en algunos modelos de monitores táctiles).

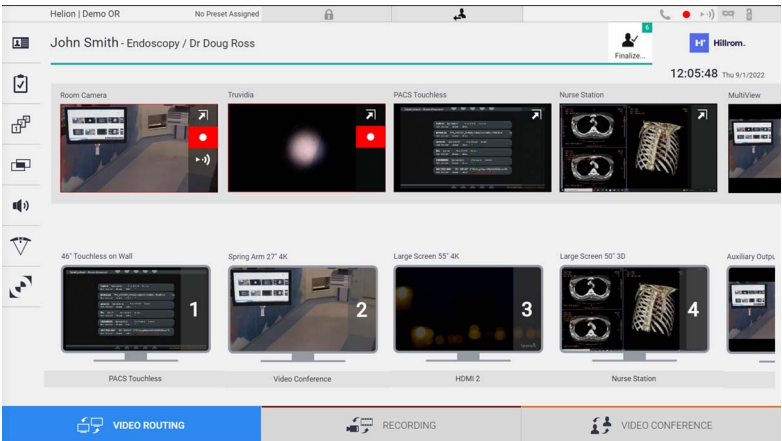
No es posible iniciar la grabación si no hay un paciente de referencia.

**5.3.2 Acceso rápido - Grabación**

Para iniciar la grabación es posible utilizar un sistema de activación rápida directamente desde la pantalla de enrutamiento de vídeo. Existe una pantalla dedicada a la grabación para acceder a las funciones avanzadas.


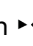
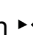
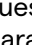
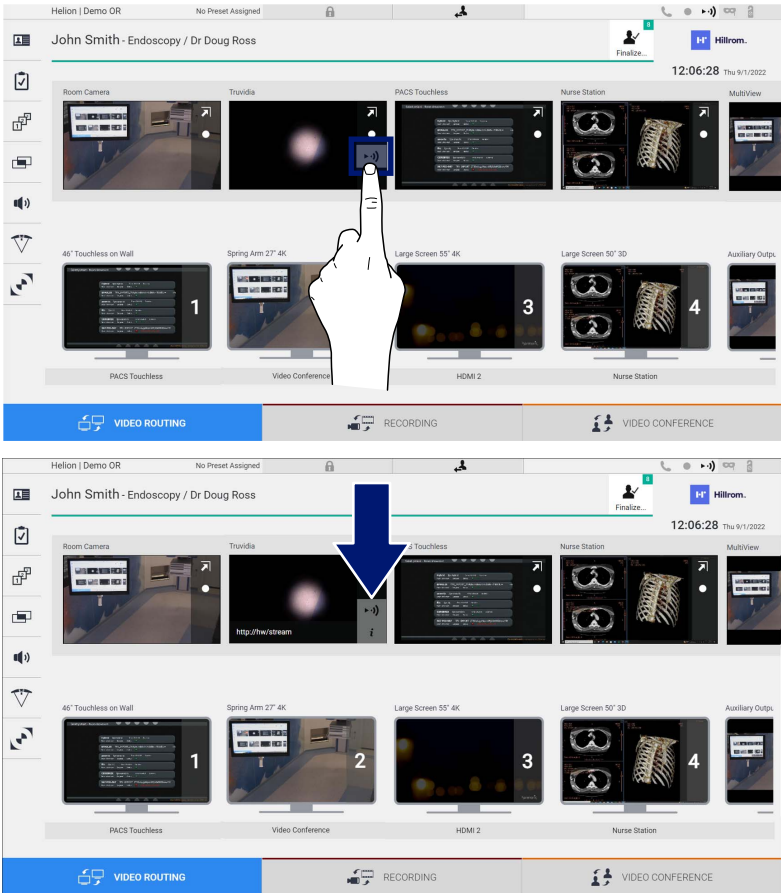
Existe una función dedicada de grabación para realizar la grabación. En cualquier caso, es posible utilizar un sistema de activación rápida adicional desde la función de enrutamiento de vídeo.

Para realizar la grabación desde la función de enrutamiento de vídeo, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Pulse la casilla <input type="checkbox"/> de una vista previa para iniciar la grabación de una señal. Cuando la grabación está en curso, el botón es de color rojo <input checked="" type="checkbox"/>. El icono <input checked="" type="checkbox"/> también está presente en la parte superior de la pantalla y también permanece visible al navegar por otras funciones (si la grabación está activa).</p>	 <p>The image shows the video routing interface with a hand icon pointing to the recording button in the 'Room Camera' preview window. A blue arrow points from the 'RECORDING' button in the bottom bar to the red recording button in the preview window.</p>
<p>2. En los sistemas en los que está habilitado el doble canal de grabación, esta función puede activarse en dos fuentes al mismo tiempo.</p>	 <p>The image shows the video routing interface with two recording buttons activated simultaneously in the 'Room Camera' and 'Truvida' preview windows. The 'RECORDING' button in the bottom bar is also active.</p>

### 5.3.3 Acceso rápido - Retransmisión

Para activar la sesión de retransmisión, proceda de la siguiente manera:

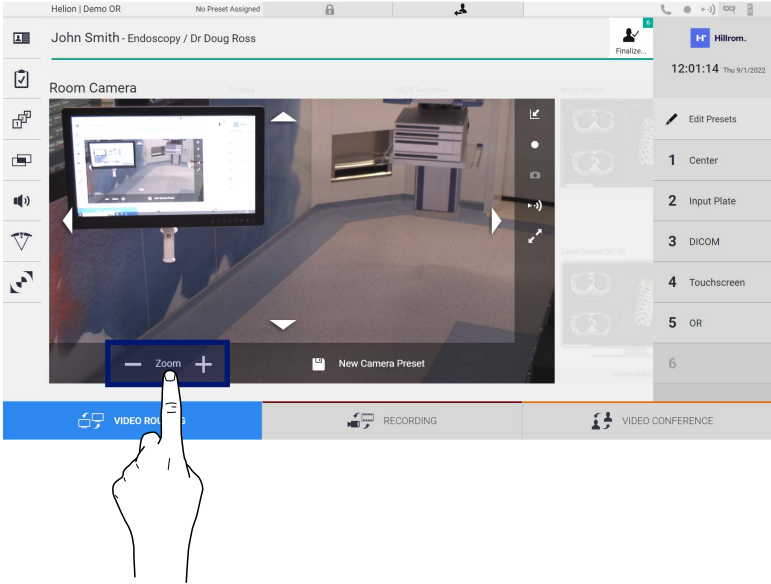
Paso	Imagen
<p>1. Pulse la casilla  de una vista previa para iniciar la retransmisión de la señal de una de las fuentes conectadas. Cuando la retransmisión esté activa, el botón  aparece con fondo blanco en el recuadro de la fuente seleccionada y se desactiva en las previsualizaciones de las restantes fuentes.</p> <p>Al pulsar  en un cuadro de vista previa, también se activa el icono  que muestra al usuario el enlace para conectarse a la sesión de retransmisión. Por lo tanto, al utilizar este enlace, cada usuario puede conectarse a la sesión de retransmisión utilizando aplicaciones capaces de reproducir en red (p. ej., VLC). Si la sesión de retransmisión de la sala se interrumpe, la comunicación con el exterior también se interrumpirá.</p>	

### 5.3.4 Control de la cámara Ptz

La función de vista previa en directo, si se activa en una señal de cámara controlable, permitirá acceder a sus controles de movimiento.

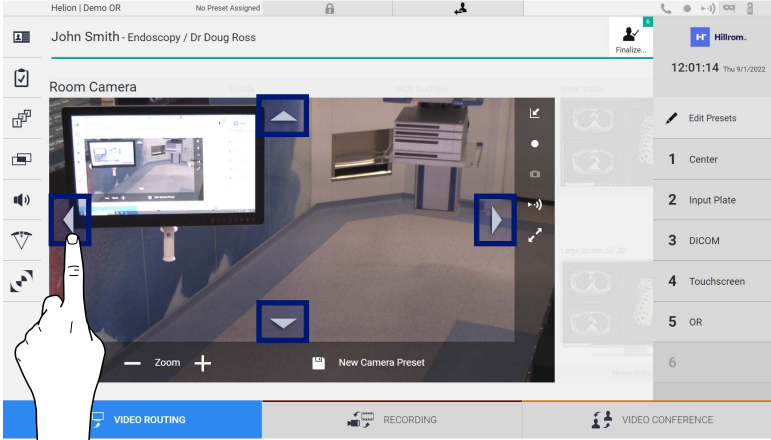
#### 5.3.4.1 Ajustar el zoom de la cámara de habitación

Para ajustar el zoom de la cámara de habitación, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Utilice <b>−</b> y <b>+</b> para ajustar el zoom y obtener la imagen (vista) deseada.</p>	

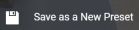
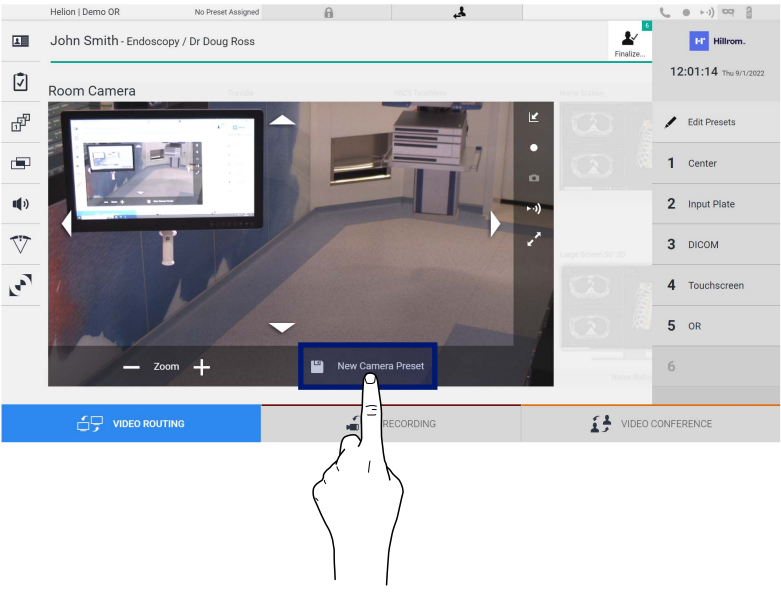

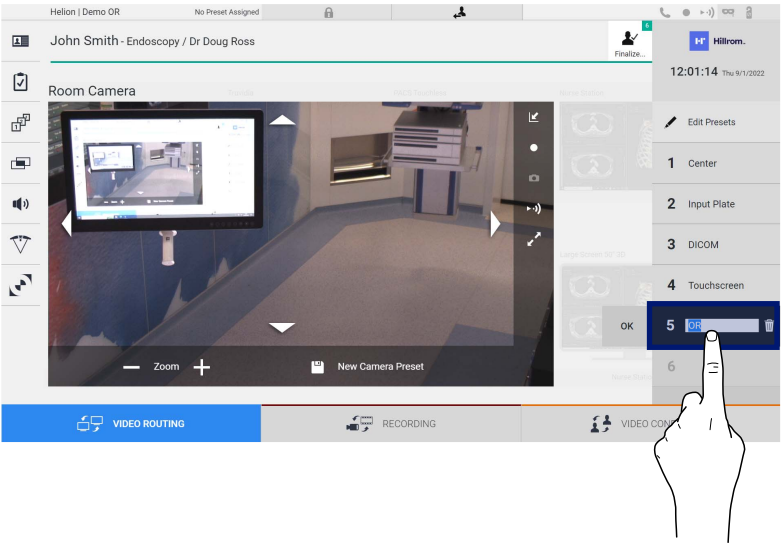
#### 5.3.4.2 Ajustar el movimiento de la cámara de la sala

Para ajustar el movimiento de la cámara de la sala, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Utilice las flechas <b>◀</b> de la pantalla para ajustar el movimiento de la cámara de la sala.</p>	


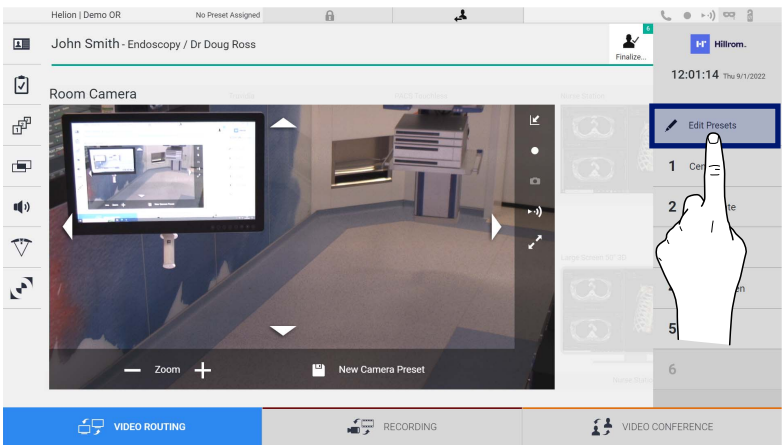
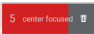
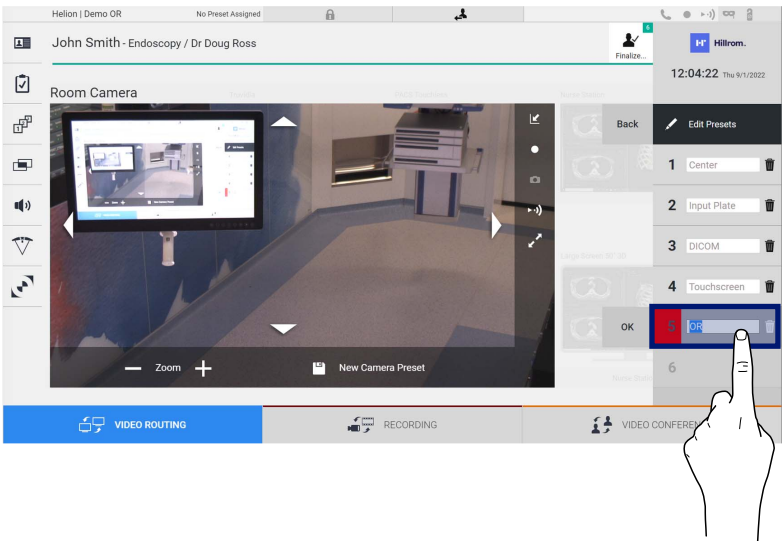
### 5.3.4.3 Guardar la configuración de la cámara (Preajuste)

Para guardar un ajuste específico de la cámara de vídeo (Preajuste), proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Después de ajustar la videocámara a la posición deseada, pulse .</p>	
<p>2. Introduzca el nombre a asignar y pulse  para confirmar. El nuevo preajuste con el nombre asignado aparecerá en la lista del lateral.</p>	

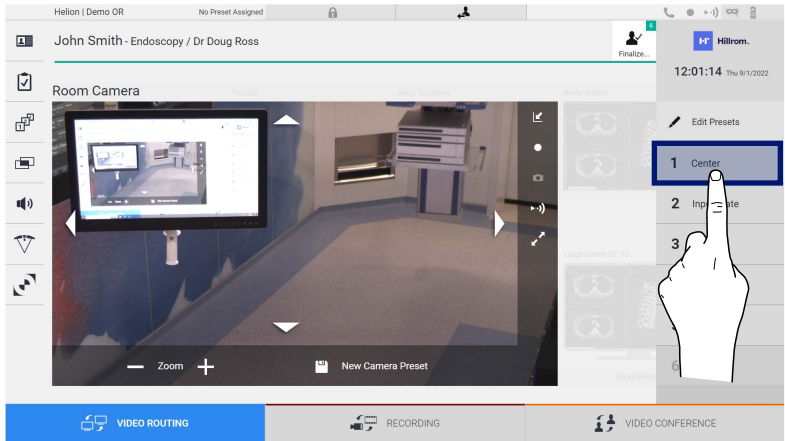
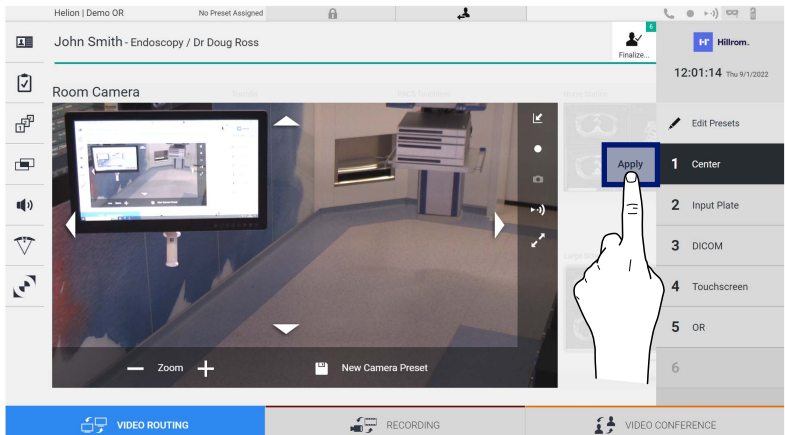
### 5.3.4.4 Borrar el ajuste de la cámara (preajuste)

Para borrar un ajuste de cámara de vídeo de la lista de preajustes, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
1. Pulse  .	 <p>The screenshot shows the 'Edit Presets' menu with a list of camera presets: 1. Center, 2. Input Plate, 3. DICOM, 4. Touchscreen, 5. OR, and 6. (empty). A hand icon points to the 'Edit Presets' button at the top of the list.</p>
2. Mantenga pulsado el botón  hasta que se borre.	 <p>The screenshot shows the 'Edit Presets' menu with the 'OR' preset selected. A hand icon points to the 'OR' preset button.</p>

### 5.3.4.5 Activar el ajuste de la cámara (preajuste)

Para activar un preajuste de la cámara de vídeo, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Pulse sobre la preselección deseada en la lista.</p>	
<p>2. Pulse <b>Apply</b> para confirmar la selección de la preselección.</p>	

## 5.4 Función “Recording” (Grabación)

La función Grabación permite capturar instantáneas y grabar vídeo de las señales conectadas al sistema.

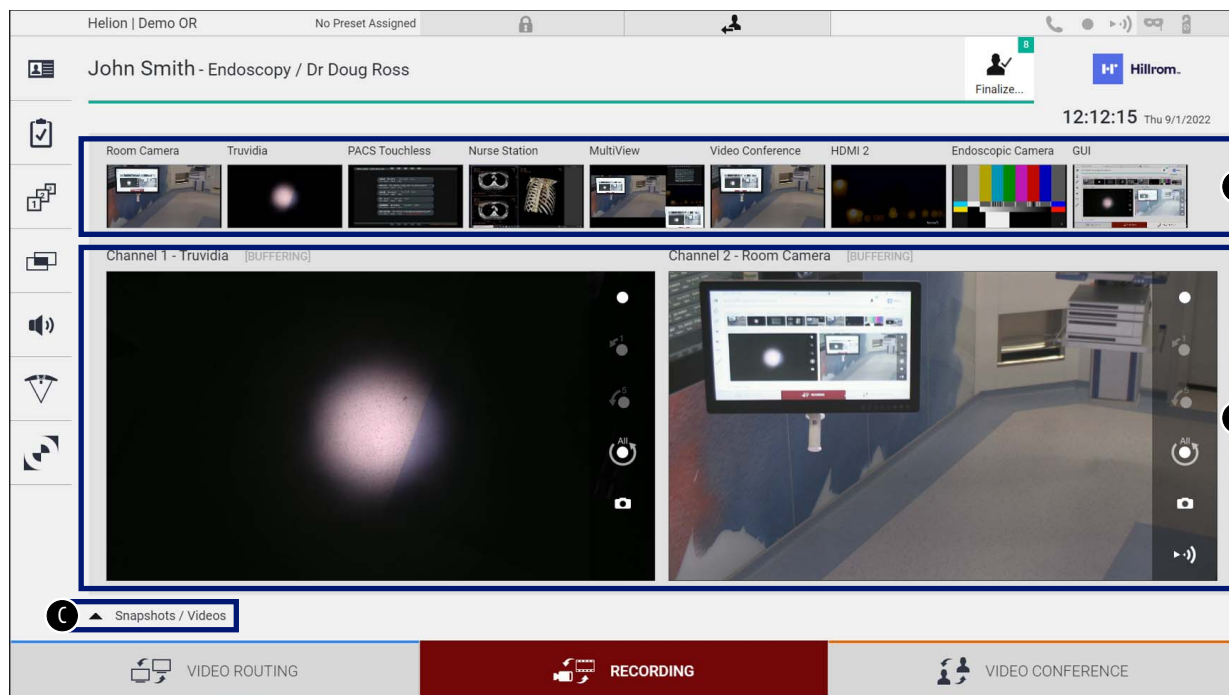
Por lo tanto, es posible guardar y luego modificar imágenes y vídeos, almacenados en el sistema. A continuación, es posible enviar el material grabado a un servidor dedicado (sistemas de almacenamiento conectados como PACS, red o medios de almacenamiento móviles).

La función de grabación incluye:


- captura de imágenes fijas,
- grabación de vídeo (audio incluido),
- el post-procesamiento de imágenes y vídeos.

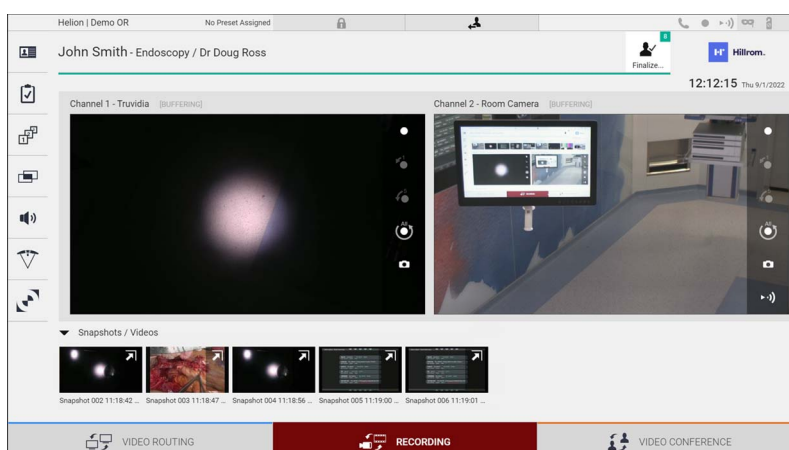


La pantalla principal de grabación se divide de la siguiente manera:



- [A] listado de fuentes
- [B] vista de los dos canales de grabación
- [C] lista de instantáneas y vídeos almacenados

El usuario puede ver y reproducir cualquier material almacenado durante la actividad quirúrgica (imágenes y vídeo) en cualquier momento pulsando el icono . De este modo, aparecerá en la pantalla una lista con todas las vistas previas de los archivos almacenados, que se podrán reproducir y procesar mediante las funciones descritas en el apartado "Reproducción de instantáneas y vídeos"





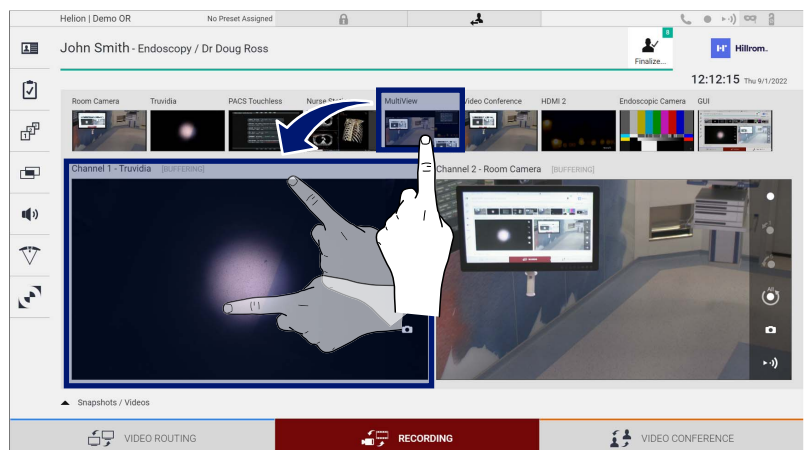
### 5.4.1 Postratamiento de datos de imagen

Cuando se utilizan datos almacenados localmente, es posible:




- crear secuencias de vídeo a partir de capturas de pantalla guardadas durante la operación (MATS - Movie Around The Snap);
- crear imágenes fijas generadas a partir de vídeos previamente grabados;
- crear anotaciones en clips de vídeo o información de texto en imágenes;
- añadir anotaciones a los vídeos e imágenes capturados.





### 5.4.2 Seleccionar las señales que se van a grabar

Arrastre la fuente de la que desea grabar un vídeo o capturar imágenes fijas en el cuadro canal de grabación, donde obtendrá una vista previa en directo de la señal y se habilitarán las funciones básicas y avanzadas de grabación.



Los siguientes iconos están presentes en la ventana del canal de grabación:

Icono	Función
	Permite iniciar/detener la grabación de la señal visualizada. Si el icono es de color gris, indica que la función no está activa. Para activar la función, es necesario seleccionar un paciente de la lista (consulte el apartado "Seleccionar un paciente presente en la lista").
	Permite crear instantáneas de la fuente de vídeo.
	Permite iniciar/detener la transmisión de la señal de vídeo.




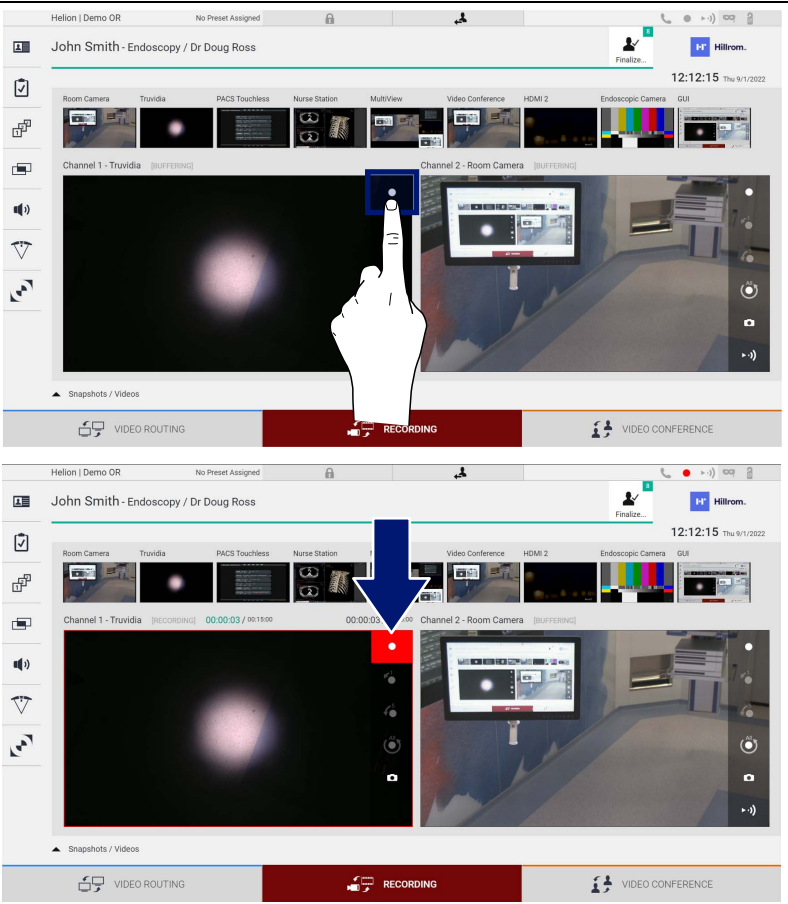
Icono	Función
	Permite iniciar la grabación:
	- 1 minuto antes,
	- 5 minuto antes,
	- todo el búfer disponible (hasta un máximo de 2 horas).

La selección de canales y la grabación no afectarán en modo alguno a las señales enviadas a los monitores a través del enrutamiento de vídeo.

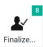
No es posible iniciar la grabación si no hay un paciente de referencia.

### 5.4.3 Grabación

Para realizar la grabación desde la función de grabación, proceda de la siguiente manera:

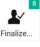
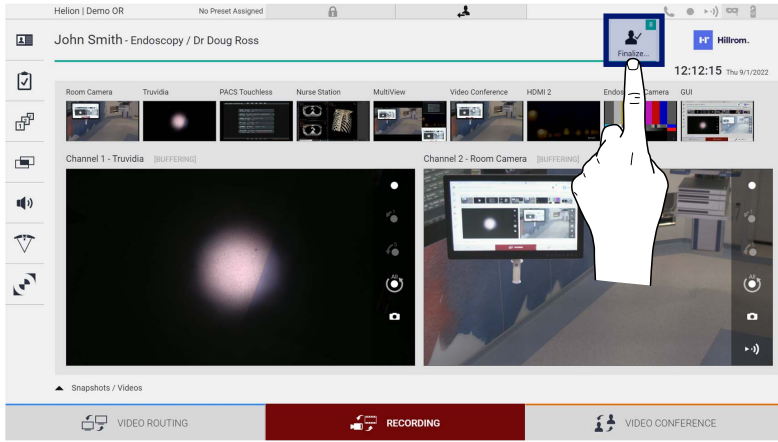

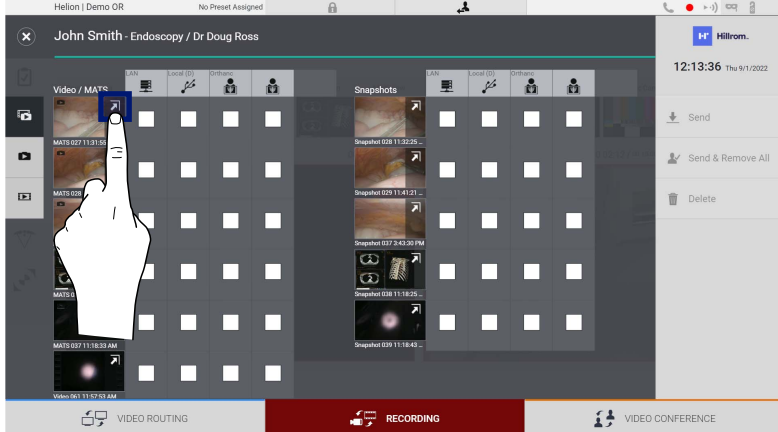
Paso	Imagen
<p>1. Pulse la casilla  de un canal de grabación para iniciar la grabación de una señal. Cuando la grabación está en curso, el botón  es rojo en el canal de grabación seleccionado.</p> <p>El icono  también está presente en la parte superior de la pantalla y también permanece visible al navegar por otras funciones (si la grabación está activa).</p>	

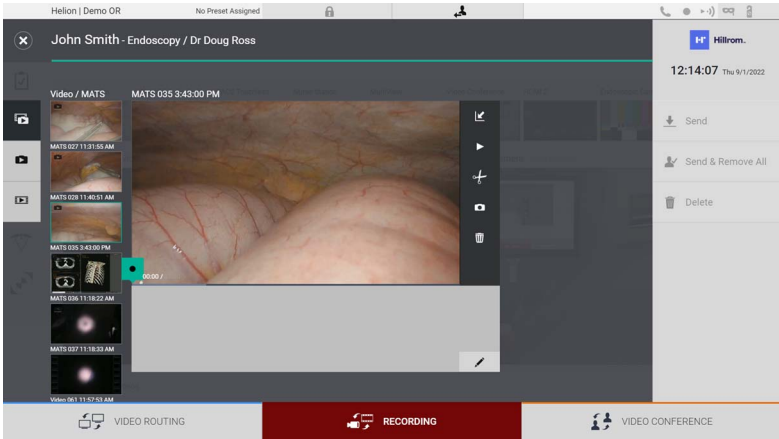





















Todos los vídeos e imágenes relacionados con el paciente se guardarán en la carpeta dedicada a ellos.

A través del número del icono  se podrá ver cuántos medios se han asociado a ese paciente. Haga clic en el icono para acceder a la carpeta de almacenamiento.

### 5.4.4 Reproducción de instantáneas y vídeos


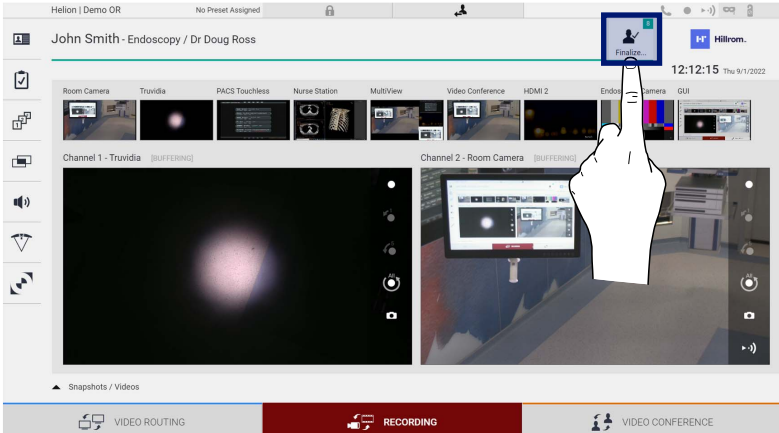
Para reproducir instantáneas y vídeos, proceda de la siguiente manera:

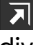
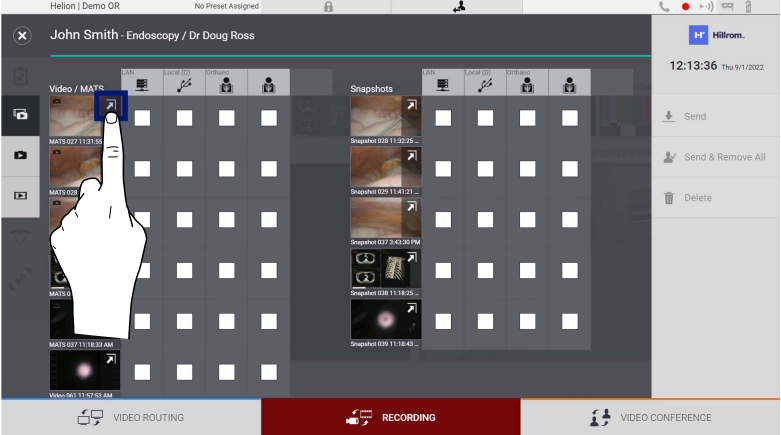



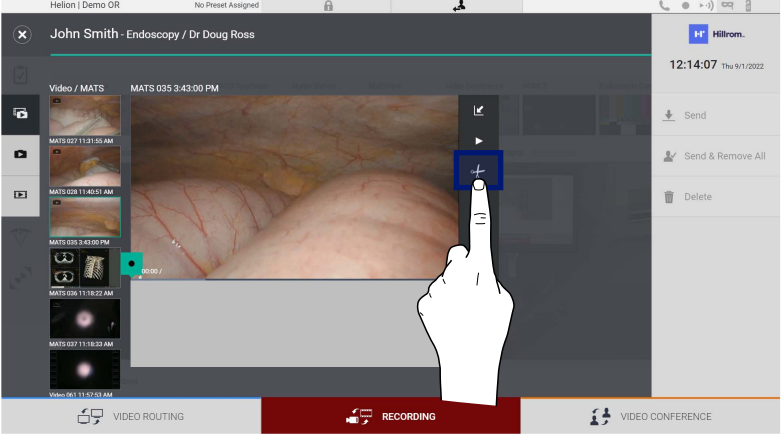
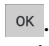
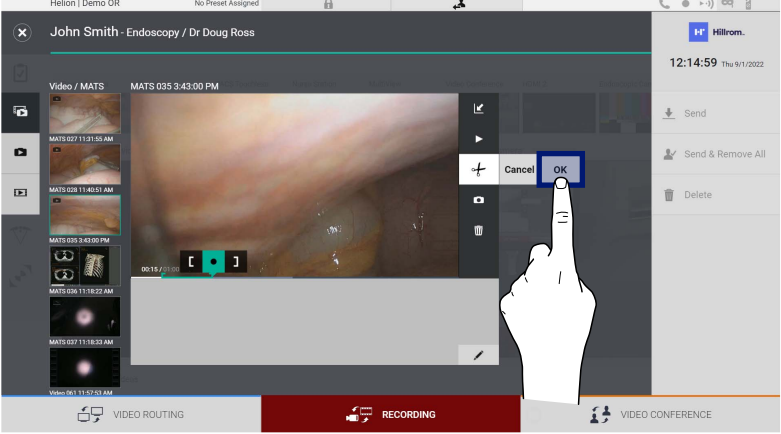
Paso	Imagen
<p>1. Pulse  para ver todas las imágenes y vídeos relacionados con el paciente seleccionado.</p>	 <p>The screenshot shows the main interface for 'John Smith - Endoscopy / Dr Doug Ross'. At the top right, there is a 'Finalize' button with a notification badge showing the number '1'. A hand icon points to this button. Below the button, there are two video channels: 'Channel 1 - Truvida' and 'Channel 2 - Room Camera', both showing 'BUFFERING' status. The interface includes various control icons on the left and bottom, such as 'VIDEO ROUTING', 'RECORDING', and 'VIDEO CONFERENCE'.</p>
<p>2. Pulse el icono  para ampliar el medio individual.</p>	 <p>The screenshot shows a 'Snapshots' view for the same patient. It displays a grid of video thumbnails. A hand icon points to a 'Zoom' icon (a square with an arrow pointing outwards) located in the top left corner of the thumbnail grid. The interface also shows a 'Send' button and a 'Delete' button on the right side.</p>

Paso	Imagen																
<p>3. Aparece una ventana nueva que, en función del archivo seleccionado (imagen o vídeo), permite:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="177 414 268 450">Icono</th> <th data-bbox="268 414 568 450">Función</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="177 450 268 517"></td> <td data-bbox="268 450 568 517">Eliminar el archivo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 517 268 584"></td> <td data-bbox="268 517 568 584">Añadir un comentario.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 584 268 651"></td> <td data-bbox="268 584 568 651">Reproducir el vídeo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 651 268 763"></td> <td data-bbox="268 651 568 763">Interrumpir la reproducción del vídeo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 763 268 831"></td> <td data-bbox="268 763 568 831">Extraer una parte del vídeo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 831 268 943"></td> <td data-bbox="268 831 568 943">Volver a la vista completa de las funciones disponibles.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 943 268 1048"></td> <td data-bbox="268 943 568 1048">Crear una instantánea del vídeo que se está reproduciendo.</td> </tr> </tbody> </table>		Icono	Función		Eliminar el archivo.		Añadir un comentario.		Reproducir el vídeo.		Interrumpir la reproducción del vídeo.		Extraer una parte del vídeo.		Volver a la vista completa de las funciones disponibles.		Crear una instantánea del vídeo que se está reproduciendo.
Icono		Función															
		Eliminar el archivo.															
		Añadir un comentario.															
		Reproducir el vídeo.															
		Interrumpir la reproducción del vídeo.															
		Extraer una parte del vídeo.															
	Volver a la vista completa de las funciones disponibles.																
	Crear una instantánea del vídeo que se está reproduciendo.																

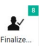
**5.4.5 Recortar el vídeo**

Para recortar los vídeos, proceda de la siguiente manera:

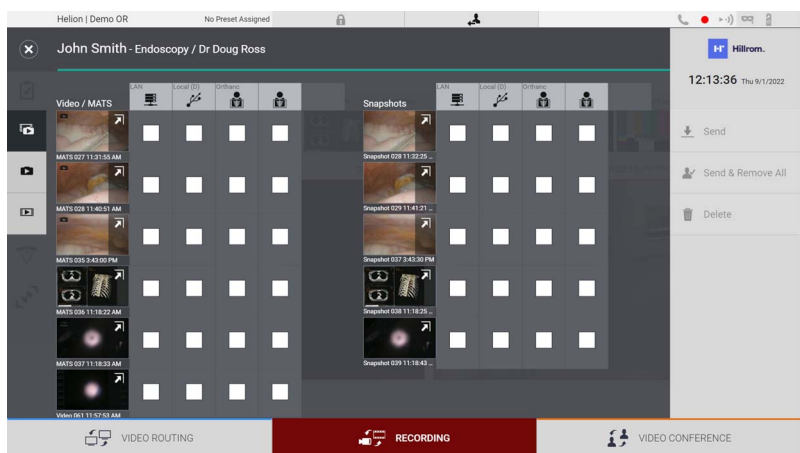
Paso	Imagen
<p>1. Pulse  para ver todas las imágenes y vídeos relacionados con el paciente seleccionado.</p>	

Paso	Imagen
<p>2. Pulse el icono  para ampliar el elemento individual.</p>	
<p>3. Pulse el icono . Aparece un cursor en la barra de progreso. Pulse  para seleccionar el punto inicial del vídeo que se va a extraer y  para el final.</p>	
<p>4. Una vez determinados los puntos de corte, extraiga la parte del vídeo pulsando . Aparece un vídeo nuevo en la lista de fotos/vídeos del mismo paciente.</p>	

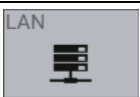

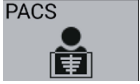
### 5.4.6 Exportar imágenes y vídeos

Pulse el icono  para acceder a la carpeta de exportación de imágenes y vídeos del paciente seleccionado. Esta operación debe realizarse para exportar los medios y, opcionalmente, cerrar el archivo del paciente.

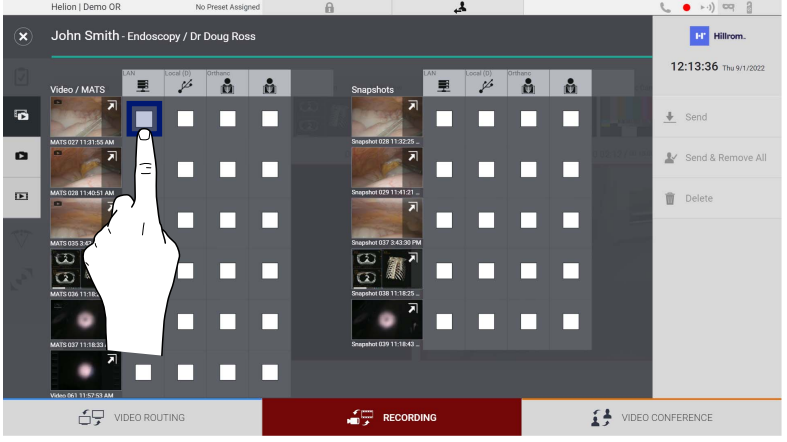
Se muestra una pantalla con todas las imágenes y vídeos capturados.



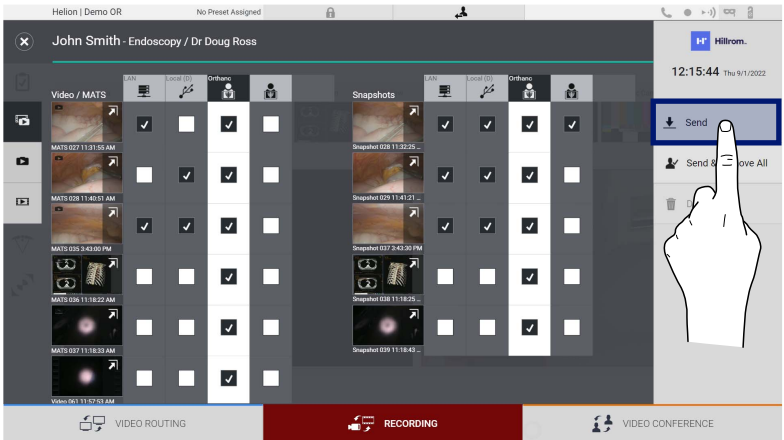


Los siguientes iconos están presentes en la ventana de exportación:


Icono	Función
	Permite exportar vía LAN a otro dispositivo.
	Permite guardar en un dispositivo conectado al puerto USB.
	Permite exportar al sistema PACS.

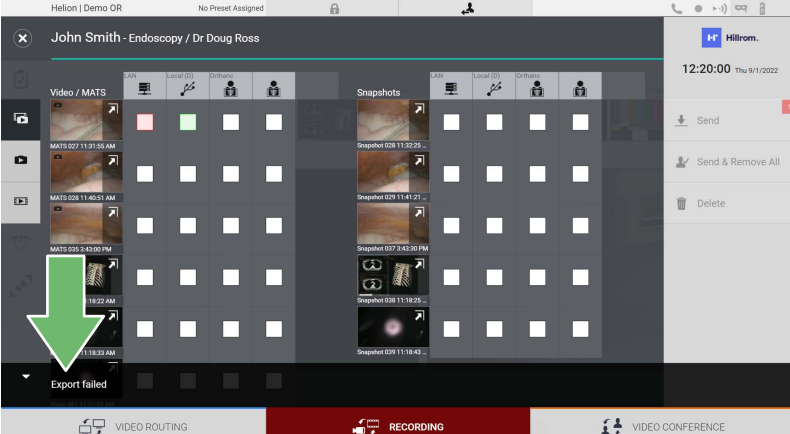
Para exportar, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
1. Seleccione el destino de la exportación. Esto debe hacerse para que las imágenes o los vídeos se exporten.	

Paso	Imagen
<p>2. Pulse  <b>Send</b> (en la parte derecha de la pantalla) para enviar los archivos a los destinos seleccionados.</p> <p>Al pulsar , se envían los archivos a los destinos seleccionados y se elimina la sesión del paciente.</p>	

La activación de cada una de las opciones de exportación mostradas anteriormente depende de una configuración que debe ser autorizada y guiada por los responsables informáticos del hospital.

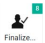
Si el destino de exportación no responde (p. ej.: dispositivo USB no presente), el sistema muestra un mensaje de error "EXPORT FAILED..." (EXPORTACIÓN FALLIDA) y el icono  aparece en la parte derecha de la pantalla. Se muestra una casilla roja para cada destino al que no se ha podido exportar el archivo seleccionado, como se muestra en la figura siguiente.



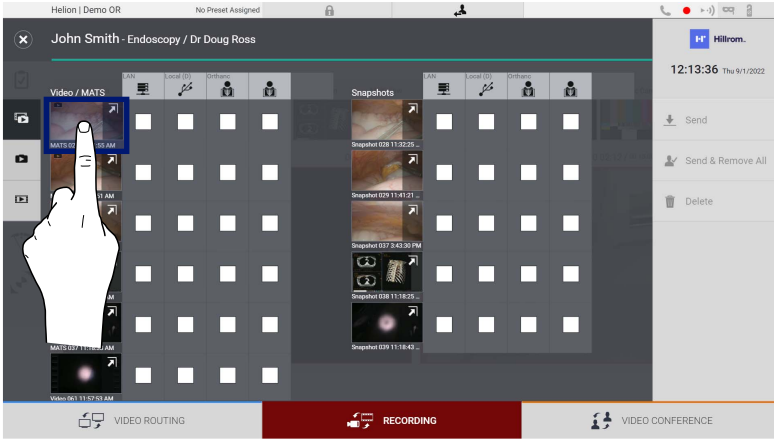
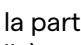
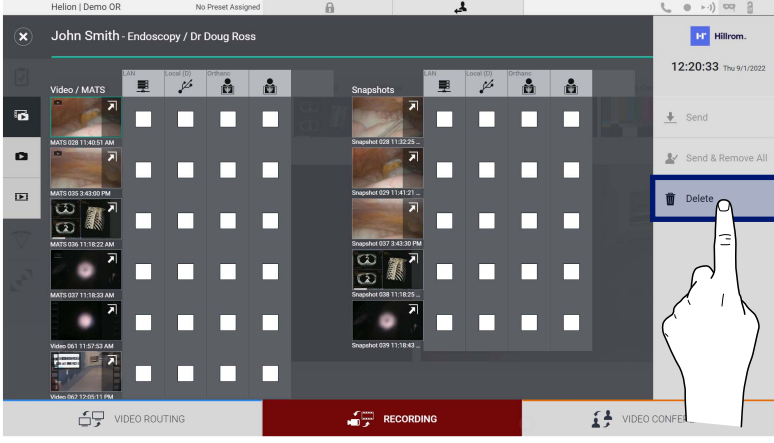

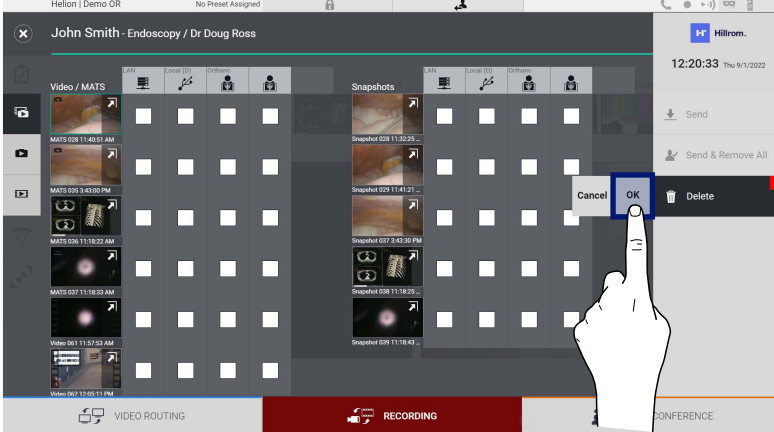
The screenshot shows the same interface as the previous one, but with an 'Export failed' message at the bottom left and a red exclamation mark icon in the top right corner. A green arrow points to the 'Export failed' message.



### 5.4.7 Borrar imágenes y vídeos

Pulse el icono  para acceder a la carpeta de almacenamiento de imágenes y vídeos del paciente seleccionado.

Para borrar imágenes y vídeos, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Seleccione los vídeos o las imágenes que desea borrar haciendo clic directamente en la miniatura. El contorno de las miniaturas seleccionadas será verde.</p>	
<p>2. Pulse  (en la parte derecha de la pantalla) para borrar los archivos seleccionados.</p>	
<p>3. Pulse  para confirmar el borrado de los archivos seleccionados.</p>	





## 5.5 Función “Video Conference” (Videoconferencia)

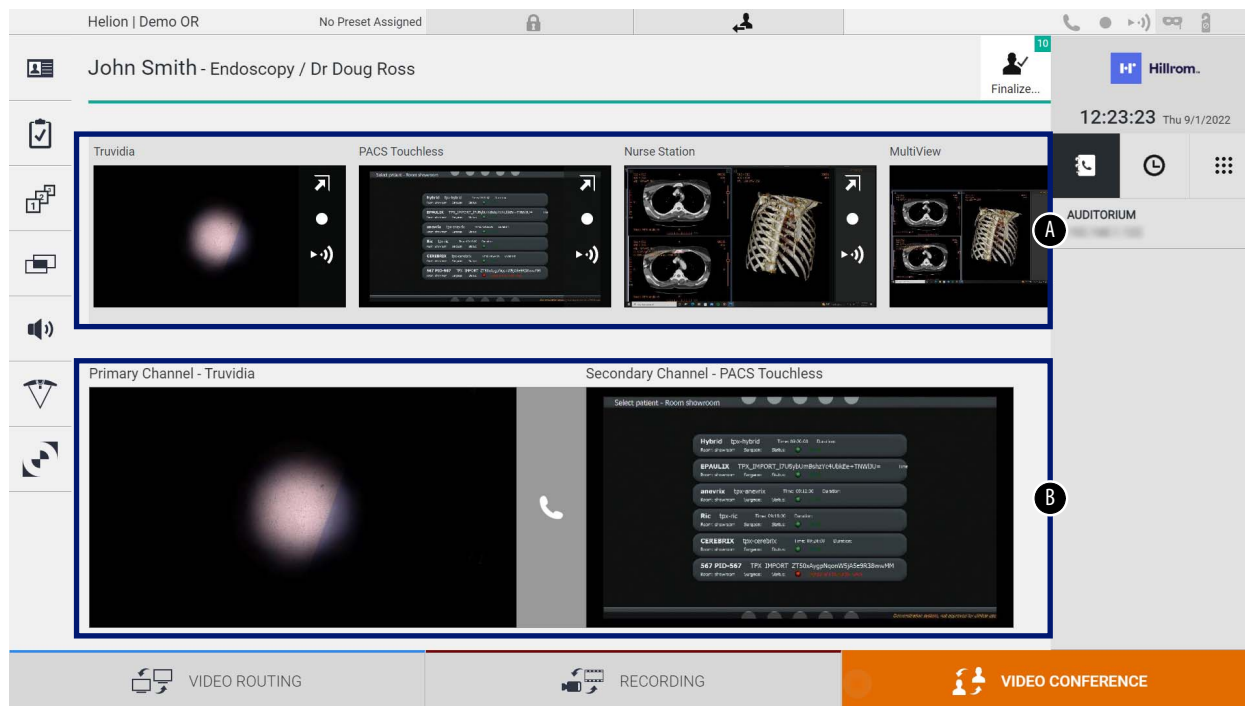
La función “Videoconferencia” permite realizar videoconferencias en conexión bidireccional de audio y vídeo desde la sala de operaciones a salas externas:

- los participantes externos que se encuentran en otras salas o zonas del edificio se conectan al aparato a través de una conexión LAN,
- los participantes externos que se encuentran en otras ubicaciones pueden conectarse al sistema a través de Internet.

Están disponibles los siguientes modos:

Modo	Descripción
Vista previa del canal de transmisión	Permite ver uno, o en caso de videoconferencia multicanal, los dos canales de transmisión conectados.
Imágenes o fuentes de vídeo	Todas las fuentes conectadas se muestran en la barra de señal de entrada.
Botón de intercambio	Durante una conferencia es posible cambiar las señales mostradas en la disposición seleccionada.
Botón de disposición	Durante una conferencia multicanal es posible tener varias vistas previas en directo de las señales de vídeo implicadas, por ejemplo PiP y PaP.
Selección de participantes/lista de contactos	Los participantes de la videoconferencia se pueden seleccionar a través del botón específico: <ul style="list-style-type: none"><li>– utilizando la lista de contactos,</li><li>– utilizando la lista de participantes recientes (registro),</li><li>– introduciendo la dirección IP del destinatario directamente desde el teclado.</li></ul>
Visualización de los participantes	Muestra los participantes (nombre, dirección IP) que están actualmente conectados o con los que está a punto de iniciarse una videoconferencia tras asignar un dispositivo de transmisión y una fuente de señal.

La pantalla principal de la videoconferencia se divide de la siguiente manera:

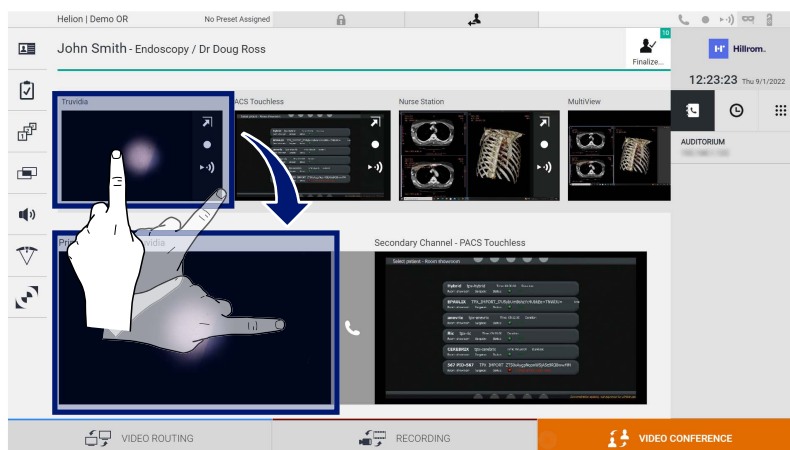


- [A] listado de fuentes
- [B] vista de los dos canales de videoconferencia


Cuando la videoconferencia está activa, el icono del receptor del tablero se vuelve verde.

### 5.5.1 Seleccionar las señales que se enviarán por videoconferencia

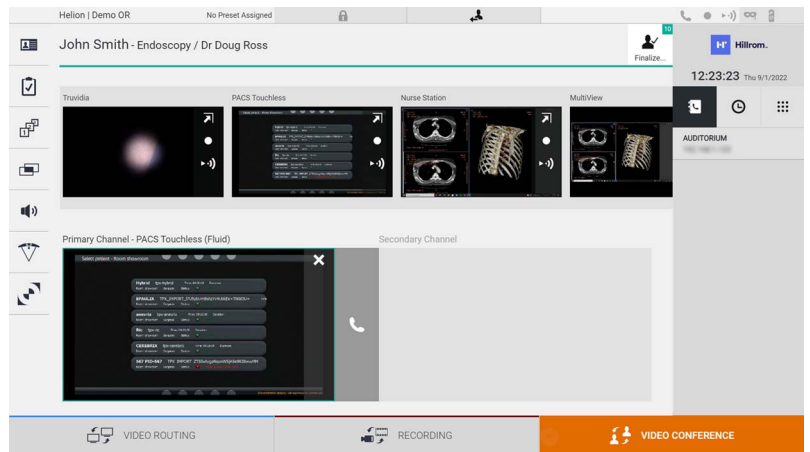
Desde el listado de fuentes, arrastre la fuente que desea enviar por videoconferencia en la casilla Primary Channel (Canal primario) (o Secondary Channel [Canal secundario]).






### 5.5.2 Eliminar las señales a enviar por videoconferencia


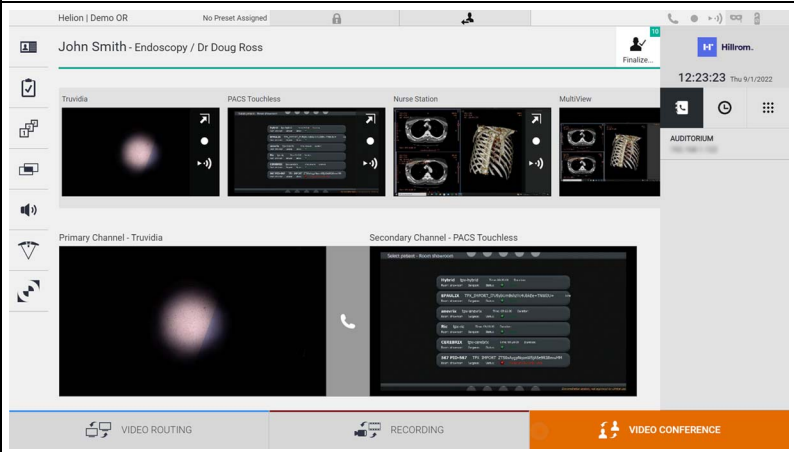
Pulse una de las casillas relacionadas con el canal primario y/o secundario de la videoconferencia y, a continuación, el icono  que se mostrará en su interior para eliminar la señal de vídeo de la videoconferencia.


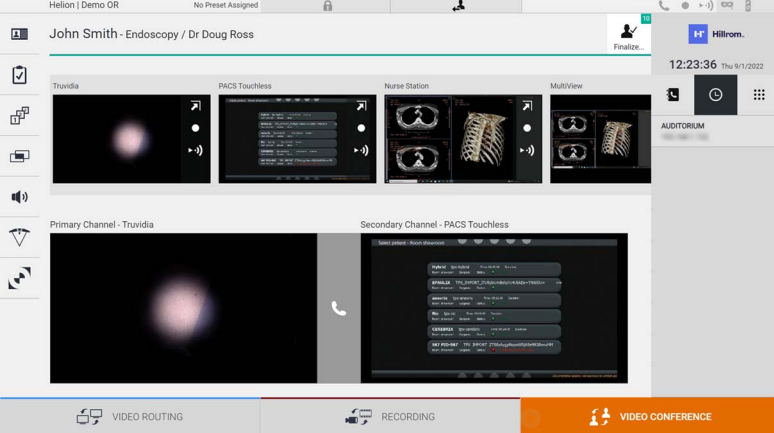

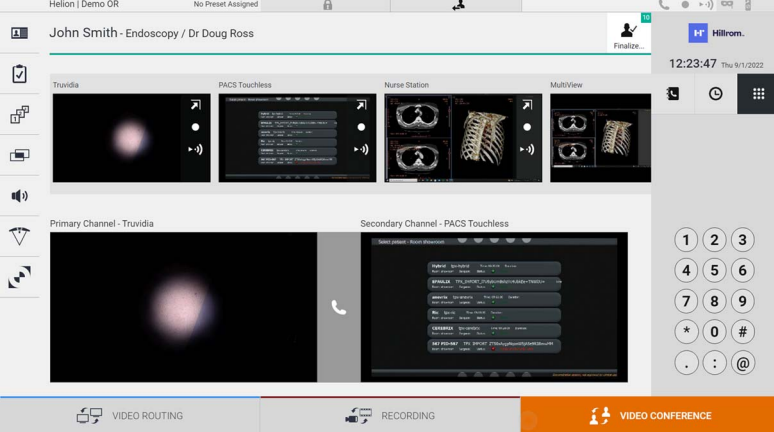
La señal de vídeo así eliminada ya no será compartida con los participantes de la videoconferencia.



### 5.5.3 Seleccionar el destinatario de la llamada



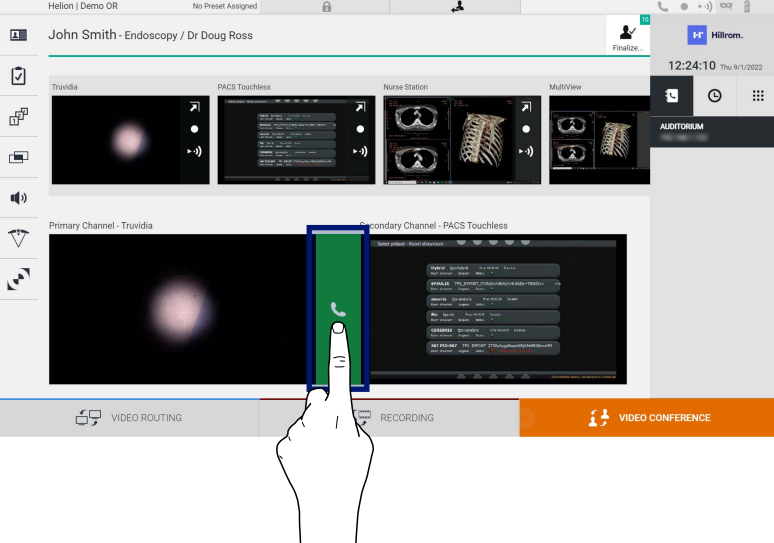
Para seleccionar el destinatario de la llamada, pulse el icono respectivo    (según el modo) en la parte derecha de la pantalla. Los iconos se describen a continuación:

Icono	Descripción	Imagen
	Permite seleccionar un nombre de la lista de contactos.	

Icono	Descripción	Imagen
	<p>Permite seleccionar un nombre/dirección de los indicados en el registro de llamadas enviadas/recibidas.</p>	
	<p>Permite introducir manualmente la dirección IP del destinatario mediante el teclado numérico.</p>	

**5.5.4 Inicio de la llamada**

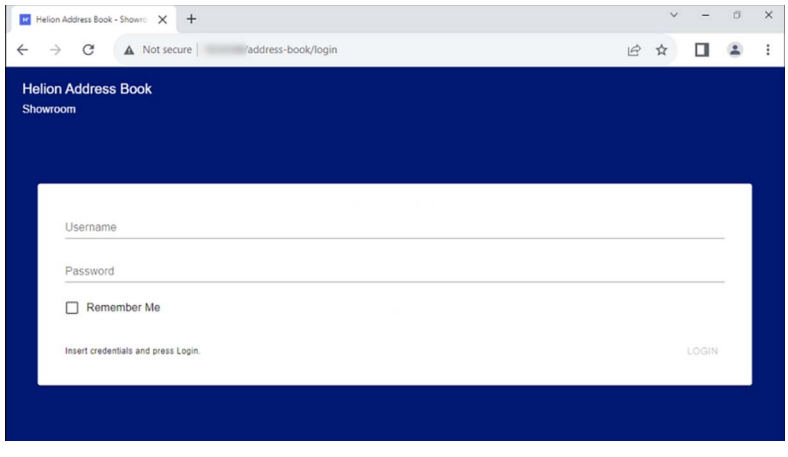

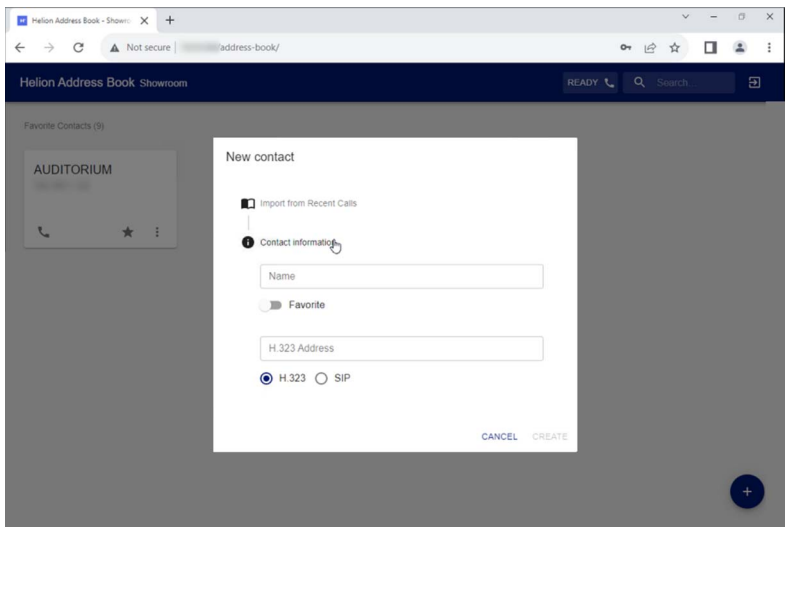
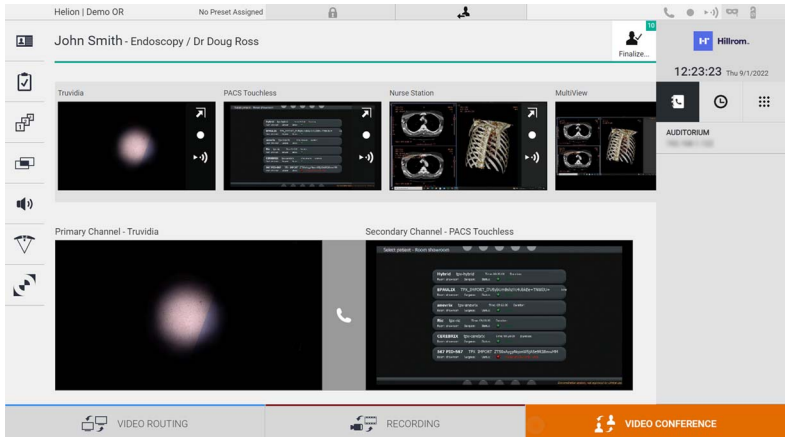
Una vez seleccionado el destinatario de la llamada, se puede iniciar la misma. Para iniciar la llamada, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Pulse el botón verde de llamada . El botón de llamada se vuelve rojo  e indica la opción de finalizar la llamada.</p>	

### 5.5.5 Llamar a un receptor H.323/SIP

Las siguientes instrucciones proporcionan los pasos necesarios para:

- Acceder a la sección de la libreta de direcciones del sistema Helion
- Llamar a una reunión H.323/SIP a través del sistema Helion

Paso	Imagen
<p>1. En un PC desde el que se pueda acceder a Helion a través de la red, abra un navegador web moderno y escriba la dirección de la libreta de direcciones de Helion:            https://&lt;dirección IP&gt;/libreta de direcciones  <b>Nota:</b> Sustituya &lt;dirección IP&gt; por la dirección IP/FQDN real de la unidad principal de Helion.</p> <p>2. Introduzca las mismas credenciales de usuario para acceder a la GUI de Helion.</p>	
<p>3. Haga clic en  la esquina inferior derecha de la página para que aparezca el formulario de nuevo contacto.</p> <p>4. Escriba un nombre de contacto en el campo de nombre.</p> <p>5. Seleccione el botón de radio SIP/H.323 según la plataforma que esté utilizando.</p> <p>6. Introduzca la dirección del enlace SIP/H.323 en el campo de dirección SIP/H.323.  <b>Nota:</b> Puede marcar un contacto como "Favorito" para que aparezca al principio de la lista, en orden alfabético.</p> <p>7. Haga clic en <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CREATE</span>.</p>	
<p>8. Inicie sesión en la interfaz de usuario del sistema Helion.</p> <p>9. Navegue a la pestaña de videoconferencia y revise los contactos guardados en la libreta de direcciones en el lado derecho de la pantalla para el contacto con nombre que acaba de crear.</p> <p>10. Seleccione y llame al contacto que ha creado.</p>	

## 5.6 Funciones adicionales

Desde el menú lateral se puede acceder a las siguientes funciones opcionales:

Icono	Descripción
	Permite acceder a las pantallas relacionadas con la gestión de los datos del paciente.
	Permite acceder a las pantallas de comprobación relacionadas con la cirugía.
	Permite acceder a las pantallas de preajuste y flujo de trabajo de la configuración de la sala.
	Permite acceder a las pantallas de configuración de vista múltiple.
	Permite acceder a las pantallas de configuración de audio.
	Permite acceder a la pantalla de gestión de las luces de la sala de operaciones. Esta función sólo se puede utilizar si hay dispositivos Trumpf Medical asociados.
	Permite acceder a la pantalla de control de las luces del quirófano. Esta función solo puede utilizarse si hay dispositivos Operamed asociados.

### 5.6.1 Gestión de los datos del paciente

En el menú lateral, pulse el icono para acceder a la gestión de datos del paciente.

John Smith - Endoscopy / Dr Doug Ross

Finalize...

12:25:33 Thu 9/1/2022

Search

New Patient

Emergency Patient

Worklist Refresh

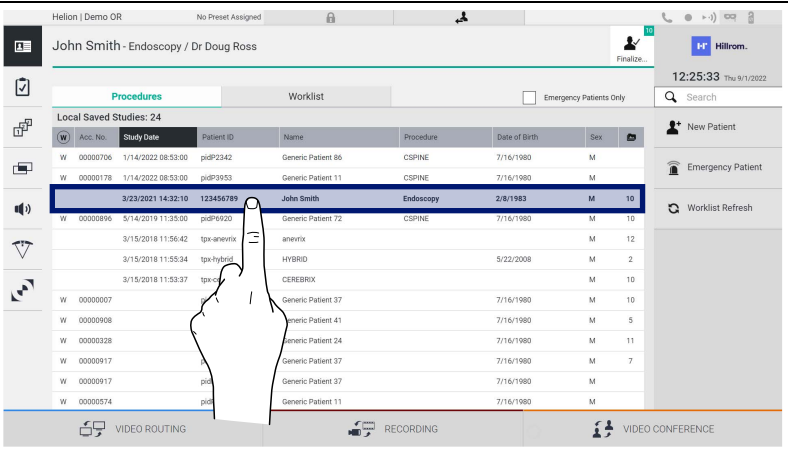
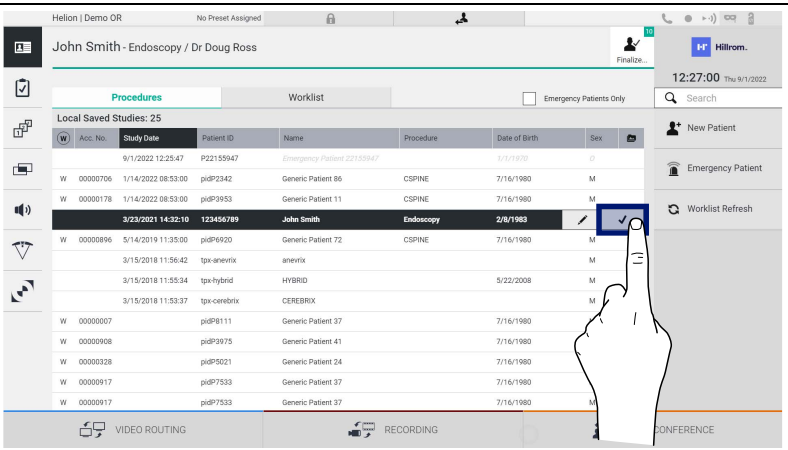
W	Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex	
W	00000706	1/14/2022 08:53:00	pidP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M	
W	00000178	1/14/2022 08:53:00	pidP3953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M	
		3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	10
W	00000896	5/14/2019 11:35:00	pidP6920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M	10
		3/15/2018 11:56:42	tpx-anevrix	anevrix			M	12
		3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID		5/22/2008	M	2
		3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrix	CEREBRIX			M	10
W	00000007		pidP8111	Generic Patient 37		7/16/1980	M	10
W	00000908		pidP3975	Generic Patient 41		7/16/1980	M	5
W	00000328		pidP5021	Generic Patient 24		7/16/1980	M	11
W	00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M	7
W	00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M	
W	00000574		pidP4864	Generic Patient 11		7/16/1980	M	

VIDEO ROUTING      RECORDING      VIDEO CONFERENCE

En la pantalla que se muestra, al pulsar el icono, aparece la lista de pacientes [A], ya introducidos y divididos entre los importados por la Worklist (Lista de trabajo) (si está presente), y los previamente seleccionados o insertados manualmente.


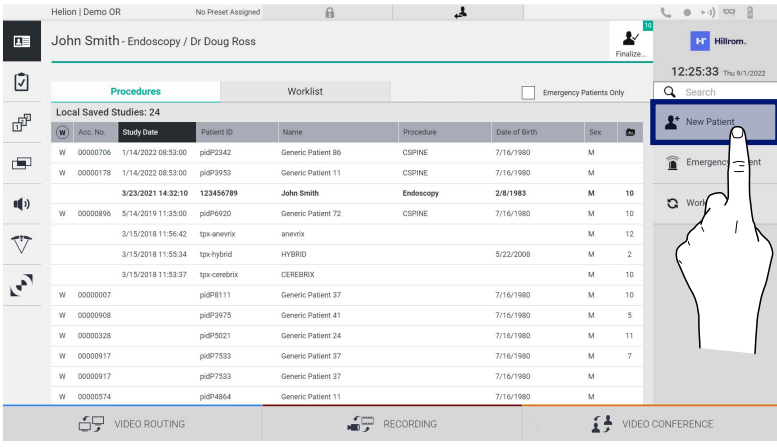
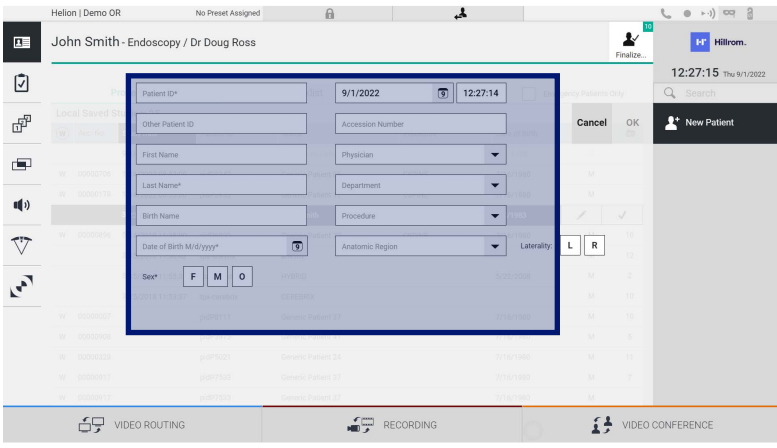
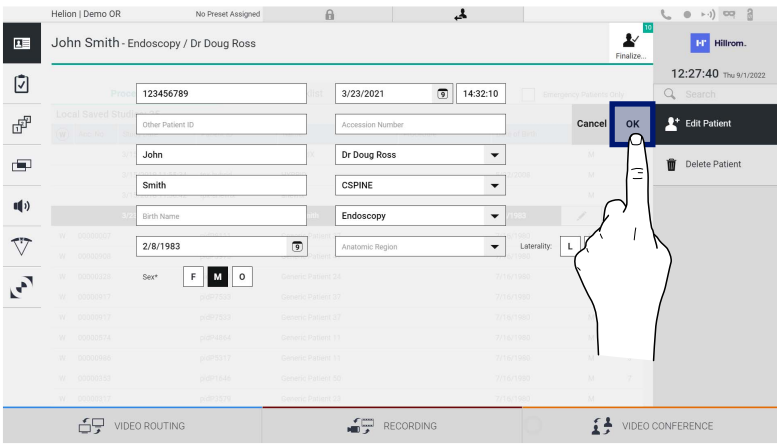
### 5.6.1.1 Seleccionar un paciente presente en la lista

Para seleccionar un paciente ya presente en la lista, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen																																																																																																		
<p>1. Seleccione el paciente.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Local Saved Studies' table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Acc. No.</th> <th>Study Date</th> <th>Patient ID</th> <th>Name</th> <th>Procedure</th> <th>Date of Birth</th> <th>Sex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W 00000706</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>pidP2342</td> <td>Generic Patient 86</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00001178</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>pidP953</td> <td>Generic Patient 11</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000896</td> <td>3/23/2021 14:32:10</td> <td>123456789</td> <td>John Smith</td> <td>Endoscopy</td> <td>2/8/1983</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000920</td> <td>5/14/2019 11:35:00</td> <td>pidP920</td> <td>Generic Patient 72</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>3/15/2018 11:56:42</td> <td>tpx-anevix</td> <td>anevix</td> <td></td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>3/15/2018 11:55:34</td> <td>tpx-hybrid</td> <td>HYBRID</td> <td></td> <td>5/22/2008</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>3/15/2018 11:53:37</td> <td>tpx-cerebrox</td> <td>CEREBROX</td> <td></td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000007</td> <td></td> <td>pidP8111</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000908</td> <td></td> <td>pidP975</td> <td>Generic Patient 41</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000328</td> <td></td> <td>pidP9021</td> <td>Generic Patient 24</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td></td> <td>pidP7533</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td></td> <td>pidP7533</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00005714</td> <td></td> <td>pidP7533</td> <td>Generic Patient 11</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>	Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex	W 00000706	1/14/2022 08:53:00	pidP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M	W 00001178	1/14/2022 08:53:00	pidP953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M	W 00000896	3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	W 00000920	5/14/2019 11:35:00	pidP920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M	W 00000917	3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix			M	W 00000917	3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID		5/22/2008	M	W 00000917	3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrox	CEREBROX			M	W 00000007		pidP8111	Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 00000908		pidP975	Generic Patient 41		7/16/1980	M	W 00000328		pidP9021	Generic Patient 24		7/16/1980	M	W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 00005714		pidP7533	Generic Patient 11		7/16/1980	M
Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex																																																																																													
W 00000706	1/14/2022 08:53:00	pidP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
W 00001178	1/14/2022 08:53:00	pidP953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
W 00000896	3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M																																																																																													
W 00000920	5/14/2019 11:35:00	pidP920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
W 00000917	3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix			M																																																																																													
W 00000917	3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID		5/22/2008	M																																																																																													
W 00000917	3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrox	CEREBROX			M																																																																																													
W 00000007		pidP8111	Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000908		pidP975	Generic Patient 41		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000328		pidP9021	Generic Patient 24		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 00005714		pidP7533	Generic Patient 11		7/16/1980	M																																																																																													
<p>2. Pulse <input checked="" type="checkbox"/> para confirmar la selección.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Local Saved Studies' table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Acc. No.</th> <th>Study Date</th> <th>Patient ID</th> <th>Name</th> <th>Procedure</th> <th>Date of Birth</th> <th>Sex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W 00000706</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>pidP2342</td> <td>Generic Patient 86</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00001178</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>pidP953</td> <td>Generic Patient 11</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000896</td> <td>3/23/2021 14:32:10</td> <td>123456789</td> <td>John Smith</td> <td>Endoscopy</td> <td>2/8/1983</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000920</td> <td>5/14/2019 11:35:00</td> <td>pidP920</td> <td>Generic Patient 72</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>3/15/2018 11:56:42</td> <td>tpx-anevix</td> <td>anevix</td> <td></td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>3/15/2018 11:55:34</td> <td>tpx-hybrid</td> <td>HYBRID</td> <td></td> <td>5/22/2008</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>3/15/2018 11:53:37</td> <td>tpx-cerebrox</td> <td>CEREBROX</td> <td></td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000007</td> <td></td> <td>pidP8111</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000908</td> <td></td> <td>pidP975</td> <td>Generic Patient 41</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000328</td> <td></td> <td>pidP9021</td> <td>Generic Patient 24</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td></td> <td>pidP7533</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td></td> <td>pidP7533</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>	Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex	W 00000706	1/14/2022 08:53:00	pidP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M	W 00001178	1/14/2022 08:53:00	pidP953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M	W 00000896	3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	W 00000920	5/14/2019 11:35:00	pidP920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M	W 00000917	3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix			M	W 00000917	3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID		5/22/2008	M	W 00000917	3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrox	CEREBROX			M	W 00000007		pidP8111	Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 00000908		pidP975	Generic Patient 41		7/16/1980	M	W 00000328		pidP9021	Generic Patient 24		7/16/1980	M	W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M							
Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex																																																																																													
W 00000706	1/14/2022 08:53:00	pidP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
W 00001178	1/14/2022 08:53:00	pidP953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
W 00000896	3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M																																																																																													
W 00000920	5/14/2019 11:35:00	pidP920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
W 00000917	3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix			M																																																																																													
W 00000917	3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID		5/22/2008	M																																																																																													
W 00000917	3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrox	CEREBROX			M																																																																																													
W 00000007		pidP8111	Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000908		pidP975	Generic Patient 41		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000328		pidP9021	Generic Patient 24		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 00000917		pidP7533	Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													

### 5.6.1.2 Introducir un paciente nuevo

Para introducir un paciente nuevo, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Seleccione el icono  de la derecha de la pantalla. Aparece la ventana para rellenar los datos del paciente.</p>	
<p>2. Introduzca los datos del paciente nuevo. Los campos marcados con * son obligatorios.</p>	
<p>3. Una vez rellenados los datos obligatorios, es posible guardar el paciente nuevo pulsando <b>OK</b> o cancelar la inserción con <b>Cancel</b>.</p>	

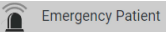
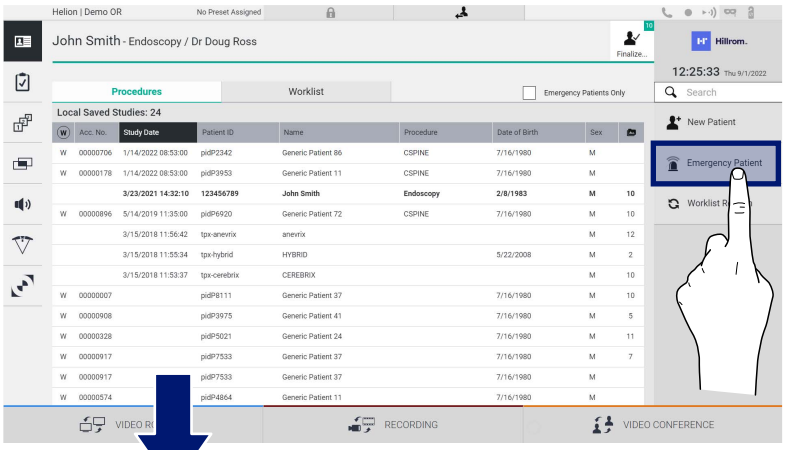
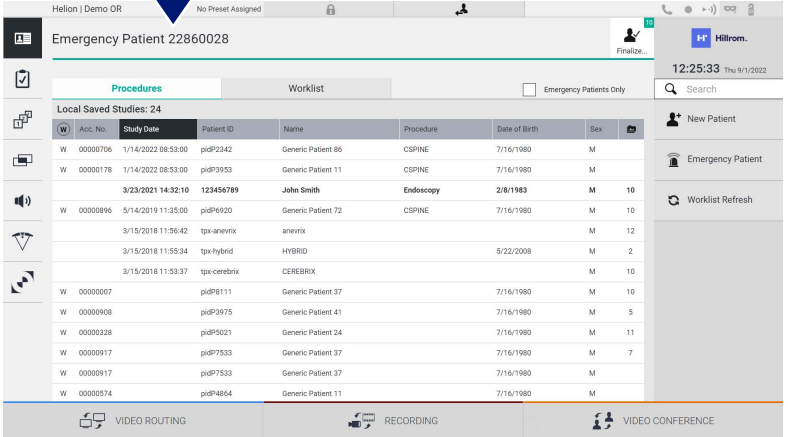


### 5.6.1.3 Introducir un paciente de urgencia

Si las condiciones no permiten rellenar los datos del paciente nuevo de forma completamente manual, a través de esta opción es posible crear rápidamente un nombre con ID aleatoria llamado Emergency Patient (Paciente en emergencia).

En cuanto a las funcionalidades disponibles y a la gestión, el Emergency Patient (Paciente en emergencia) es comparable a cualquier paciente introducido manualmente o recuperando la Worklist (Lista de trabajo).

Para introducir un paciente de emergencia, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen																																																																																																												
<p>1. Seleccione el icono  de la derecha de la pantalla. Aparece una línea nueva con el nombre "Emergency Patient XXXX" (Paciente en emergencia XXXX), donde XXXX indica un número de identificación progresivo.</p>	 <p>The screenshot shows the 'John Smith - Endoscopy / Dr Doug Ross' patient record. On the right side, there is a 'New Patient' menu with an 'Emergency Patient' option highlighted by a blue box and a hand icon pointing to it. A blue arrow points from the 'Emergency Patient' button in the screenshot above to the 'Emergency Patient 22860028' record in the screenshot below.</p>																																																																																																												
	 <p>The screenshot shows the 'Emergency Patient 22860028' record added to the 'Local Saved Studies' list. The table below shows the updated list of studies.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Acc. No.</th> <th>Study Date</th> <th>Patient ID</th> <th>Name</th> <th>Procedure</th> <th>Date of Birth</th> <th>Sex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W 00000706</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>piP2342</td> <td>Generic Patient 86</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 00000178</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>piP3953</td> <td>Generic Patient 11</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>3/23/2021 14:32:10</td> <td>123456789</td> <td>John Smith</td> <td>Endoscopy</td> <td>2/8/1983</td> <td>M</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>W 00000896</td> <td>5/14/2019 11:35:00</td> <td>piP4920</td> <td>Generic Patient 72</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3/15/2018 11:56:42</td> <td>tpx-anevix</td> <td>anevix</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3/15/2018 11:55:34</td> <td>tpx-hybrid</td> <td>HYBRID</td> <td></td> <td></td> <td>5/22/2008</td> <td>M</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3/15/2018 11:53:37</td> <td>tpx-cerebrix</td> <td>CEREBRIX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>W 00000007</td> <td>piP8111</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>W 00000908</td> <td>piP3975</td> <td>Generic Patient 41</td> <td></td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>W 00000328</td> <td>piP5021</td> <td>Generic Patient 24</td> <td></td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>piP7533</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>W 00000917</td> <td>piP7533</td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>W 00000574</td> <td>piP4864</td> <td>Generic Patient 11</td> <td></td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex	W 00000706	1/14/2022 08:53:00	piP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M	W 00000178	1/14/2022 08:53:00	piP3953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M	3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	10	W 00000896	5/14/2019 11:35:00	piP4920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M	10	3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix				M	12	3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID			5/22/2008	M	2	3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrix	CEREBRIX				M	10	W 00000007	piP8111	Generic Patient 37			7/16/1980	M	10	W 00000908	piP3975	Generic Patient 41			7/16/1980	M	5	W 00000328	piP5021	Generic Patient 24			7/16/1980	M	11	W 00000917	piP7533	Generic Patient 37			7/16/1980	M	7	W 00000917	piP7533	Generic Patient 37			7/16/1980	M		W 00000574	piP4864	Generic Patient 11			7/16/1980	M	
Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex																																																																																																							
W 00000706	1/14/2022 08:53:00	piP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																																							
W 00000178	1/14/2022 08:53:00	piP3953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																																							
3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	10																																																																																																							
W 00000896	5/14/2019 11:35:00	piP4920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M	10																																																																																																						
3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix				M	12																																																																																																						
3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID			5/22/2008	M	2																																																																																																						
3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrix	CEREBRIX				M	10																																																																																																						
W 00000007	piP8111	Generic Patient 37			7/16/1980	M	10																																																																																																						
W 00000908	piP3975	Generic Patient 41			7/16/1980	M	5																																																																																																						
W 00000328	piP5021	Generic Patient 24			7/16/1980	M	11																																																																																																						
W 00000917	piP7533	Generic Patient 37			7/16/1980	M	7																																																																																																						
W 00000917	piP7533	Generic Patient 37			7/16/1980	M																																																																																																							
W 00000574	piP4864	Generic Patient 11			7/16/1980	M																																																																																																							

### 5.6.1.4 Búsqueda de un paciente presente en una lista

Para buscar un paciente ya presente en la lista, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
1. Introduzca los apellidos o la ID en el campo específico de la sección derecha.	

### 5.6.1.4.1 Filtro de paciente en emergencia

Se pueden mostrar solo los pacientes creados como “Emergency Patient” (Paciente en emergencia) aplicando el filtro de paciente en emergencia:


Paso	Imagen
1. Seleccione el icono en la parte superior de la pantalla. Automáticamente Helion solo mostrará la lista de pacientes en emergencia.	

### 5.6.1.5 Modificación de los datos maestros del paciente


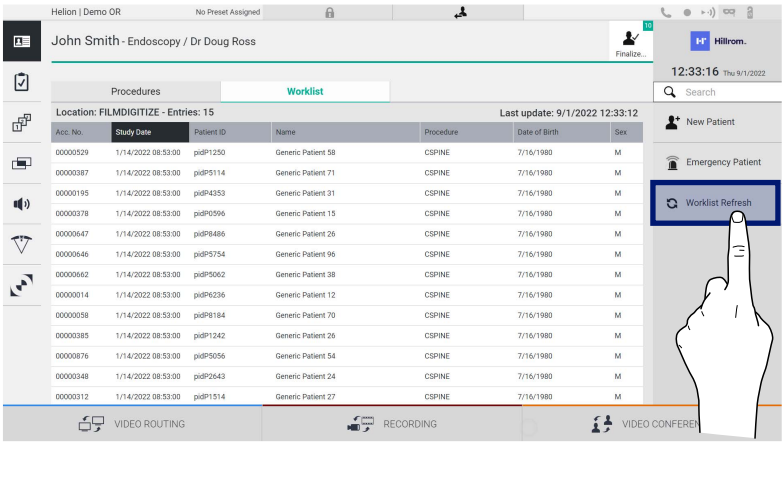
Para modificar los datos maestros de un paciente, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen																																																																																																		
<p>1. Busque y seleccione el paciente deseado.</p>	<p>The screenshot shows the 'Local Saved Studies' table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Acc. No.</th> <th>Study Date</th> <th>Patient ID</th> <th>Name</th> <th>Procedure</th> <th>Date of Birth</th> <th>Sex</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W 0000706</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>piP2342</td> <td>Generic Patient 86</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 0000178</td> <td>1/14/2022 08:53:00</td> <td>piP3953</td> <td>Generic Patient 11</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>3/23/2021 14:32:10</td> <td>123456789</td> <td>John Smith</td> <td>Endoscopy</td> <td>2/8/1983</td> <td>M</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>W 0000996</td> <td>3/14/2019 11:25:00</td> <td>piP6920</td> <td>Generic Patient 72</td> <td>CSPINE</td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3/15/2018 11:56:42</td> <td>tpx-anevix</td> <td>anevix</td> <td></td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3/15/2018 11:55:34</td> <td>tpx-hybrid</td> <td>HYBRID</td> <td>5/22/2008</td> <td>M</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3/15/2018 11:53:37</td> <td>tpx-cerebrix</td> <td>CEREBRIX</td> <td></td> <td></td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 0000007</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 0000908</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 41</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 0000328</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 24</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 0000917</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 0000917</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>W 0000574</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 11</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> </tr> </tbody> </table>	Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex	W 0000706	1/14/2022 08:53:00	piP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M	W 0000178	1/14/2022 08:53:00	piP3953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M	3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	10	W 0000996	3/14/2019 11:25:00	piP6920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M		3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix			M		3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID	5/22/2008	M	2		3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrix	CEREBRIX			M	W 0000007			Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 0000908			Generic Patient 41		7/16/1980	M	W 0000328			Generic Patient 24		7/16/1980	M	W 0000917			Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 0000917			Generic Patient 37		7/16/1980	M	W 0000574			Generic Patient 11		7/16/1980	M
Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex																																																																																													
W 0000706	1/14/2022 08:53:00	piP2342	Generic Patient 86	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
W 0000178	1/14/2022 08:53:00	piP3953	Generic Patient 11	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	10																																																																																													
W 0000996	3/14/2019 11:25:00	piP6920	Generic Patient 72	CSPINE	7/16/1980	M																																																																																													
	3/15/2018 11:56:42	tpx-anevix	anevix			M																																																																																													
	3/15/2018 11:55:34	tpx-hybrid	HYBRID	5/22/2008	M	2																																																																																													
	3/15/2018 11:53:37	tpx-cerebrix	CEREBRIX			M																																																																																													
W 0000007			Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 0000908			Generic Patient 41		7/16/1980	M																																																																																													
W 0000328			Generic Patient 24		7/16/1980	M																																																																																													
W 0000917			Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 0000917			Generic Patient 37		7/16/1980	M																																																																																													
W 0000574			Generic Patient 11		7/16/1980	M																																																																																													
<p>2. Pulse  para cambiar los datos maestros del paciente seleccionado. Esta opción no está disponible para los pacientes de la sección Worklist (Lista de trabajo).</p>	<p>The screenshot shows the 'Local Saved Studies' table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Acc. No.</th> <th>Study Date</th> <th>Patient ID</th> <th>Name</th> <th>Procedure</th> <th>Date of Birth</th> <th>Sex</th> <th>Action</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W 0000007</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>W 0000908</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 41</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>W 0000328</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 24</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>W 0000917</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 37</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>7</td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>3/23/2021 14:32:10</td> <td>123456789</td> <td>John Smith</td> <td>Endoscopy</td> <td>2/8/1983</td> <td>M</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>W 0000986</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 11</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>W 0000353</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 50</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>W 0000317</td> <td></td> <td></td> <td>Generic Patient 23</td> <td></td> <td>7/16/1980</td> <td>M</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex	Action	W 0000007			Generic Patient 37		7/16/1980	M	10	W 0000908			Generic Patient 41		7/16/1980	M	5	W 0000328			Generic Patient 24		7/16/1980	M	11	W 0000917			Generic Patient 37		7/16/1980	M	7	3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	10		W 0000986			Generic Patient 11		7/16/1980	M	7	W 0000353			Generic Patient 50		7/16/1980	M	7	W 0000317			Generic Patient 23		7/16/1980	M	7																										
Acc. No.	Study Date	Patient ID	Name	Procedure	Date of Birth	Sex	Action																																																																																												
W 0000007			Generic Patient 37		7/16/1980	M	10																																																																																												
W 0000908			Generic Patient 41		7/16/1980	M	5																																																																																												
W 0000328			Generic Patient 24		7/16/1980	M	11																																																																																												
W 0000917			Generic Patient 37		7/16/1980	M	7																																																																																												
3/23/2021 14:32:10	123456789	John Smith	Endoscopy	2/8/1983	M	10																																																																																													
W 0000986			Generic Patient 11		7/16/1980	M	7																																																																																												
W 0000353			Generic Patient 50		7/16/1980	M	7																																																																																												
W 0000317			Generic Patient 23		7/16/1980	M	7																																																																																												


### 5.6.1.6 Acceso a la lista de trabajo

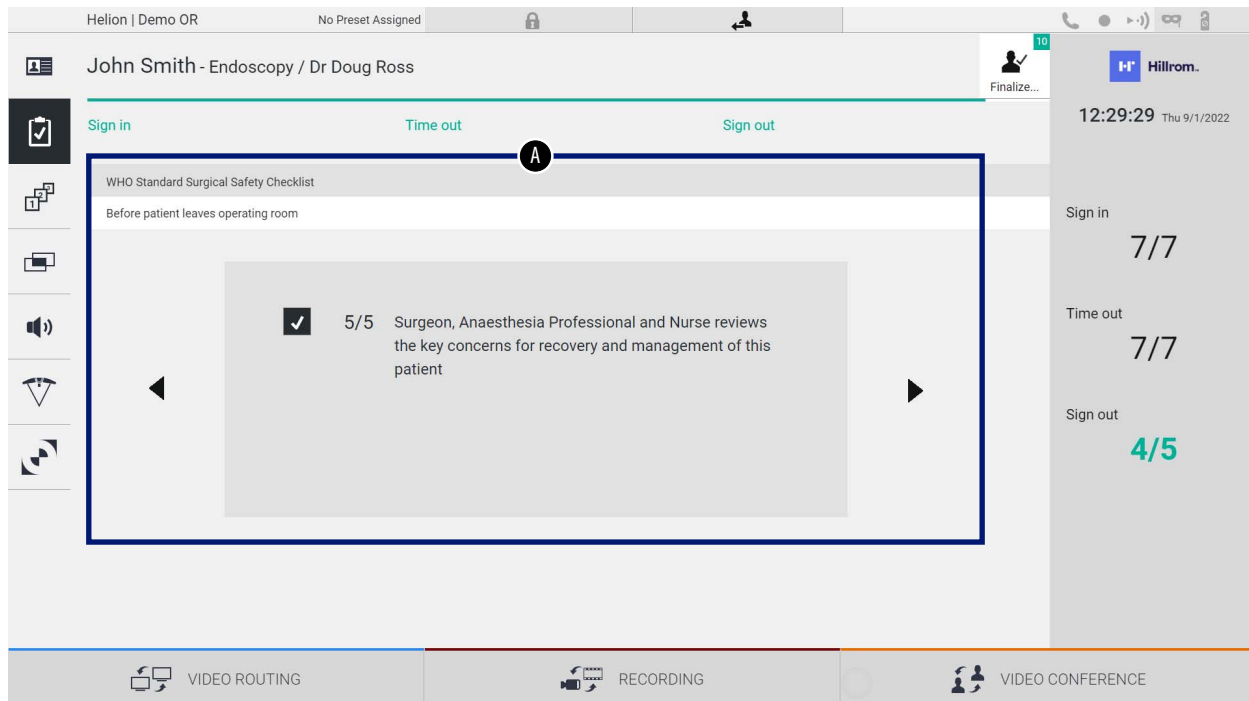
Si el sistema de gestión de vídeo Helion está configurado para conectarse a un sistema centralizado de gestión de datos maestros, la lista de pacientes relativa con la fecha/sala/cirujano puede recuperarse utilizando el botón  Worklist Refresh.

Para acceder a la lista de trabajo, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Pulse el botón  Worklist Refresh.</p> <p>Esta operación activará la actualización de la lista de trabajo.</p> <p>2. Espere a que aparezcan en la lista los nombres relativos a los criterios seleccionados.</p> <p><b>Alternativa:</b> Pulse la pestaña "Worklist" (Lista de trabajo) en la parte superior de la lista (esto no activará la actualización de la lista de trabajo).</p>	 <p>The screenshot shows the Helion interface for 'John Smith - Endoscopy / Dr Doug Ross'. A table titled 'Worklist' is displayed with columns: Acc. No., Study Date, Patient ID, Name, Procedure, Date of Birth, and Sex. The table contains 15 entries for 'Generic Patient' with various IDs and dates. A 'Worklist Refresh' button is highlighted in a blue box on the right side of the interface, with a hand icon pointing to it. The top right corner shows the time '12:33:16 Thu 9/1/2022' and the Hillrom logo.</p>

### 5.6.2 Lista de comprobación quirúrgica

En el menú lateral, pulse el icono  para acceder a las pantallas de la lista de comprobación quirúrgica. La lista de comprobación quirúrgica solo se activa después de seleccionar un paciente.



The screenshot shows the Helion interface for 'John Smith - Endoscopy / Dr Doug Ross'. The main content area displays the 'WHO Standard Surgical Safety Checklist' with the instruction 'Before patient leaves operating room'. A checklist item is shown: '5/5 Surgeon, Anaesthesia Professional and Nurse reviews the key concerns for recovery and management of this patient', with a checkmark icon. The interface includes a 'Sign in' / 'Time out' / 'Sign out' header, a 'Finalize...' button, and a sidebar with 'Sign in 7/7', 'Time out 7/7', and 'Sign out 4/5' indicators. The bottom navigation bar includes 'VIDEO ROUTING', 'RECORDING', and 'VIDEO CONFERENCE' options.

En la sección [A] es posible gestionar el procedimiento quirúrgico siguiendo una secuencia de preguntas e instrucciones relativas a cada etapa del procedimiento quirúrgico. Pulse el icono ► para navegar por las preguntas.

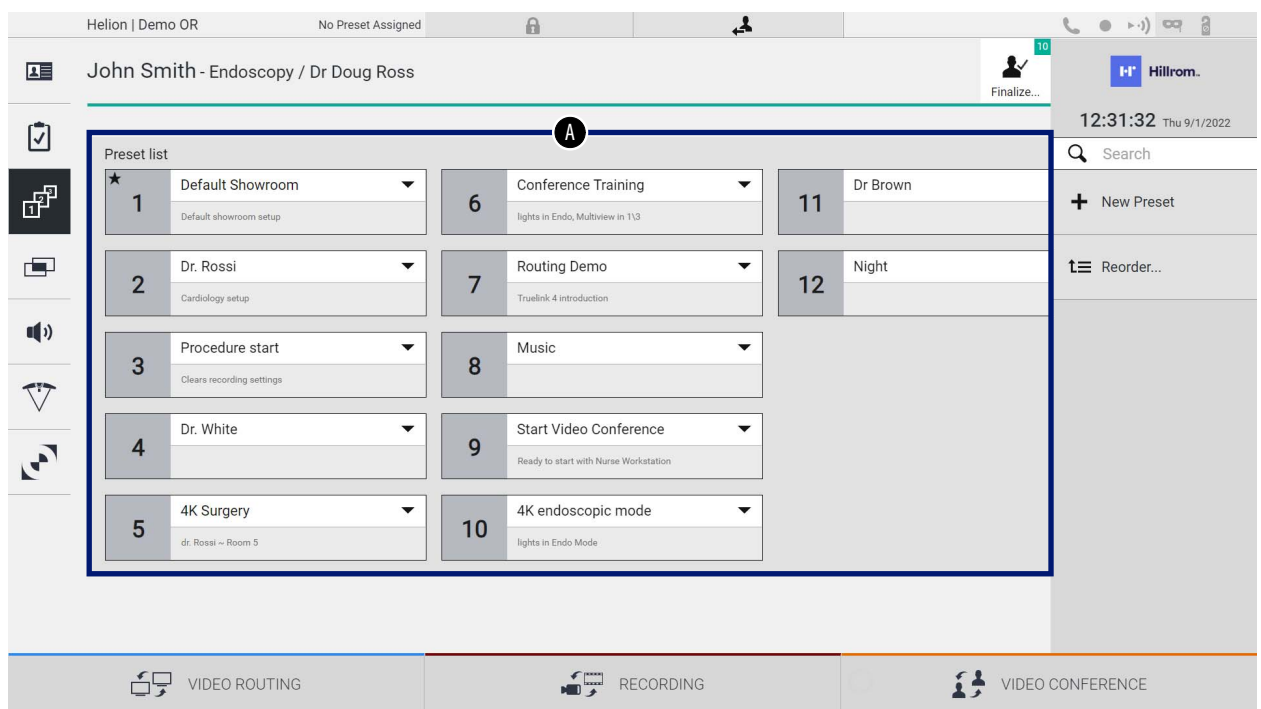
Los pasos se refieren a todo el procedimiento, por lo que podrá salir de esta sección y volver a ella para seguir rellenando la lista de comprobación quirúrgica cuando sea necesario. Siempre será posible ver el estado de cumplimentación de la lista de comprobación mirando la barra de progreso de la barra de estado. Una vez finalizada la cumplimentación, se abrirá una ventana dedicada a la introducción de notas por parte del operador.

### 5.6.3 Preajuste

En el menú lateral, pulse el icono  para acceder a las pantallas de preajuste.

Los preajustes permiten guardar las configuraciones de la sala. A continuación, será posible recuperar las configuraciones pulsando los iconos correspondientes.

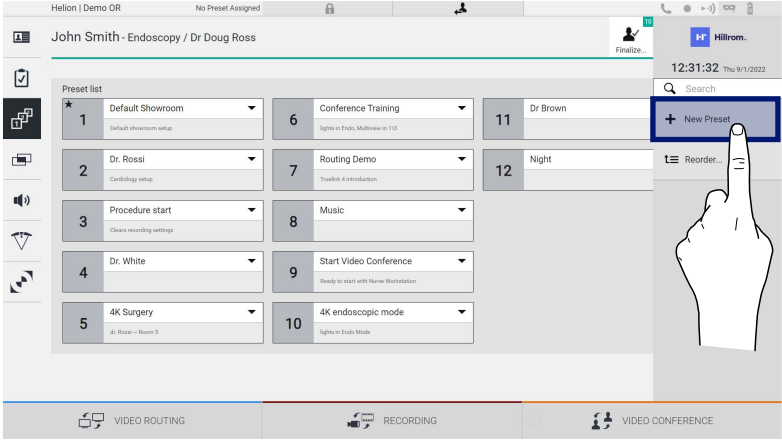
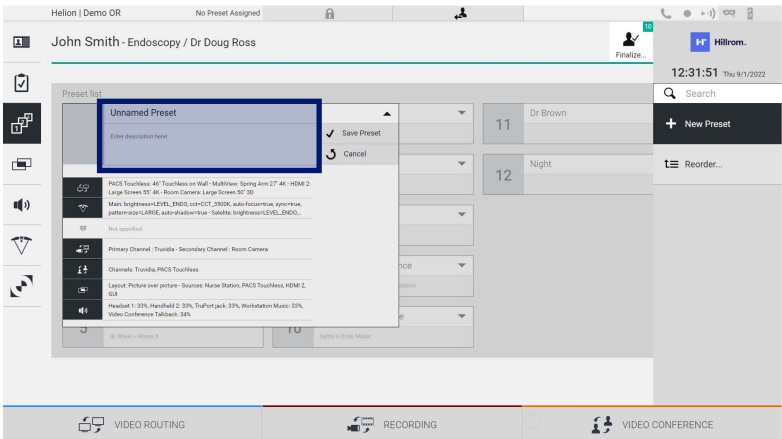
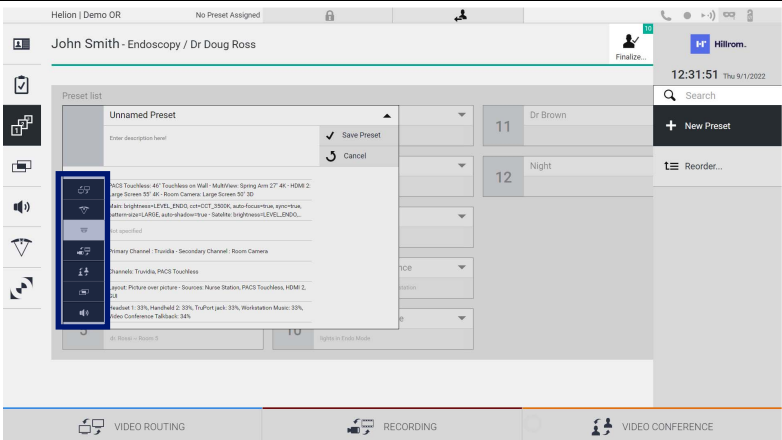
La pantalla principal se divide de la siguiente manera:

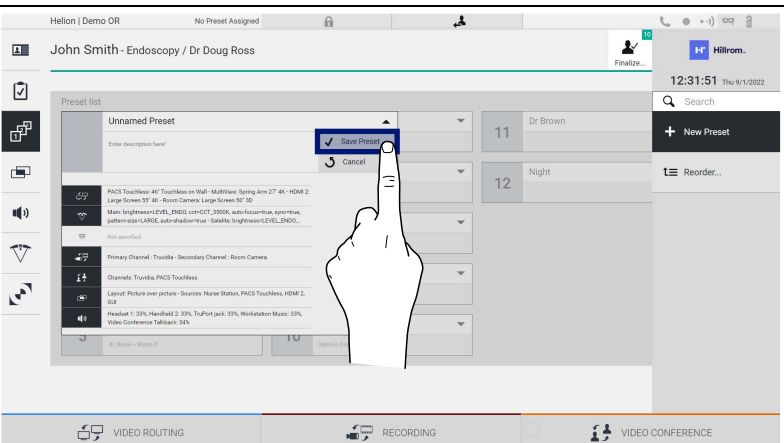


[A] Lista de preajustes

5.6.3.1 Configuración de preajustes

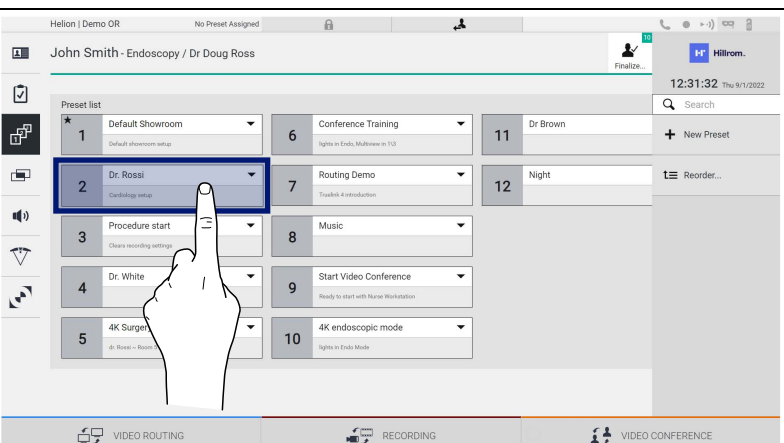
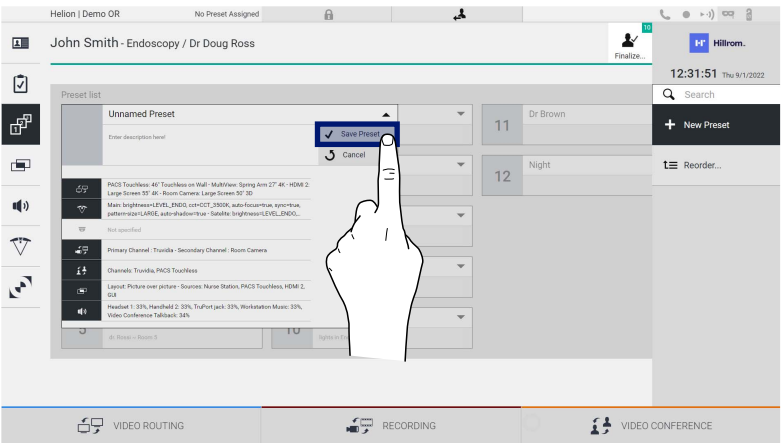
Para configurar un nuevo preajuste, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Establezca la disposición de la sala deseada (enrutamiento de vídeo, canal de grabación, canal de conferencia, ajuste de audio, ajuste de la lámpara quirúrgica).</p>	
<p>2. Pulse el botón <b>New Preset</b>. Se abre la ventana de configuración.</p>	
<p>3. Introduzca el nombre que se va a asignar a la preconfiguración nueva y añada una descripción en el campo correspondiente de abajo (opcional).</p>	
<p>4. Seleccione/anule la selección de los ajustes que se incluirán en la configuración pulsando el icono correspondiente entre los que aparecen en la lista.</p>	

<p><b>Paso</b></p> <p>5. Pulse <input checked="" type="checkbox"/> Save Preset para confirmar.</p>	<p><b>Imagen</b></p> 
--	---


### 5.6.3.2 Activación de la preajuste

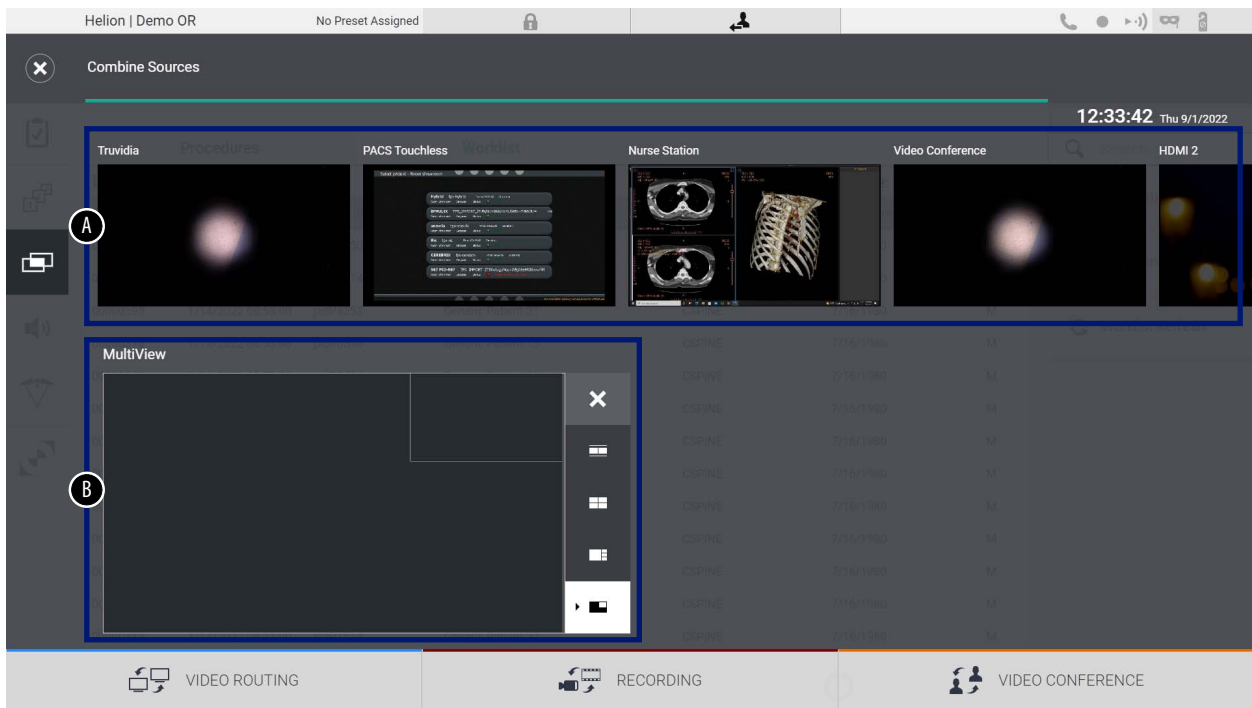
Para activar un preajuste de la lista, proceda de la siguiente manera:

<p><b>Paso</b></p> <p>1. Seleccione el preajuste deseado en la lista de preajustes. Se abre la ventana de configuración.</p>	<p><b>Imagen</b></p> 
<p>2. Aplique el preajuste pulsando <input checked="" type="checkbox"/> Apply Preset . Pulse <input type="checkbox"/> Edit Preset para realizar cambios en el preajuste. Guarde los cambios pulsando <input checked="" type="checkbox"/> Save Preset .</p>	<p><b>Imagen</b></p> 

Pulse el icono  Mark Favorite para activar automáticamente el preajuste cada vez que se inicie el sistema.

### 5.6.4 Vista múltiple














En el menú lateral, pulse el icono  para acceder a la pantalla de vista múltiple. La función de vista múltiple permite combinar varias entradas (hasta un máximo de 4) en una única señal de salida. La pantalla principal se divide de la siguiente manera:



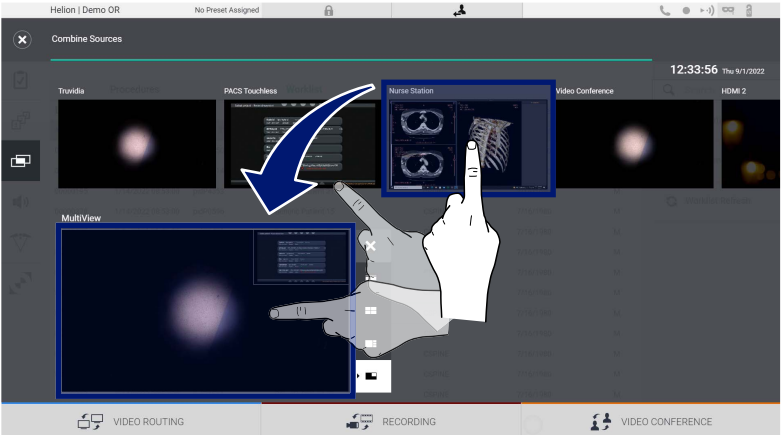
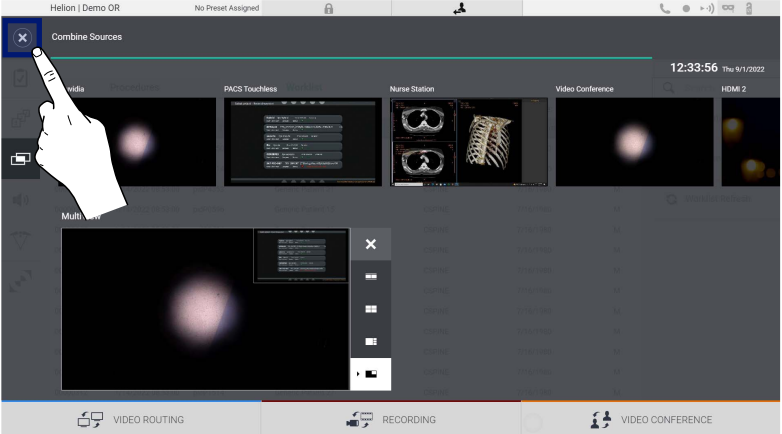
- [A] Listado de fuentes
- [B] Vista múltiple

#### 5.6.4.1 Ajuste de la vista múltiple


Para ajustar la vista múltiple, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen										
1. Seleccione la disposición deseada entre las indicadas:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Icono</th> <th>Función</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Imagen y foto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quadview</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Imagen sobre imagen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Imagen dentro de imagen (hasta 4 diseños diferentes de imagen dentro de imagen)</td> </tr> </tbody> </table>		Icono	Función		Imagen y foto		Quadview		Imagen sobre imagen		Imagen dentro de imagen (hasta 4 diseños diferentes de imagen dentro de imagen)
Icono		Función									
		Imagen y foto									
		Quadview									
	Imagen sobre imagen										
	Imagen dentro de imagen (hasta 4 diseños diferentes de imagen dentro de imagen)										



Paso	Imagen
<p>2. Arrastre las imágenes (de una en una) desde la lista de fuentes y suéltelas en las casillas correspondientes. Pulse <b>X</b>, que aparecerá en la parte superior derecha de la caja una vez seleccionada, para eliminar la imagen de la caja.</p>	
<p>3. Una vez rellenado el mosaico, cierre la sección de vista múltiple pulsando <b>X</b>. El mosaico así generado estará disponible en la lista de fuentes.</p>	

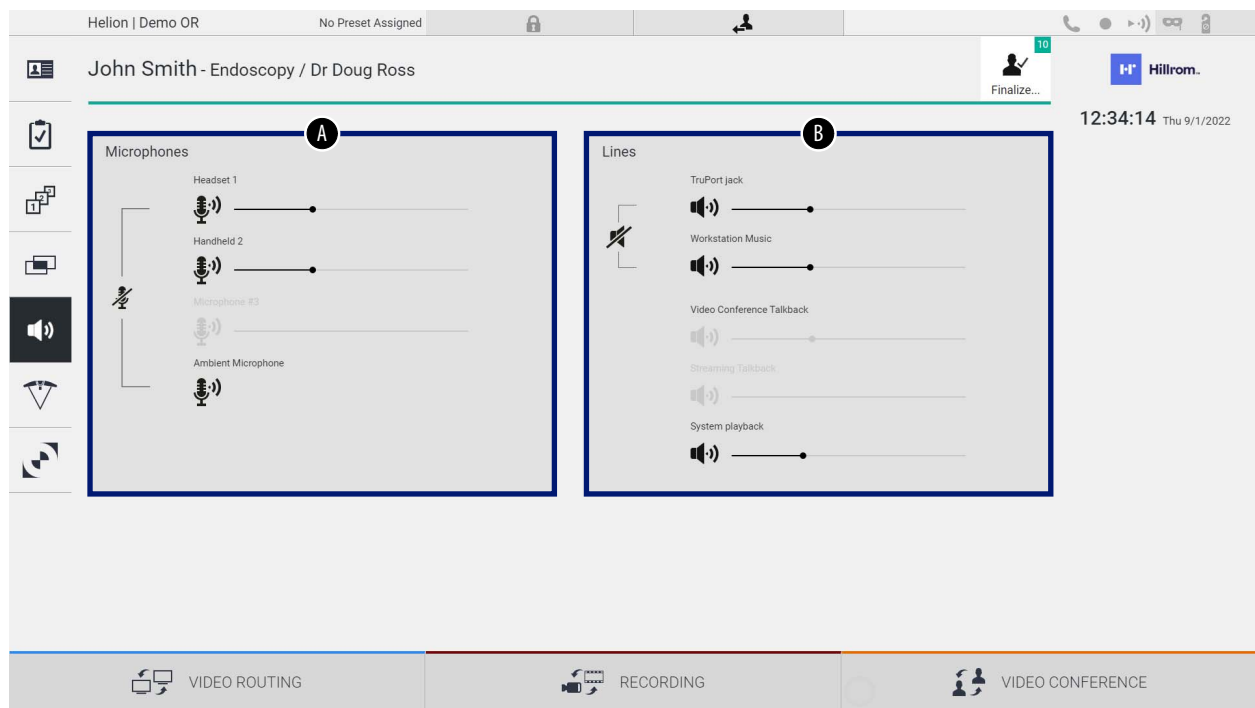
### 5.6.5 Control de audio

En el menú lateral, pulse el icono  para acceder a la pantalla de control de audio. En la sección de control de audio es posible ajustar los niveles de volumen de los micrófonos y las líneas auxiliares.

Los ajustes de "micrófonos" afectarán al nivel de audio grabado o enviado a una ubicación remota a través de streaming o videoconferencia (tenga en cuenta que el micrófono de ambiente solo funciona para la videoconferencia).

Los ajustes de "Líneas" afectarán a la mezcla de audio que se envía a los altavoces del quirófano.

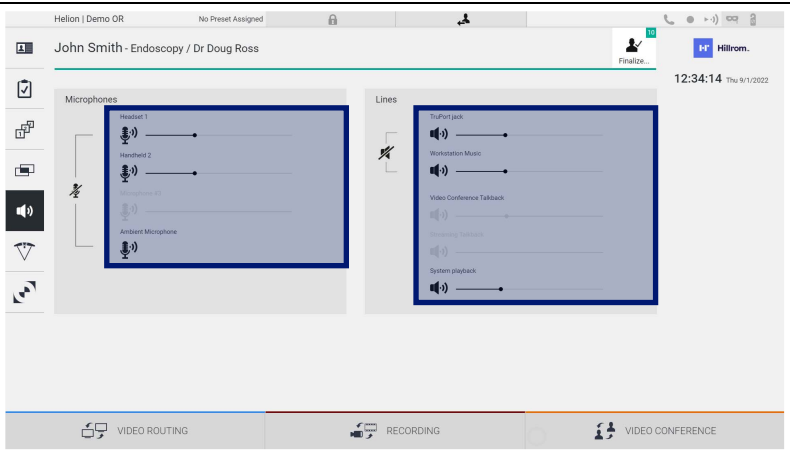
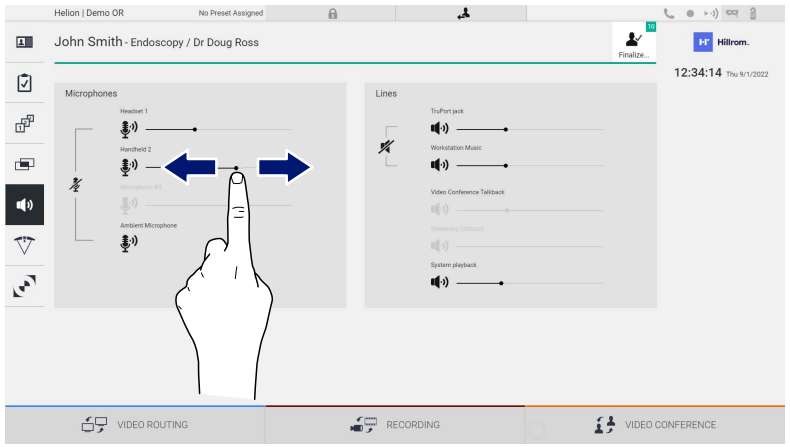
La pantalla principal se divide de la siguiente manera:



- [A] Entradas de micrófono
- [B] Entradas de línea

**5.6.5.1 Ajuste del volumen**

Para ajustar el volumen de los micrófonos o de las entradas de línea, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
<p>1. Accione la barra de volumen de los micrófonos o de las entradas de línea según el volumen que desee modificar.</p>	 <p>The screenshot shows the audio control interface with two main sections: 'Microphones' and 'Lines'. The 'Microphones' section includes sliders for Handset 1, Handset 2, Microphone #1, and Ambient Microphone. The 'Lines' section includes sliders for TriPort jack, Workstation Music, Video Conference Talkback, Incoming Callback, and System playback. A blue box highlights the volume sliders in both sections.</p>
<p>2. Pulse a lo largo de la barra para aumentar o disminuir el volumen de los micrófonos o de las entradas de línea.</p>	 <p>This screenshot is identical to the one above, but it features a hand icon with a finger touching the volume slider for 'Microphone #1'. Two blue arrows point outwards from the slider, indicating the direction of volume adjustment.</p>


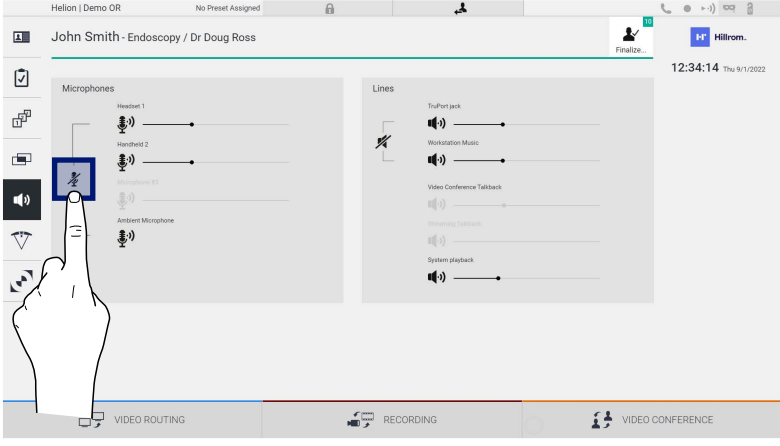

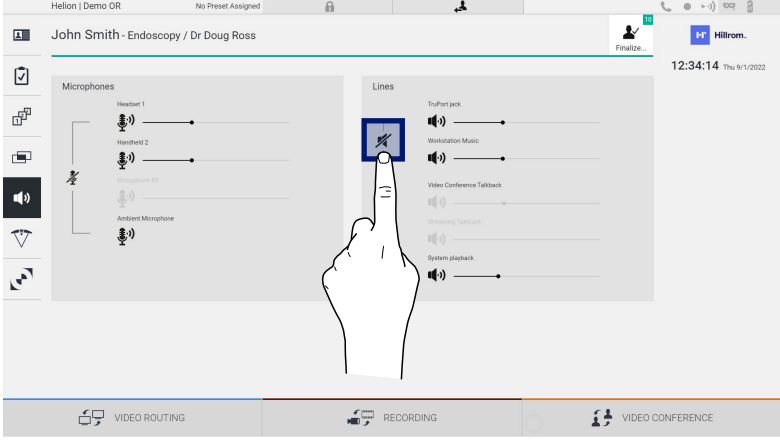
Es posible cambiar de forma independiente el canal de audio procedente de las entradas AUX1, AUX2 y videoconferencia/retransmisión.

En caso de que el sistema reciba una solicitud de conexión en videoconferencia, el sistema silenciará automáticamente las líneas AUX1/AUX2 y activará la línea de videoconferencia.

Esta opción está configurada por defecto; si desea desactivarla, póngase en contacto con el servicio de asistencia Videomed S.r.l.

### 5.6.5.2 Desactivación de los micrófonos y del audio

Para desactivar los micrófonos o las entradas de línea, proceda de la siguiente manera:

Paso	Imagen
1. Pulse  para desactivar el micrófono.	 The screenshot shows the audio control interface for a video conference. On the left, under the 'Microphones' section, there are four microphone inputs: Headset 1, Handheld 2, Microphone #1, and Ambient Microphone. A blue square highlights the mute icon (a speaker with a diagonal slash) next to the 'Microphone #1' input. A hand cursor is pointing at this icon. On the right, under the 'Lines' section, there are five line inputs: TruPort jack, Workstation Music, Video Conference Talkback, Streaming Talkback, and System playback. The interface also shows a top bar with 'Helion   Demo OR', 'No Preset Assigned', and a 'Finalize...' button. The bottom bar has 'VIDEO ROUTING', 'RECORDING', and 'VIDEO CONFERENCE' buttons.
2. Pulse  para desactivar el volumen del altavoz.	 The screenshot shows the same audio control interface as above. In this step, the hand cursor is pointing at the mute icon (a speaker with a diagonal slash) located in the 'Lines' section, specifically next to the 'TruPort jack' input. A blue square highlights this icon. The rest of the interface, including the microphone section and the top and bottom bars, remains the same as in the previous step.

### 5.6.6 Gestión de las lámparas quirúrgicas

En el menú lateral, pulse el icono  para acceder a la pantalla de gestión de los dispositivos del quirófano.

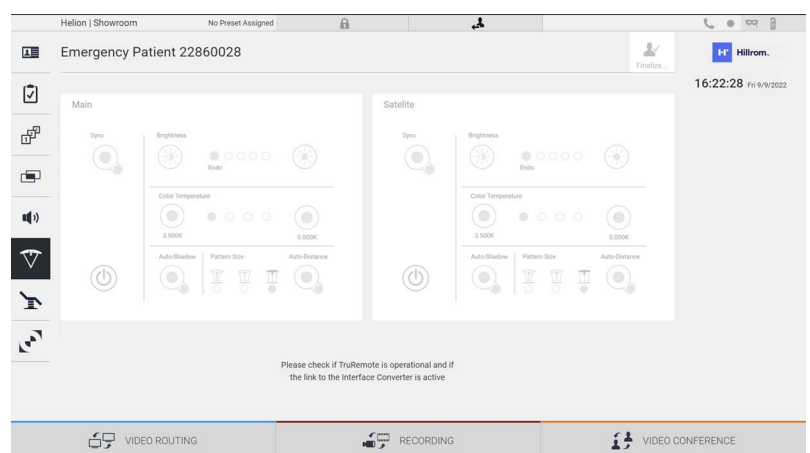
La pantalla principal está dividida en 2 zonas de subcontrol dedicadas respectivamente a las 2 lámparas quirúrgicas instaladas en el quirófano:



\* la imagen puede variar en función de la luz quirúrgica realmente instalada

- [A] Luz 1
- [B] Luz 2

La imagen muestra el caso en el que no se puede acceder al sistema de control de luces quirúrgicas.



El sistema de gestión de vídeo Helion asegura la opción de controlar las lámparas quirúrgicas de Trumpf Medical, gracias a la reproducción de la consola de control de iluminación a través de la interfaz gráfica.

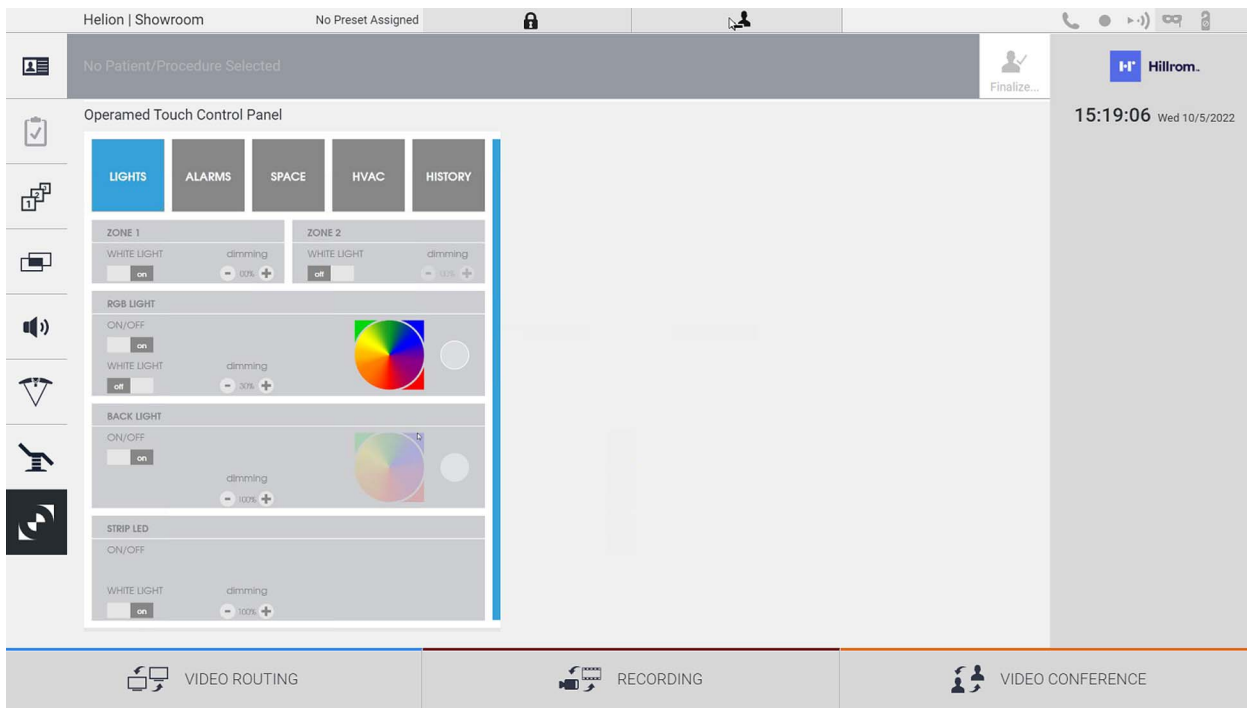
En la imagen se puede ver que las funciones accesibles desde el sistema de pantalla táctil son:

- Encendido/apagado de la luz;
- Habilitación de la función Sync (sincronización de las 2 luces);
- Ajuste del nivel de brillo de la luz;
- Ajuste de la temperatura de color de la luz;
- Ajuste del enfoque (también se puede activar la función automática)\*;
- Tamaño del haz de luz\*;
- Ajuste de la sombra (también se puede activar la función automática)\*.

\* La función puede variar según el modelo de luz instalado.

### 5.6.7 Gestión del panel de control ambiental

En el menú lateral, pulse el icono  para acceder a la pantalla de gestión del panel de control del quirófano.


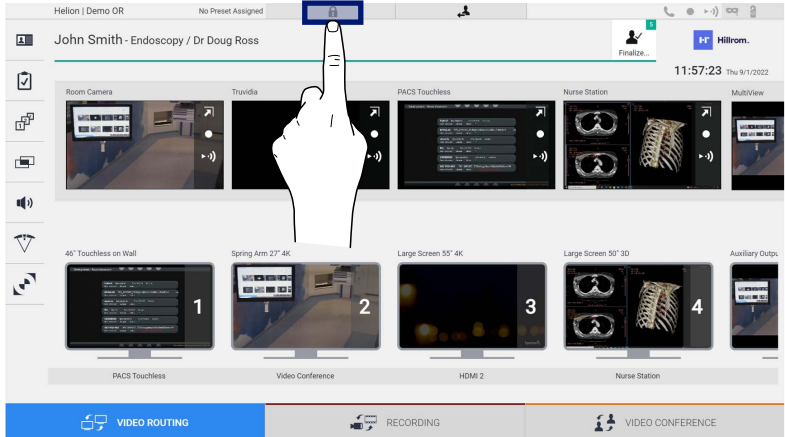
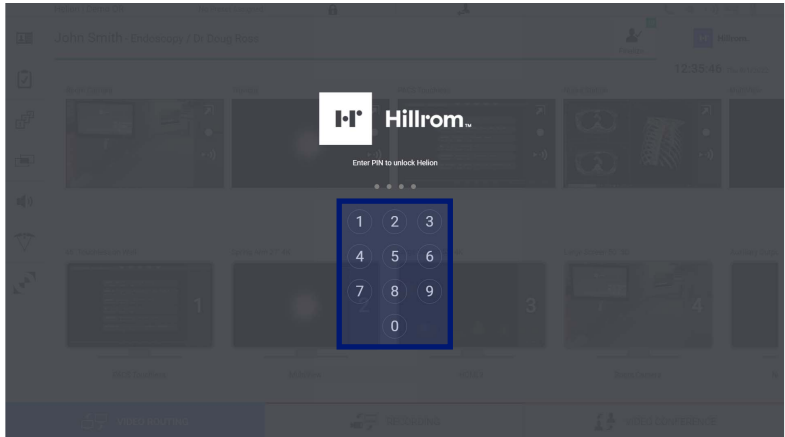


La pantalla de gestión del panel de control sólo se puede utilizar si hay dispositivos Operamed en el quirófano.

El sistema de gestión de vídeo Helion de Videomed S.r.l. permite asociar únicamente los paneles de control Operamed.

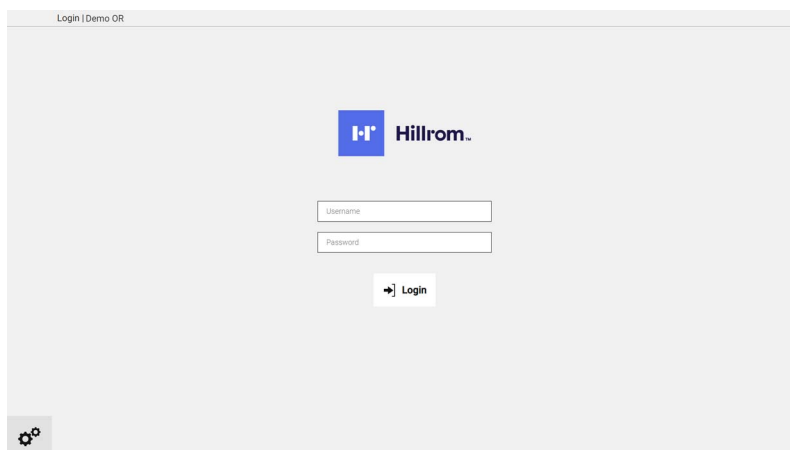
## 5.7 Función “Lock with PIN” (Bloqueo con PIN)

El sistema de gestión de vídeo Helion incluye una función de bloqueo para bloquear la pantalla táctil mediante un PIN.  
Para bloquear la pantalla táctil, proceda de la siguiente manera:


Paso	Imagen
1. Pulse  para bloquear la pantalla.	
2. Introduzca el código PIN para desbloquear la pantalla táctil utilizando el teclado numérico resaltado.	

## 5.8 Función "Login" (Inicio de sesión)

El sistema de gestión de vídeo Helion incluye una función de inicio de sesión/cierre de sesión para gestionar el acceso de los usuarios. La función de inicio de sesión puede configurarse como activa por defecto al iniciar el sistema o sólo después de un cierre de sesión. La pantalla de inicio de sesión requiere que se rellenen 2 campos obligatorios, nombre de usuario y contraseña, para poder acceder al sistema.



Una vez introducidas las credenciales correctas, el sistema mostrará la interfaz gráfica inicial de Helion (interfaz de enrutamiento de vídeo).

Pulse el icono  para cerrar la sesión y ser redirigido a la pantalla de credenciales.



## 6 Instrucciones de eliminación

Los equipos eléctricos que ya no se utilizan no deben eliminarse como residuos urbanos normales. Las sustancias y los materiales que contienen deben eliminarse por separado y de forma adecuada, de modo que puedan reciclarse para la fabricación de productos nuevos. Videomed S.r.l. ofrece un servicio de recogida de residuos y eliminación ambientalmente sostenible para todos los productos Videomed S.r.l.

El reciclaje y la eliminación los realiza Videomed S.r.l. sin coste adicional para el operador.

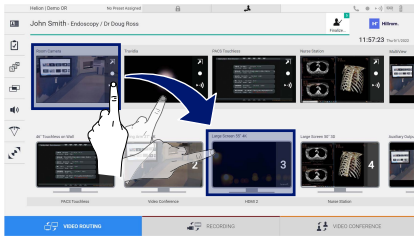


Para informar del envío de los dispositivos retirados, llame al +39 049 9819113.

La asistencia está siempre disponible para aclarar cualquier duda sobre el reciclaje y la eliminación de los productos.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con las leyes y normativas vigentes en el país.

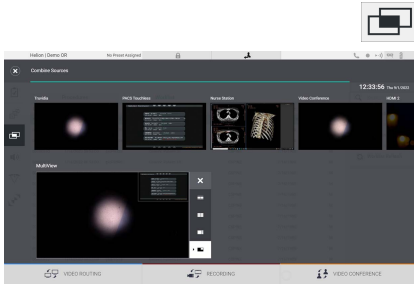
## 7 Anexo I - Manual breve



### Enrutamiento de vídeo

Para enviar una señal de vídeo a un monitor, arrastre la imagen correspondiente de la lista de fuentes disponibles y suéltela en uno de los monitores habilitados. La vista previa de la señal de vídeo enviada se mostrará en el icono del monitor correspondiente y se actualizará periódicamente.

Para eliminar la señal de un monitor, selecciónelo en la lista de monitores y pulse **X**.



### Vista múltiple

En la sección de vista múltiple es posible crear una composición de 2 o 4 imágenes entre las disponibles en la lista de fuentes.

Seleccione la composición deseada entre PIP, PaP, PoP y Quadview. A continuación, proceda a poblar esta composición arrastrando, una a una, las imágenes de las fuentes y soltándolas en las casillas correspondientes.

Para eliminar una imagen de un cuadro, pulse **X** y aparecerá en la parte superior derecha del cuadro una vez seleccionado. Una vez completada la composición del mosaico, vuelva a la sección de enrutamiento de vídeo pulsando el icono azul relativo.



### Control de la cámara PTZ

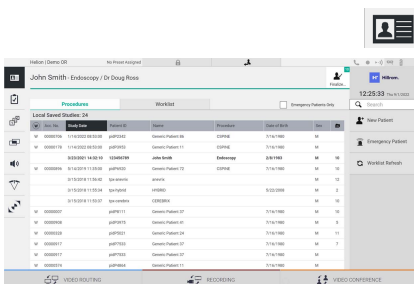
Pulse **↗** en la vista previa de la cámara de la sala para abrir la vista previa en directo. Aparecerán los botones para controlar la cámara. El sistema permite cambiar la posición y el nivel de zoom de la cámara.

### Grabación

Para grabar un vídeo o una foto, es necesario seleccionar/insertar un paciente en la sección correspondiente.

### Datos del paciente

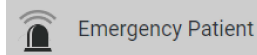
En la pantalla principal se muestra la lista de pacientes creados anteriormente. Para insertar un paciente nuevo, seleccione una de las opciones de la sección de la derecha:



Introduzca los datos del paciente nuevo (los campos marcados con \* son obligatorios).

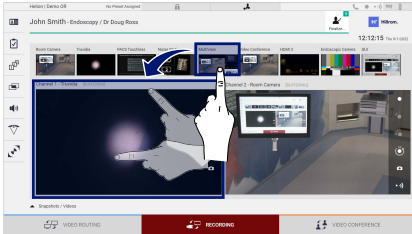


Pulse Worklist Refresh (Actualizar lista de trabajo) para descargar la lista de pacientes en modo automático.



### Inserción urgente

Con esta opción es posible crear un estudio con un nombre de identificación aleatorio llamado Emergency Patient (Paciente en emergencia).



### Selección de las señales que se van a grabar





Arrastre la fuente deseada a la casilla Canal de grabación para activar las funciones básicas de grabación:

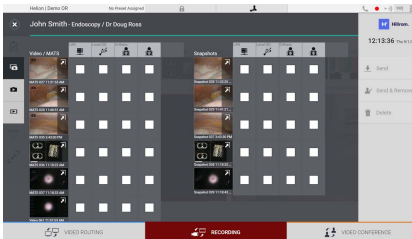


### Inicio/parada de la grabación



### Captura instantánea

Pulse  para proceder al cierre de la ficha del paciente y a la exportación de los archivos. Seleccione los elementos que se van a exportar y proceda a la exportación , borrado  o exportación de los elementos seleccionados y posterior borrado del paciente de la lista de pacientes .



Esta página está intencionadamente en blanco.

Esta página está intencionadamente en blanco.



**Hillrom™**

